



AESCULAP® Sterilcontainer System

Gesamtkatalog

AESCULAP® Sterilcontainer System

Inhalt

Sterilcontainer

- PRIMELine® PRO
- BASIS
- Mini Sterilcontainer
- Dental Sterilcontainer
- Optik Sterilcontainer
- XXL Endo Sterilcontainer und Zubehör
- Entsorgungscontainer

Siebkörbe

- Siebkorbkonfigurator
- Siebkorb mit Füßen
- Siebkorb ohne Füße
- Siebkorbeinsätze
- Siebkorbdeckel (JF & JG)
- Spezialsiebkörbe
- Optiksiebkörbe
- Lagerungsrack für MIC-Instrumente und Trokare

Aesculap InOS® – Instrumenten Organisationssystem

- Organisation und Schutz chirurgischer Instrumente
- Instrumentenstege und -halterungen
- Silikonmatten
- Montageanleitung

Zubehör


- Kennzeichnungsschilder
- Filterzubehör

Verbrauchsmaterial

- Dauerfilter
- Einmal-Papierfilter
- Indikatoretiketten
- Plomben
- Pflegemittel
- Etiketten und Zubehör

Oft kopiert. Nie erreicht.

Das Original von Aesculap

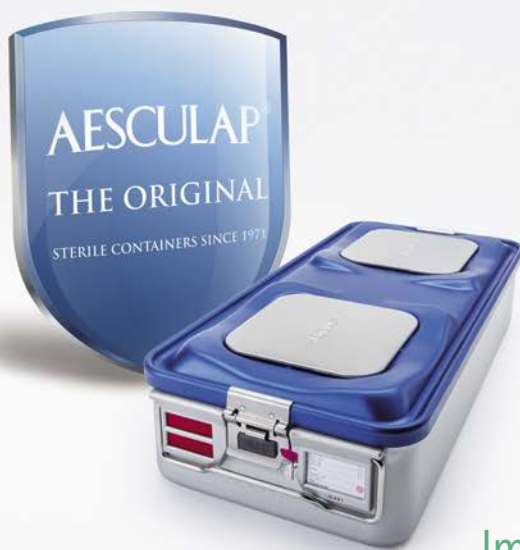

Immer besser. Von Anfang an.

Im Jahr 1971 revolutionierte Aesculap mit dem weltweit ersten Sterilcontainer die Verpackung und Bereitstellung steriler Instrumente.

Bis zum heutigen Tag hat sich das Original von Aesculap als Universallösung etabliert, und somit ist Aesculap der Weltmarktführer bei Sterilcontainern.



AESCULAP® Sterilcontainer System

Weltweit führender Anbieter seit Jahrzehnten

Aesculap ist ein seit mehr als 50 Jahren
führender Hersteller von Sterilcontainern.



Mit der Entwicklung und Markteinführung des ersten echten Sterilcontainers 1971 schuf Aesculap ein weltweites Novum. Mit der innovativen Technologie sowie der komfortablen Handhabung haben sich AESCULAP® Sterilcontainer zu einem festen Bestandteil in Krankenhäusern weltweit etabliert. Mit AESCULAP® Sterilcontainern wird der gesamte Prozess standardisierbar, kontrollierbar und dokumentierbar: von der Lagerung über den Transport bis hin zur aseptischen Bereitstellung der sterilen Instrumente im Operationssaal. Selbst bei der Entsorgung schützt das AESCULAP® Sterilcontainer System den Anwender in der Klinik zuverlässig vor Kontamination.


Unsere Kunden erhalten mit dem AESCULAP® Sterilcontainer System eine umfangreiche und praxisbewährte Produktpalette für die Sterilgutverpackung.

Es stehen verschiedene Versionen und Größen an Sterilcontainern sowie ein umfangreiches Zubehör mit unterschiedlichen Siebkorbvarianten zur Verfügung, die zusammen mit dem bewährten Aesculap InOS® Organisationssystem einen verlässlichen Schutz für einen Großteil aller chirurgischen Instrumentensiebe ermöglichen.





Die richtigen Instrumente
zur richtigen Zeit
in sterilem, funktionalem Zustand
am richtigen Einsatzort
mit hoher Wirtschaftlichkeit (1)
im zuverlässigen Verpackungssystem

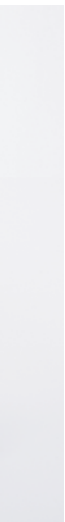

(1) Krohn M, Fengler J, Mickley T, Flessa S. Analysis of processes and costs of alternative packaging options of sterile goods in hospitals - a case study in two German hospitals. Health Economics Review. 2019;9:1.

AESCULAP® Sterilcontainer System

Weltweit führender Anbieter seit Jahrzehnten



Perforierte Weichverpackungen können
folgeschwere Auswirkungen haben ...



... setzen Sie besser auf Stabilität mit dem
AESCULAP® Sterilcontainer System.

- (1) Krohn M, Fengler J, Mickley T, Flessa S. Analysis of processes and costs of alternative packaging options of sterile goods in hospitals - a case study in two German hospitals. Health Economics Review. 2019;9:1.
- (2) Waked WR, Simpson AK, Miller CP, Magit DP, Grauer JN. Sterilization wrap inspections do not adequately evaluate instrument sterility. Clin Orthop Relat Res. 2007;462:207-11.

AESCULAP® Sterilcontainer System

Qualität ohne Kompromisse – Made in Germany

Innovation Factory in Tuttlingen – Innovation trifft auf Tradition

Seit über 50 Jahren wird das AESCULAP® Sterilcontainer System am Standort Tuttlingen / Deutschland gefertigt. Alle Komponenten des AESCULAP® Sterilcontainers entsprechen den nationalen und internationalen Anforderungen und Normen (z. B. DIN EN ISO 11607-1). Das solide, robuste Design* und die von Aesculap eingesetzten Fertigungstechnologien erlauben ein hohes Maß an Formgenauigkeit und Stabilität der Sterilcontainer, Instrumentensiebkörbe und aller anderen Systemkomponenten.





Mit einer zeitgemäßen Industriearchitektur greift Aesculap mit der im Juni 2015 eingeweihten Innovation Factory die B. Braun Unternehmenswerte auf: Innovation schaffen, Effizienz steigern und Nachhaltigkeit leben. Das Ziel ist die intelligente Fabrik. Diese zeichnet sich durch Wandlungsfähigkeit, Ressourceneffizienz und ergonomische Gestaltung aus.

Heute schon an morgen denken!

Die Innovation Factory erfüllt die Kriterien des Silber-Zertifikats der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

Das Werk beherbergt unter anderem eine vollautomatische Fertigungslinie für Container mit zehn Verarbeitungsstationen, die mit sieben Robotern verbunden sind, sowie ein vollautomatisches Rohstofflager mit ca. 600 Lagerplätzen. Das großzügige Flächenangebot mit modernster Ausstattung bietet Platz für rund 500 Mitarbeiter. Produktion, Entwicklung und Produktmanagement sind räumlich miteinander verbunden. Damit wird ein schneller und ständiger Austausch zwischen allen Bereichen gewährleistet, was die Basis für eine zukunftsorientierte Lösungsfindung und -umsetzung darstellt.


AESCULAP® Sterilcontainer System

Qualität ohne Kompromisse – Made in Germany

AESCULAP® Sterilcontainer werden auf der Grundlage der neuesten nationalen und internationalen Normen geprüft.



EN ISO 11607-1
EN 868-8

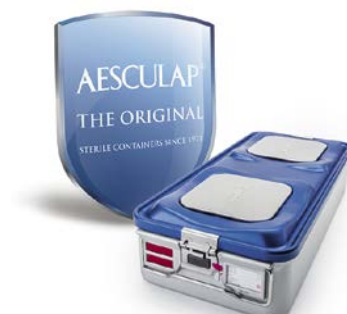

Die 3 Säulen der Sterilcontainer-Prüfung | Von der Produktion bis zum Einsatz im Krankenhaus.
Nähere Informationen dazu finden Sie in unserem Whitepaper.

Aesculap Technischer Service



AESCULAP® Sterilcontainer schützen das Sterilgut vor äußeren Einflüssen und halten es steril, wenn es verwendet wird. Sollten jedoch an den Sterilcontainern Schäden auftreten (beispielsweise durch Verformung oder Verschleiß) können diese in den meisten Fällen repariert werden.

Originalersatzteile für den AESCULAP® Sterilcontainer sind mit allen Generationen kompatibel, sodass der Sterilcontainer bei einer Reparatur immer auf den neuesten Stand gebracht wird. Somit trägt jede Reparatur durch den technischen Kundendienst von Aesculap zum Werterhalt Ihres Sterilcontainerbestandes bei.

Verwenden Sie keine beschädigten Sterilcontainer! Bitte prüfen Sie Ihren AESCULAP® Sterilcontainer vor jeder Anwendung. Die genaue Beschreibung finden Sie in der AESCULAP® Gebrauchsanweisung und auf den AESCULAP® Postern zur Funktionsprüfung. Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf darauf an.

AESCULAP® Sterilcontainer System

Hohe Flexibilität: Aufgrund der identischen Wannen können Sie zwischen zwei verschiedenen Systemen wählen. Die Verwendung bereits vorhandener AESCULAP® Containerwannen spart Anschaffungskosten.

Die umfangreiche und praxisbewährte AESCULAP® Produktpalette zur Sterilgutverpackung bietet eine Vielfalt an Verpackungslösungen für alle verwendeten Instrumentensiebe. Mit Sterilcontainern in verschiedenen Versionen und Größen sowie dem umfangreichen Zubehör stellt das Sterilcontainer-System eine Universallösung für die Sterilgutversorgung mit chirurgischen Instrumenten dar.



PRIMELine® PRO



BASIS



AESCULAP® Sterilcontainer System

PRIMELine® PRO

Der PRIMELine® PRO Containerdeckel aus Aluminium ist mit dem bewährten permanenten Keimbarrieresystem von Aesculap ausgestattet. Dieses System besteht aus einer Kartusche mit einem gut geschützten, integrierten PTFE-(Polytetrafluorethylen-) Filter. Diese Keimbarriere wurde für 5.000 Sterilisationszyklen gemäß EN 868-8 (2019), Anhang H validiert und ermöglicht daher in der Regel eine lebenslange Funktion (im alltäglichen Krankeneinsatz).

Ein Filterwechsel ist somit in der Regel nicht erforderlich, was Zeit und Prozesskosten spart. Für den PRIMELine® PRO Deckel wurde eine Reinigungsvalidierung in einem automatisierten Verfahren durchgeführt. Es wurde ein positives Reinigungsergebnis erreicht, das für den alltäglichen Gebrauch im Krankenhaus geeignet ist.

Das Reinigungsergebnis entsprach in vollem Umfang den Akzeptanzkriterien.



- Stabiler, robuster Aluminiumdeckel
- In der Regel kein Filterwechsel erforderlich – spart Zeit und Prozesskosten
- Reinigungsvalidierung entspricht in vollem Umfang den Akzeptanzkriterien
- In 5 Farben erhältlich (rot, blau, grün, gold und silber)
- Kompatibel mit allen Containerwannen (1/1, 1/2, 3/4) ab Baujahr 1988


Wirkmechanismus eines AESCULAP® Sterilcontainers bei der Dampfsterilisation. Nähere Informationen dazu finden Sie in unserem Whitepaper.



BASIS

Das Grundmodell aus Aluminium zur Verwendung mit AESCULAP® Einweg-Sterilfiltern oder mit dem AESCULAP® PTFE-Dauerfilter für 1.000 Sterilisationen.

Sofern gewünscht, kann die BASIS-Version mit einem Schutzdeckel nachgerüstet werden. Doch der Sterilcontainer ist auch ohne Schutzdeckel voll funktionsfähig. Die beiden Deckel lassen sich nur trennen, wenn der Sterilcontainer zur besseren Reinigung geöffnet wird. Zu diesem Zweck befindet sich auf der Innenseite ein Druckknopf.

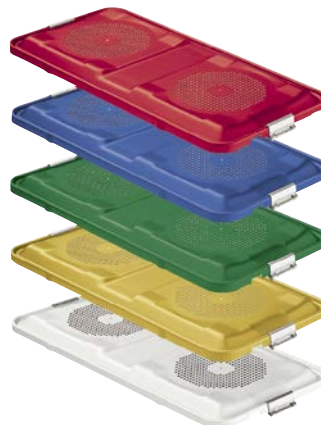

AESCULAP® Sterilcontainer System

AESCULAP® Sterilfilter

Verschiedene Filter für unterschiedliche Anforderungen




AESCULAP® permanentes Keimbarrieresystem aus PTFE (Polytetrafluorethylen) für 5.000 Sterilisationszyklen validiert gemäß EN 868-8, für eine lebenslange Funktion (im alltäglichen Krankeneinsatz). Ein Filterwechsel ist somit in der Regel nicht erforderlich, was Zeit und Prozesskosten spart. Zur Dampfsterilisation in einem gemäß EN ISO17665-1 validierten fraktionierten Vakuumverfahren. Integriert in den PRIMELine® PRO Sterilcontainerdeckel.

AESCULAP® Papierfilter für den einmaligen Gebrauch. Die Filter zur Dampfsterilisation sind mit einem Indikator gemäß EN ISO 11140-1 Typ 1 versehen. Somit kann visuell eindeutig zwischen gebrauchten und nicht gebrauchten Filtern unterschieden werden. Für den Einsatz im BASIS-Sterilcontainerdeckel.

AESCULAP® Dauerfilter aus PTFE (Polytetrafluorethylen) für 1.000 Sterilisationszyklen (zur Dampfsterilisation in einem gemäß EN ISO17665-1 validierten fraktionierten Vakuumverfahren). Für den Einsatz im BASIS-Sterilcontainerdeckel.



Wirkmechanismus eines Filters für Sterilcontainer in der Dampfsterilisation. Nähere Informationen dazu finden Sie in unserem Whitepaper.

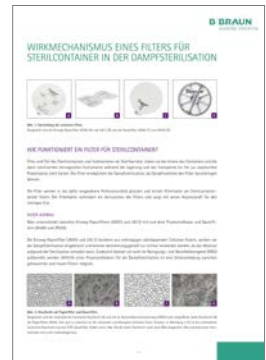

Papierfilter und Dauerfilter werden durch die AESCULAP® Filterhalterung im Deckel befestigt (BASIS). Diese ist mit einer langlebigen Silikondichtung versehen und sorgt für einen festen Sitz des Filters. Die Filterhalterung ist mit einem Sicherheitsverschluss (zwei Entriegelungsknöpfe) ausgerüstet, um ein unkontrolliertes Lösen des Filters zu verhindern. Zudem ermöglicht sie dadurch ein schnelles Wechseln des Filters. Das hörbare Einrasten erleichtert die Kontrolle.



Filterhalterung mit Sicherheitsverschluss

- Verhindert unkontrolliertes Lösen
- Schneller Filterwechsel
- Hörbares Einrasten



AESCULAP® Sterilcontainer System

Das AESCULAP® Sterilcontainer System im täglichen Einsatz

In der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte

Nach der Reinigung und Desinfektion wird eine visuelle Funktionsprüfung durchgeführt und der Dauerfilter ebenfalls kontrolliert oder bei Verwendung eines Einmal-Papierfilters dieser neu eingelegt.



In der Folge wird der Sterilcontainer auf beiden Seiten verplombt. Dann wird das Produktionsetikett angebracht. Der Sterilcontainer ist nun bereit für die Sterilisation.

Der Sterilcontainer kann mithilfe der farbcodierten Etiketten beschriftet werden, z. B. mit einer Information zum Siebinhalt oder der Zugehörigkeit (Neuro, OP 1, Haus A usw.).



Danach wird das gepackte Instrumentensieb in die Containerwanne gelegt. Anschließend wird der Deckel aufgesetzt und verschlossen.

Sterilcontainer verplombt mit der AESCULAP® Kunststoffplombe mit Indikator (1).



Sterilcontainer verplombt mit dem AESCULAP® Indikatoretikett (1).

Im Operationssaal

Nach der Sterilisation und der entsprechenden Abkühlphase werden die Sterilcontainer in das Sterilgutlager gebracht. Die Instrumentensiebe sind nun wieder einsatzbereit. Die Lagerzeit (bis zu 1 Jahr) der AESCULAP® Sterilcontainer wurde in verschiedenen Langzeitstudien untersucht. Die Aufrechterhaltung der Sterilität konnte über den gesamten Zeitraum nachgewiesen werden. Die in den Untersuchungen angewendeten Lagerbedingungen entsprachen dabei der DGSV Empfehlung des Fachausschusses Qualität (2).

Die anreichende Pflegekraft bringt den verschlossenen Sterilcontainer in den OP-Bereich und prüft, ob die Plombe unversehrt ist und sich der Indikator verändert hat. Dann wird der Sterilcontainer geöffnet. Dabei werden die Containerplomben durch die Verschlusslaschen des Sterilcontainers zerstört.* Die anreichende Pflegekraft hebt den Deckel nach oben und tritt zurück. Nun wird geprüft, ob der Filter und die Dichtung intakt sind. Danach wird der Deckel abgelegt.

Die instrumentierende Pflegekraft hebt das Instrumentensieb aus dem Sterilcontainer und legt es auf den Bereitstellungstisch.



* Alternativ:
Aufbrechen
der Plombe mit
der Hand.

AESCULAP® Sterilcontainer System

Schnell, zuverlässig und effizient

Welcher Sterilcontainer ist für welches Sterilisationsverfahren geeignet? – Eine Übersicht
Für alle AESCULAP® Sterilcontainer mit CE-Kennzeichnung

		Dampfsterilisation (1)		Niedrigtemperaturverfahren		
		Fraktioniertes Vakuumverfahren	Gravitationsverfahren	Sterrad® 100S, 200, NX, 100NX	STERIS AMSCO® V-PRO® 1, V-PRO® 1 Plus	Eto (2)
Sterilcontainer	BASIS	JK Serie ✓	JN Serie ✓	inkompatibel	inkompatibel	nicht validiert
	PRIMELine®PRO	JK Serie ✓	nicht validiert	inkompatibel	inkompatibel	inkompatibel
	Optikcontainer	✓	nicht validiert	JM020+JM021 ✓	JM020+JM021 ✓	✓
	Minicontainer	JK Serie ✓	JN Serie ✓	JM188+JM174 ✓	JM188+JM174 ✓	nicht validiert
	Dentalcontainer	JK Serie ✓	JN Serie (3) ✓	inkompatibel	inkompatibel	nicht validiert
	XXL Endocontainer	JK Serie ✓	JN Serie ✓	inkompatibel	inkompatibel	nicht validiert
Filter	Papier – zum Einmalgebrauch	✓	✓	inkompatibel	inkompatibel	✓
	PTFE – wiederverwendbar	✓	✓	inkompatibel	inkompatibel	nicht validiert
	Polypropylen – zum Einmalgebrauch (JF167)	nicht validiert	nicht validiert	✓	✓	nicht validiert

OK (teilweise nur bestimmte Artikelnummern – siehe Hinweis)
nicht validiert
inkompatibel

(1) The sterilization must be done in a steam sterilization process validated according to ISO 17665-1 in a sterilizer according to EN 285.

(2) The sterilization must be validated according to EN 550/ISO 11135-1.

(3) Except JN292, JN294, JN295, JN296 – these are for the fractionated vacuum process only.

Aesculap Akademie

Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen



Weiterbildungsveranstaltungen in der Aesculap Akademie, Referententätigkeiten unserer fachkundigen Aesculap Mitarbeiter bei nationalen und internationalen Kongressen und Veranstaltungen und vor allem eine umfangreiche Beratungsleistung beim Anwender selbst – das ist unser Beitrag für eine kontinuierliche Verbesserung der Sterilgutversorgung weltweit.

Parallel dazu entwickeln wir das AESCULAP® Sterilcontainer-System ständig weiter und sind stets im Dialog mit unseren Kunden, um Ihnen auch in der Zukunft zuverlässige Lösungen zur Verfügung zu stellen. Dieser Wissensaustausch steht im Mittelpunkt unseres Handelns.



Vision – Mission – Versprechen

Unsere Vision: Wir setzen nachhaltige Standards zum Wohl der Patienten und um unsere Umwelt auch für nachfolgende Generationen zu erhalten.

Unsere Mission: Im AESCULAP® Sterilcontainer System steht das richtige Instrument zur richtigen Zeit am Einsatzort bereit, in einem sterilen Zustand und zu niedrigen Prozesskosten.

Unser Versprechen: Seit über 50 Jahren stehen wir im Dialog mit unseren Kunden, um Ihnen zuverlässige Lösungen zur Verfügung zu stellen. Dieser Dialog wird auch in Zukunft im Mittelpunkt unseres Handelns stehen.



Tuttlingen | Berlin | Bochum

AESCLAP Aicon®

Ein Sprung nach vorn
in der Sterilgutversorgung

AESCLAP Aicon® –
Nähere Informationen dazu
finden Sie in unserem Katalog.



AESCLAP Aicon® – das neue Sterilcontainer System

Entdecken Sie das Portfolio und
deren Prozessvorteile.

<https://www.bbraun.de/aesclapaicon>



reddot winner 2020



DESIGN
AWARD
2021



Sterilcontainer

PRIMELine® PRO

Größe 1/1

Deckel zur individuellen Farbzusammenstellung

	Farbe
JP101	rot
JP102	blau
JP103	grün
JP104	gold
JP105	silber



	
	JK440
	JK441
	JK442
	JK444
	JK446

Wannen ohne Bodenperforation = JK

Maßtabellen PRIME[®]Line PRO

Größe 1/1

Wanne 1/1		Deckel		Sterilcontainer mit Deckel
	Außenmaß		Außenmaß	 Außenmaß Innenmaß
JK440	592 x 274 x 90	JP101 - JP105	588 x 281 x 36	592 x 281 x 107 544 x 258 x 75
JK441	592 x 274 x 120			592 x 281 x 137 544 x 258 x 105
JK442	592 x 274 x 135			592 x 281 x 152 544 x 258 x 120
JK444	592 x 274 x 187			592 x 281 x 204 544 x 258 x 172
JK446	592 x 274 x 247			592 x 281 x 264 544 x 258 x 232

PRIMELine® PRO

Größe 3/4

Deckel zur individuellen Farbzusammenstellung

	Farbe
JP111	rot
JP112	blau
JP113	grün
JP114	gold
JP115	silber



	
	JK740
	JK741
	JK742
	JK744

Wannen ohne Bodenperforation = JK

Maßtabellen PRIMELine® PRO

Größe 3/4

Wanne 3/4		Deckel		Sterilcontainer mit Deckel
	Außenmaß		Außenmaß	 Außenmaß Innenmaß
JK740	470 x 274 x 90	JP111 - JP115	465 x 281 x 36	470 x 281 x 107 421 x 258 x 75
JK741	470 x 274 x 120			470 x 281 x 137 421 x 258 x 105
JK742	470 x 274 x 135			470 x 281 x 152 421 x 258 x 120
JK744	470 x 274 x 187			470 x 281 x 204 421 x 258 x 172

Sterilcontainer

PRIMELine® PRO

Größe 1/2

Deckel zur individuellen Farbzusammenstellung

für JK339	für JK340-JK346	Farbe
JP131	JP121	rot
JP132	JP122	blau
JP133	JP123	grün
JP134	JP124	gold
JP135	JP125	silber



	JK339 ohne Tragegriff
	JK340
	JK341
	JK342
	JK344
	JK346

Wannen ohne Bodenperforation = JK

Maßtabellen PRIMELine® PRO

Größe 1/2

Wanne 1/2		Deckel		Sterilcontainer mit Deckel
	Außenmaß		Außenmaß	 Außenmaß Innenmaß
JK339 ohne Tragegriff	300 x 274 x 57	JP131 - JP135	298 x 281 x 36	300 x 281 x 74 260 x 265 x 35
JK340	300 x 274 x 90	JP121 - JP125	298 x 281 x 36	300 x 281 x 107 254 x 258 x 75
JK341	300 x 274 x 120			300 x 281 x 137 254 x 258 x 105
JK342	300 x 274 x 135			300 x 281 x 152 254 x 258 x 120
JK344	300 x 274 x 187			300 x 281 x 204 254 x 258 x 172
JK346	300 x 274 x 247			300 x 281 x 264 254 x 258 x 232


BASIS

Größe 1/1

Deckel zur individuellen Farbzusammenstellung
Unterdeckel Oberdeckel

	Farbe
JK485	rot
JK486	blau
JK487	grün
JK488	gold
JK489	silber

	Farbe
JK475A	rot
JK476A	blau
JK477A	grün
JK478A	gold
JK479A	silber

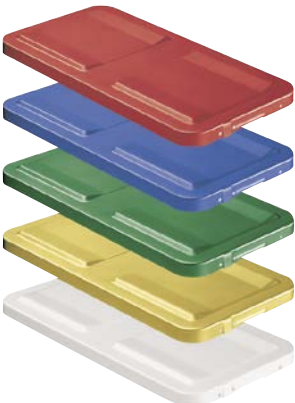

		
	JK440	JN440
	JK441	JN441
	JK442	JN442
	JK444	JN444
	JK446	JN446

Wannen ohne Boden-
perforation = JK



Wannen mit Boden-
perforation = JN



JF101R Abstellrahmen für Siebtrays

Maßtabellen BASIS

Größe 1/1

Wanne 1/1		Unterdeckel		Oberdeckel		Sterilcontainer mit Unterdeckel	Sterilcontainer mit Unter- und Oberdeckel
	Außenmaß		Außenmaß		Außenmaß	 Außenmaß Innenmaß	 Außenmaß Innenmaß
JK440	592 x 274 x 90	JK485 - JK489	588 x 285 x 36	JK475A - JK479A	588 x 291 x 36	592 x 285 x 108 544 x 258 x 75	592 x 291 x 115 544 x 258 x 75
JK441	592 x 274 x 120					592 x 285 x 138 544 x 258 x 105	592 x 291 x 145 544 x 258 x 105
JK442	592 x 274 x 135					592 x 285 x 153 544 x 258 x 120	592 x 291 x 160 544 x 258 x 120
JK444	592 x 274 x 187					592 x 285 x 205 544 x 258 x 172	592 x 291 x 212 544 x 258 x 172
JK446	592 x 274 x 247					592 x 285 x 265 544 x 258 x 232	592 x 291 x 272 544 x 258 x 232

Wanne 1/1		Unterdeckel		Oberdeckel		Sterilcontainer mit Unterdeckel	Sterilcontainer mit Unter- und Oberdeckel
	Außenmaß		Außenmaß		Außenmaß	 Außenmaß Innenmaß	 Außenmaß Innenmaß
JN440	592 x 274 x 90	JK485 - JK489	588 x 285 x 36	JK475A - JK479A	588 x 291 x 36	592 x 285 x 108 544 x 258 x 63	592 x 291 x 115 544 x 258 x 63
JN441	592 x 274 x 120					592 x 285 x 138 544 x 258 x 93	592 x 291 x 145 544 x 258 x 93
JN442	592 x 274 x 135					592 x 285 x 153 544 x 258 x 108	592 x 291 x 160 544 x 258 x 108
JN444	592 x 274 x 187					592 x 285 x 205 544 x 258 x 160	592 x 291 x 212 544 x 258 x 160
JN446	592 x 274 x 247					592 x 285 x 265 544 x 258 x 220	592 x 291 x 272 544 x 258 x 220



BASIS

Größe 3/4

Deckel zur individuellen Farbzusammenstellung
Unterdeckel Oberdeckel

	Farbe
JK785	rot
JK786	blau
JK787	grün
JK788	gold
JK789	silber

	Farbe
JK775A	rot
JK776A	blau
JK777A	grün
JK778A	gold
JK779A	silber

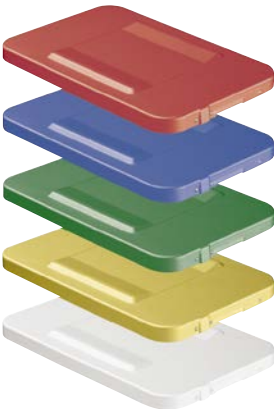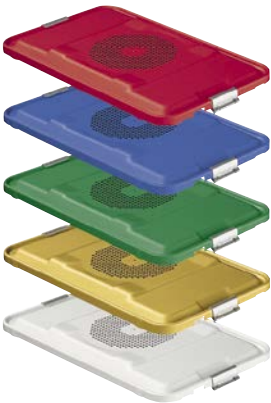

		
	JK740	JN740
	JK741	JN741
	JK742	JN742
	JK744	JN744

Wannen ohne Boden-
perforation = JK



Wannen mit Boden-
perforation = JN



JF104R Abstellrahmen für Siebtrays

Maßtabellen BASIS

Größe 3/4



Wanne 3/4		Unterdeckel		Oberdeckel		Sterilcontainer mit Unterdeckel	Sterilcontainer mit Unter- und Oberdeckel
	Außenmaß		Außenmaß		Außenmaß	 Außenmaß Innenmaß	 Außenmaß Innenmaß
JK740	470 x 274 x 90	JK785 - JK789	460 x 285 x 36	JK775A - JK779A	460 x 291 x 36	470 x 285 x 108 421 x 258 x 75	470 x 291 x 115 421 x 258 x 75
JK741	470 x 274 x 120					470 x 285 x 138 421 x 258 x 105	470 x 291 x 145 421 x 258 x 105
JK742	470 x 274 x 135					470 x 285 x 153 421 x 258 x 120	470 x 291 x 160 421 x 258 x 120
JK744	470 x 274 x 187					470 x 285 x 205 421 x 258 x 172	470 x 291 x 212 421 x 258 x 172

Wanne 3/4		Unterdeckel		Oberdeckel		Sterilcontainer mit Unterdeckel	Sterilcontainer mit Unter- und Oberdeckel
	Außenmaß		Außenmaß		Außenmaß	 Außenmaß Innenmaß	 Außenmaß Innenmaß
JN740	470 x 274 x 90	JK785 - JK789	460 x 285 x 36	JK775A - JK779A	460 x 291 x 36	470 x 285 x 108 421 x 258 x 63	470 x 291 x 115 421 x 258 x 63
JN741	470 x 274 x 120					470 x 285 x 138 421 x 258 x 93	470 x 291 x 145 421 x 258 x 93
JN742	470 x 274 x 135					470 x 285 x 153 421 x 258 x 108	470 x 291 x 160 421 x 258 x 108
JN744	470 x 274 x 187					470 x 285 x 205 421 x 258 x 160	470 x 291 x 212 421 x 258 x 160

Größe 1/2

Unterdeckel

für JK339	für JK340-JK346	Farbe	für JK339-JK346	Farbe
JK395	JK385	rot	JK375A	rot
JK396	JK386	blau	JK376A	blau
JK397	JK387	grün	JK377A	grün
JK398	JK388	gold	JK378A	gold
JK399	JK389	silber	JK379A	silber

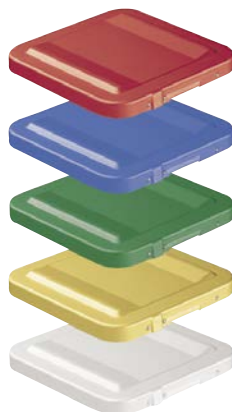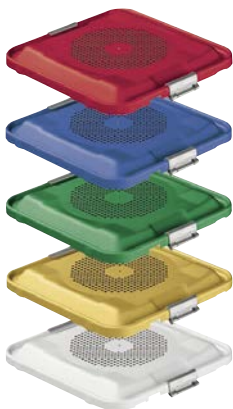

	JK339 ohne Tragegriff	-
	JK340	JN340
	JK341	JN341
	JK342	JN342
	JK344	JN344
	JK346	JN346



36



Maßtabellen BASIS

Größe 1/2

Wanne 1/2	Unterdeckel	Oberdeckel	Sterilcontainer mit Unterdeckel	Sterilcontainer mit Unter- und Oberdeckel
 Außenmaß	 Außenmaß	 Außenmaß	 Außenmaß Innenmaß	 Außenmaß Innenmaß
JK339 300 x 274 x 57 ohne Tragegriff	JK395 - JK399 298 x 285 x 36	JK375A - JK379A 298 x 291 x 36	300 x 285 x 67 260 x 265 x 35	300 x 291 x 75 260 x 265 x 35
JK340 300 x 274 x 90	JK385 - JK389 298 x 285 x 36	JK375A - JK379A 298 x 291 x 36	300 x 285 x 108 254 x 258 x 75	300 x 291 x 115 254 x 258 x 75
JK341 300 x 274 x 120			300 x 285 x 138 254 x 258 x 105	300 x 291 x 145 254 x 258 x 105
JK342 300 x 274 x 135			300 x 285 x 153 254 x 258 x 120	300 x 291 x 160 254 x 258 x 120
JK344 300 x 274 x 187			300 x 285 x 205 254 x 258 x 172	300 x 291 x 212 254 x 258 x 172
JK346 300 x 274 x 247			300 x 285 x 265 254 x 258 x 232	300 x 291 x 272 254 x 258 x 232

Wanne 1/2	Unterdeckel	Oberdeckel	Sterilcontainer mit Unterdeckel	Sterilcontainer mit Unter- und Oberdeckel
 Außenmaß	 Außenmaß	 Außenmaß	 Außenmaß Innenmaß	 Außenmaß Innenmaß
JN340 300 x 274 x 90	JK385 - JK389 298 x 285 x 36	JK375A - JK379A 298 x 291 x 36	300 x 285 x 108 254 x 258 x 63	300 x 291 x 115 254 x 258 x 63
JN341 300 x 274 x 120			300 x 285 x 138 254 x 258 x 93	300 x 291 x 145 254 x 258 x 93
JN342 300 x 274 x 135			300 x 285 x 153 254 x 258 x 108	300 x 291 x 160 254 x 258 x 108
JN344 300 x 274 x 187			300 x 285 x 205 254 x 258 x 160	300 x 291 x 212 254 x 258 x 160
JN346 300 x 274 x 247			300 x 285 x 265 254 x 258 x 220	300 x 291 x 272 254 x 258 x 220

Mini Sterilcontainer

Mini Sterilcontainer für kleine Siebe und kleine Instrumente

Die Mini Sterilcontainer wurden für kleine Siebe (z.B. kleine Wundversorgung) und kleine, empfindliche Instrumente, insbesondere für die Mikrochirurgie, entwickelt.

Geeignete Sterilisationsverfahren (siehe auch Seite 22):

- Mini Sterilcontainer eignen sich zur Dampfsterilisation im fraktionierten Vakuumverfahren (ohne Bodenperforation) und im Gravitationsverfahren (mit Bodenperforation).
- Gesondert gekennzeichnete Mini Sterilcontainer (siehe auch die folgende Seite) eignen sich zusätzlich zur Sterilisation im Niedrigtemperaturverfahren basierend auf Wasserstoffperoxid im Sterrad® 100 S, Sterrad® 200, Sterrad® NX, Sterrad® 100 NX, STERIS V-PRO® 1 und STERIS V-PRO® 1 Plus.
- Mini Sterilcontainer eignen sich nicht zur Heißluftsterilisation!



Mini Sterilcontainer

Wannen ohne Bodenperforation = JK



Wannen mit Bodenperforation = JN



Deckel zur individuellen Farbzusammenstellung



		Außenmaß Länge x Breite x Höhe (mm)
JK187	JN187	310 x 132 x 30
JK188	JN188	310 x 132 x 57
	JM188*	310 x 132 x 57

	Farbe	Außenmaß Länge x Breite x Höhe (mm)
JK170	rot	305 x 140 x 25
JK171	blau	305 x 140 x 25
JK172	grün	305 x 140 x 25
JK173	gold	305 x 140 x 25
JK174	silber	305 x 140 x 25
JM174*	silber	305 x 140 x 25

Abmessungen komplett – Länge x Breite x Höhe (mm)

	Sterilcontainer, komplett  Außenmaß Innenmaß
Wanne	mit Deckel
JK187	310 x 140 x 40 274 x 126 x 21
JK188	310 x 140 x 67 274 x 126 x 48

	Sterilcontainer, komplett  Außenmaß Innenmaß
Wanne	mit Deckel
JN187	310 x 140 x 40 274 x 126 x 18
JN188	310 x 140 x 67 274 x 126 x 45
JM188*	310 x 140 x 67 274 x 126 x 45

* Zur Sterilisation im Niedrigtemperaturverfahren basierend auf Wasserstoffperoxid im Sterrad® 100 S, Sterrad® 200, Sterrad® NX, Sterrad® 100 NX, STERIS V-PRO® 1 und STERIS V-PRO® 1 Plus. Zur Verwendung zusammen mit dem Einwegfilter JF167 (siehe Seite 89).

Dental Sterilcontainer

Dental Sterilcontainer – das besondere Design nicht nur für die Zahnarztpraxis

AESCULAP® Dental Sterilcontainer eignen sich insbesondere für die Sterilgutversorgung in der Zahnarztpraxis. Die Dental Sterilcontainer passen in alle gängigen Kleinstерilisatoren. Für die Kombination einzelner Instrumentensiebe steht eine breite Palette von Zubehör zur Verfügung.



Hinweis | Dieser Sterilcontainer kann komplett (Deckel und Wanne) unter einer Artikelnummer bestellt werden.

- Die bewährten Spannverschlüsse erleichtern die aseptische Präsentation.
- Die Stapelbarkeit der Sterilcontainer sorgt für einen platzsparenden Sterilgutkreislauf.
- Filterschnellhalterung zum schnellen und einfachen Wechsel der AESCULAP® Sterilfilter.
- An das System angepasste Siebtrays für die Aufbereitung, thermische Desinfektion, Sterilisation sowie Transport und Lagerung der Instrumente.
- Geeignete Sterilisationsverfahren (siehe auch Seite 22): Dental Sterilcontainer eignen sich zur Dampfsterilisation im fraktionierten Vakuumverfahren (ohne Bodenperforation) und im Gravitationsverfahren (mit Bodenperforation). Dental Sterilcontainer eignen sich nicht zur Heißluftsterilisation!

Wannen ohne Bodenperforation



	Außenmaß Innenmaß		Außenmaß		Farbe	Außenmaß
JN292	312 x 190 x 46 277 x 176 x 27	JK286	312 x 185 x 37	JN091	silber	319 x 190 x 25
JN294	312 x 190 x 65 277 x 176 x 46	JK288	312 x 185 x 56			
JN295	312 x 190 x 92 277 x 176 x 73	JK289	312 x 185 x 83			
JN296	312 x 190 x 130 277 x 176 x 111	JK290	312 x 185 x 121			



Wannen mit Bodenperforation



	Außenmaß Innenmaß		Außenmaß		Farbe	Außenmaß
JN092	312 x 190 x 46 277 x 176 x 20	JN086	312 x 185 x 37	JN091	silber	319 x 190 x 25
JN094	312 x 190 x 65 277 x 176 x 39	JN088	312 x 185 x 56			
JN095	312 x 190 x 92 277 x 176 x 66	JN089	312 x 185 x 83			
JN096	312 x 190 x 130 277 x 176 x 104	JN090	312 x 185 x 121			



Optik Sterilcontainer

Separate Lagerung und Bereitstellung der Optiken

- Separate, schnelle aseptische Bereitstellung, unabhängig von Instrumentensieben
- Schutz von empfindlichen Optiken inkl. Lichtleitkabel während Aufbereitung, Transport und Lagerung
- Individuelles Design durch das Organisationssystem Aesculap InOS®
- Geschütztes Perforationsfeld
- Griff auf dem Siebtraydeckel ermöglicht eine einfache aseptische Entnahme
- Stapelbar
- Geeignete Sterilisationsverfahren (siehe auch Seite 20): Der Optik Sterilcontainer eignet sich zur Dampfsterilisation im fraktionierten Vakuumverfahren. Gesondert gekennzeichnete Optik Sterilcontainer (siehe auch die folgende Seite) eignen sich zusätzlich zur Sterilisation im Niedrigtemperaturverfahren basierend auf Wasserstoffperoxid im Sterrad® 100 S, Sterrad® 200, Sterrad® NX, Sterrad® 100 NX, STERIS V-PRO® 1 und STERIS V-PRO® 1 Plus. Der Optik Sterilcontainer eignet sich nicht für das Gravitationsverfahren!



Optik Sterilcontainer

Deckel

Für das fraktionierte Vakuumverfahren
(inkl. Filterhalterung JK098)



	Außenmaß Länge x Breite x Höhe (mm)
JK020	540 x 152 x 28

AESCULAP® Dauerfilter zur Dampfsterilisation, zur Verwendung mit Filterhalterung JK098, Verwendungsdauer 1.000 Reinigungs- und Sterilisationszyklen

Bestelleinheit (PAK): Packung à 2 Stück



Artikel-Nr.	Außenmaß Länge x Breite (mm)
JK091	95 x 215

Wanne

Für das fraktionierte Vakuumverfahren
(inkl. Filterhalterung JK098)



	Außenmaß Länge x Breite x Höhe (mm)
JN021	540 x 144 x 65

AESCULAP® Einwegfilter mit Prozessindikator zur Dampfsterilisation, zur Verwendung mit Filterhalterung JK098

Bestelleinheit (PAK): Packung à 100 Stück



Artikel-Nr.	Außenmaß Länge x Breite (mm)
JF166	118 x 235

Sterilcontainer, komplett

Außenmaß
Innenmaß

540 x 152 x **84**
503 x 134 x **45**

Siebtray

Für bis zu zwei laparoskopische Optiken
und ein Lichtleitkabel

Vorkonfigurierte Siebtrays siehe Seite 60 f.



Artikel-Nr.	Außenmaß Länge x Breite x Höhe (mm)
JF435R	501 x 134 x 45

Kennzeichnungsetikett mit Kleberücken und Prozessindikator* zur Dampfsterilisation und zur Sterilisation mit Ethylenoxid

Bestelleinheit (PAK): Packung à 100 Stück



Artikel-Nr.	Außenmaß Länge x Breite (mm)
JG751	67 x 35

Deckel

Zur Wasserstoffperoxid-Sterilisation im Sterrad® 100 S, Sterrad® 200, Sterrad® NX, Sterrad® 100 NX, STERIS V-PRO® 1 und STERIS V-PRO® 1 Plus, (inkl. Filterhalterung JK098)



	Außenmaß Länge x Breite x Höhe (mm)
JM020	540 x 152 x 28

Wanne

Zur Wasserstoffperoxid-Sterilisation im Sterrad® 100 S, Sterrad® 200, Sterrad® NX, Sterrad® 100 NX, STERIS V-PRO® 1 und STERIS V-PRO® 1 Plus, (inkl. Filterhalterung JK098)



	Außenmaß Länge x Breite x Höhe (mm)
JM021	540 x 144 x 65


Sterilcontainer, komplett

Außenmaß
Innenmaß

540 x 152 x **84**
503 x 134 x **45**

Einwegfilter zur Wasserstoffperoxid-Sterilisation im Sterrad® 100 S, Sterrad® 200, Sterrad® NX, Sterrad® 100 NX, STERIS V-PRO® 1 und STERIS V-PRO® 1 Plus

Bestelleinheit (PAK): Packung à 100 Stück

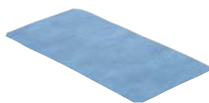

Artikel-Nr.	Außenmaß Länge x Breite (mm)
JF167	235 x 118

Universal-Filterhalterung



Artikel-Nr.	Außenmaß Länge x Breite x Höhe (mm)
JK098	245 x 100 x 6

Kennzeichnungsetikett mit Kleberücken und Prozessindikator* zur Sterilisation mit verdampftem Wasserstoffperoxid

Bestelleinheit (PAK): Packung à 100 Stück



Artikel-Nr.	Außenmaß Länge x Breite (mm)
JG750	67 x 35

XXL Endo Sterilcontainer und Zubehör

- Extra langer Sterilcontainer für endoskopische Instrumente mit einer Schaftlänge von bis zu 420 mm.
- Die Instrumente können bei Bedarf komplett montiert sterilisiert werden.
- Geeignete Sterilisationsverfahren (siehe auch Seite 20): Der XXL Endo Sterilcontainer eignet sich zur Dampfsterilisation im fraktionierten Vakuumverfahren (ohne Bodenperforation) und im Gravitationsverfahren (mit Bodenperforation).
- Achtung: Der Endo Sterilcontainer kann nur in Sterilisatoren mit entsprechender Kammergröße (mindestens 720 mm Nutztiefe) sterilisiert werden.



Wanne

ohne Bodenperforation = JK

mit Bodenperforation = JN

Deckel


Abmessungen komplett –
Länge x Breite x **Höhe** (mm)

		Außenmaß Länge x Breite x Höhe (mm)		Außenmaß Länge x Breite x Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Sterilcontainer, komplett
						Außenmaß Innenmaß
JK443	JN443	711 x 274 x 120	JK490	708 x 280 x 35		
	JN445	711 x 274 x 187			JK443	711 x 285 x 138 667 x 258 x 105
					JN443	711 x 285 x 138 667 x 258 x 93
					JN445	711 x 285 x 205 667 x 258 x 160

Siebkörbe




Artikel-Nr.	Außenmaß Innenmaß
JF232R	660 x 253 x 56 658 x 251 x 42
JF236R	660 x 253 x 86 658 x 251 x 72

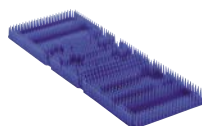Silikon-Noppenmatte
zur Lagerung von Zubehör

Artikel-Nr.	Außenmaß
JF933	610 x 230 x 30


Endorack, passend für JN445

Lagerungsrack für MIC-Instrumente, XXL
enthält: Lagerungsrack XXL, Siebtray mit
Bodenperforation und Silikonmatte für
Instrumente bis zu einer Schaftlänge von
420 mm, passend für JN445 + JK490

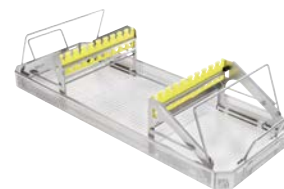

	Außenmaß
PL961R	660 x 253 x 166

Da Vinci® SP Kamera Lagerung
Verwendung in Kombination mit den
XXL Endo Sterilcontainern JN445 und JK490

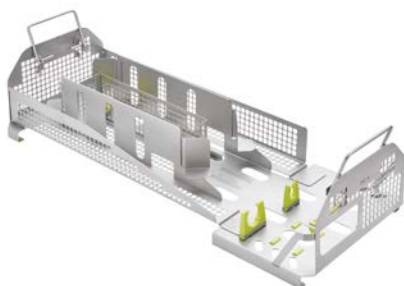

Artikel-Nr.	Außenmaß Innenmaß
JF449R	660 x 253 x 163

Entsorgungscontainer

Entsorgungscontainer vervollständigen den Instrumentenkreislauf. Die geschlossenen Container schützen Personal und Umwelt vor Kontamination beim Transport der benutzten Instrumente.

Die Entsorgungscontainer entsprechen in ihren Abmessungen den Standard-Sterilcontainern. Dies erleichtert den standardisierten und automatisierten Rücklauf und Transport von Instrumenten.

Alle Komponenten der Entsorgungscontainer werden aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Daher können kombinierte Reinigungs- und Desinfektionsmittel im Container verwendet werden und die Entsorgungscontainer können alkalisch gereinigt werden.



Größe des Containers	Wanne ohne Bodenperforation	Außenmaß	Deckel mit Öffnung	Außenmaß	Deckel ohne Öffnung	Außenmaß	Container komplett Außenmaß Innenmaß
1/2	JK060R	295 x 275 x 90	JK067R	295 x 280 x 36	JK068R	295 x 280 x 36	295 x 280 x 102 260 x 260 x 80
1/2	JK062R	295 x 275 x 135	JK067R	295 x 280 x 36	JK068R	295 x 280 x 36	295 x 280 x 150 260 x 260 x 125
1/1	JK262R	586 x 275 x 135	JK267R	586 x 280 x 36	JK268R	586 x 280 x 36	586 x 280 x 150 550 x 260 x 125



Siebkörbe

Siebkorbkonfigurator

Anschauliche Übersicht für JF-Siebkörbe

Welcher Siebkorb passt zu welcher Containerwanne?



JF-Serie

- Schwarze PEEK-Kunststofffüße zum Stapeln
- Seitliche Klappgriffe
- Mattierte Oberfläche
- 4 mm Bodenperforation / 2 mm Seitenperforation
- Kombinierbar mit Aesculap InOS®
- Abgeschrägte Ecken

1/1 kurz


Siebkorb oben			Siebkorb in Kombination mit:								
			Allein	JF211R	JF211R mit Deckel*	JF212R	JF212R mit Deckel*	JF213R	JF213R mit Deckel*	JF214R	JF214R mit Deckel*
Siebkorb unten	JF211R	Containerwanne	JK440 JN440	JK441 JN441	JK441 JN441	JK441 JN442	JK442 JN442	JK442 JN444	JK444 JN444	JK444 JN444	JK444 JN444
	JF211R mit Deckel*				JK441 JN442	JK442 JN444	JK442 JN444			JK444 JN446	JK444 JN446
	JF212R		JK440 JN441	JK441 JN442	JK442 JN442	JK442 JN444	JK444 JN444	JK444 JN444	JK444 JN446	JK446 JN446	JK446 JN446
	JF212R mit Deckel*		JK441 JN441	JK442 JN444	JK442 JN444						
	JF213R		JK441 JN442		JK444 JN444	JK444 JN444			JK446 JN446	JK446 JN446	JK446 JN446
	JF213R mit Deckel*		JK442 JN444	JK444 JN444			JK444 JN446				
	JF214R		JK444 JN444		JK444 JN444	JK444 JN446	JK446 JN446	JK446 JN446	JK446 JN446	JK446 JN446	JK446 JN446
	JF214R mit Deckel*			JK444 JN446		JK446 JN446	JK446 JN446				

*Deckel JF217R



1 Beispiel

- Siebkorb allein: JF212R ohne Deckel
- ➔ Passende Wanne: JK440 oder JN441

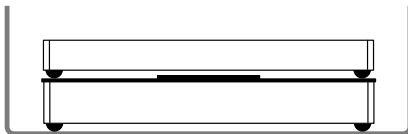

2 Beispiel

- Siebkorb oben: JF212R ohne Deckel
- Siebkorb unten: JF213R mit Deckel
- ➔ Passende Wanne: JK444 oder JN444

JK = Wannen ohne Bodenperforation
(fraktioniertes Vakuumverfahren)



JN = Wannen mit Bodenperforation
(Gravitationsverfahren)



Hinweis | Gemäß EN ISO 868-8 sollte die Beladung insgesamt 10 kg nicht überschreiten, um übermäßige Kondensatbildung zu vermeiden.
Achtung! Abhängig davon, ob JK- oder JN-Wannen verwendet werden, ändert sich die Innenhöhe und somit auch der passende Siebkorb.



JF-Serie

- Schwarze PEEK-Kunststofffüße zum Stapeln
- Seitliche Klappgriffe
- Mattierte Oberfläche
- 4 mm Bodenperforation / 2 mm Seitenperforation
- Kombinierbar mit Aesculap InOS®
- Abgeschrägte Ecken


1/1 lang

Siebkorb oben

Siebkorb in Kombination mit:


			Allein	JF221R	JF221R mit Deckel*	JF222R	JF222R mit Deckel*	JF223R	JF223R mit Deckel*	JF224R	JF224R mit Deckel*
Siebkorb unten	JF221R	Containerwanne	JK440 JN440	JK441 JN441	JK441 JN441	JK441 JN442	JK442 JN442	JK442 JN444	JK444 JN444	JK444 JN444	JK444 JN444
	JF221R mit Deckel*			JK441 JN442	JK442 JN444	JK442 JN444	JK444 JN444	JK444 JN444		JK444 JN446	
	JF222R		1 JK440 JN441	JK441 JN442	JK442 JN442	JK442 JN444		JK444 JN444	JK444 JN446	JK446 JN446	
	JF222R mit Deckel*		JK441 JN441	JK442 JN444	JK442 JN444	JK444 JN444	JK444 JN446				JK446 JN446
	JF223R		JK441 JN442		2 JK444 JN444			JK444 JN446	JK444 JN446	JK446 JN446	
	JF223R mit Deckel*		JK442 JN444	JK444 JN444	JK444 JN444	JK446 JN446	JK446 JN446				JK446 JN446
	JF224R		JK444 JN444	JK444 JN446	JK446 JN446			JK446 JN446	JK446 JN446	JK446	
	JF224R mit Deckel*			JK444 JN446	JK446 JN446						-

*Deckel JF227R

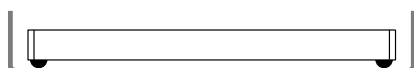

1 Beispiel

- Siebkorb allein: JF222R ohne Deckel
- ➔ Passende Wanne:
JK440 oder JN441

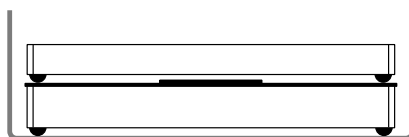

2 Beispiel

- Siebkorb oben: JF222R ohne Deckel
- Siebkorb unten: JF223R mit Deckel
- ➔ Passende Wanne:
JK444 oder JN444

JK = Wannen ohne Bodenperforation
(fraktioniertes Vakuumverfahren)JN = Wannen mit Bodenperforation
(Gravitationsverfahren)

Hinweis | Gemäß EN ISO 868-8 sollte die Beladung insgesamt 10 kg nicht überschreiten, um übermäßige Kondensatbildung zu vermeiden.
Achtung! Abhängig davon, ob JK- oder JN-Wannen verwendet werden, ändert sich die Innenhöhe und somit auch der passende Siebkorb.

Siebkorbkonfigurator

Anschauliche Übersicht für JF-Siebkörbe

Welcher Siebkorb passt zu welcher Containerwanne?




JF-Serie

- Schwarze PEEK-Kunststofffüße zum Stapeln
- Seitliche Klappgriffe
- Mattierte Oberfläche
- 4 mm Bodenperforation / 2 mm Seitenperforation
- Kombinierbar mit Aesculap InOS®
- Abgeschrägte Ecken

3/4


			Siebkorb oben								
			Siebkorb in Kombination mit:								
			Allein	JF251R	JF251R mit Deckel*	JF252R	JF252R mit Deckel*	JF253R	JF253R mit Deckel*	JF254R	JF254R mit Deckel*
Siebkorb unten	JF251R	Containerwanne	JK740 JN740	JK741 JN741	JK741 JN741	JK741 JN742	JK742 JN742	JK742 JN744	JK744 JN744	JK744 JN744	JK744 JN744
	JF251R mit Deckel*			JK741 JN742	JK742 JN744	JK742 JN744		JK744		JK744	
	JF252R		JK740 JN741	JK741 JN742	JK742 JN742	JK742 JN744	JK744 JN744	JK744 JN744		-	
	JF252R mit Deckel*		JK741 JN741	JK742 JN744	JK742 JN744	JK744 JN744			-	-	
	JF253R		JK741 JN742		JK744 JN744				-	-	
	JF253R mit Deckel*		JK742 JN744	JK744 JN744	JK744	-		-	-	-	
	JF254R				JK744	-	-	-	-	-	
	JF254R mit Deckel*		JK744 JN744	JK744		-	-	-	-	-	

*Deckel JF257R

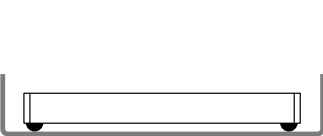

1 Beispiel

- Siebkorb allein: JF252R ohne Deckel
- ➔ Passende Wanne: JK740 oder JN741

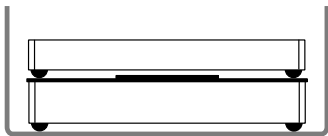

2 Beispiel

- Siebkorb oben: JF252R ohne Deckel
- Siebkorb unten: JF253R mit Deckel
- ➔ Passende Wanne: JK744 oder JN744

JK = Wannen ohne Bodenperforation
(fraktioniertes Vakuumverfahren)



JN = Wannen mit Bodenperforation
(Gravitationsverfahren)



Hinweis | Gemäß EN ISO 868-8 sollte die Beladung insgesamt 7,5 kg nicht überschreiten, um übermäßige Kondensatbildung zu vermeiden.
Achtung! Abhängig davon, ob JK- oder JN-Wannen verwendet werden, ändert sich die Innenhöhe und somit auch der passende Siebkorb.



JF-Serie

- Schwarze PEEK-Kunststofffüße zum Stapeln
- Seitliche Klappgriffe
- Mattierte Oberfläche
- 4 mm Bodenperforation / 2 mm Seitenperforation
- Kombinierbar mit Aesculap InOS®
- Abgeschrägte Ecken

1/2

Siebkorb oben

Siebkorb in Kombination mit:


			Allein	JF111R	JF111R mit Deckel*	JF112R	JF112R mit Deckel*	JF113R	JF113R mit Deckel*	JF114R	JF114R mit Deckel*
Siebkorb unten	JF111R	Containerwanne	JK340 JN340	JK341 JN341	JK341 JN341	JK341 JN342	JK342 JN342	JK342 JN344	JK344 JN344	JK344 JN344	JK344 JN344
	JF111R mit Deckel*		JK340 JN340	JK341 JN341	JK341 JN342	JK342 JN344	JK342 JN344	JK344 JN344		JK344 JN346	JK344 JN346
	JF112R		JK340 JN341	JK341 JN342	JK342 JN342	JK342 JN344	JK344 JN344		JK344 JN346	JK346 JN346	JK346 JN346
	JF112R mit Deckel*		JK341 JN341	JK342 JN344	JK342 JN344	JK344 JN344		JK344 JN346			
	JF113R		JK341 JN342	JK344 JN344	JK344 JN344		JK344 JN346		JK346 JN346	JK346 JN346	JK346 JN346
	JF113R mit Deckel*		JK342 JN344			JK344 JN344		JK344 JN344			
	JF114R		JK344 JN344	JK344 JN344	JK344 JN346	JK346 JN346	JK346 JN346	JK346 JN346	JK346 JN346	JK346 JN346	
	JF114R mit Deckel*		JK344 JN344	JK344 JN346	JK346 JN346	JK346 JN346	JK346 JN346	JK346 JN346	JK346 JN346	JK346 JN346	

*Deckel JF117R



1 Beispiel

- Siebkorb allein: JF112R ohne Deckel
- ➔ Passende Wanne:
JK340 oder JN341

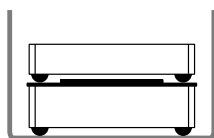

2 Beispiel

- Siebkorb oben: JF112R ohne Deckel
- Siebkorb unten: JF113R mit Deckel
- ➔ Passende Wanne:
JK344 oder JN344

JK = Wannen **ohne Bodenperforation**
(fraktioniertes Vakuumverfahren)



JN = Wannen **mit Bodenperforation**
(Gravitationsverfahren)



Hinweis | Gemäß EN ISO 868-8 sollte die Beladung insgesamt 5 kg nicht überschreiten, um übermäßige Kondensatbildung zu vermeiden.
Achtung! Abhängig davon, ob JK- oder JN-Wannen verwendet werden, ändert sich die Innenhöhe und somit auch der passende Siebkorb.

Siebkörbe

Siebkorb mit Füßen




	 Standard 1/2	Außenmaß Innenmaß	 Standard 3/4	Außenmaß Innenmaß	 Standard 1/1 kurz	Außenmaß Innenmaß	 Standard 1/1 lang	Außenmaß Innenmaß
 36	JF111R	243 x 253 x 36 241 x 251 x 22	JF251R	406 x 253 x 36 404 x 251 x 22	JF211R	485 x 253 x 36 483 x 251 x 22	JF221R	540 x 253 x 36 538 x 251 x 22
 56	JF112R	243 x 253 x 56 241 x 251 x 42	JF252R	406 x 253 x 56 404 x 251 x 42	JF212R	485 x 253 x 56 483 x 251 x 42	JF222R	540 x 253 x 56 538 x 251 x 42
 76	JF113R	243 x 253 x 76 241 x 251 x 62	JF253R	406 x 253 x 76 404 x 251 x 62	JF213R	485 x 253 x 76 483 x 251 x 62	JF223R	540 x 253 x 76 538 x 251 x 62
 106	JF114R	243 x 253 x 106 241 x 251 x 92	JF254R	406 x 253 x 106 404 x 251 x 92	JF214R	485 x 253 x 106 483 x 251 x 92	JF224R	540 x 253 x 106 538 x 251 x 92

Siebkorb ohne Füße



	 Standard 1/2	Außenmaß Innenmaß	 Standard 3/4	Außenmaß Innenmaß	 Standard 1/1 kurz	Außenmaß Innenmaß	 Standard 1/1 lang	Außenmaß Innenmaß
 24	JG111R	243 x 253 x 24 241 x 251 x 22	JG251R	406 x 253 x 24 404 x 251 x 22	JG211R	485 x 253 x 24 483 x 251 x 22	JG221R	540 x 253 x 24 538 x 251 x 22
 44	JG112R	243 x 253 x 44 241 x 251 x 42	JG252R	406 x 253 x 44 404 x 251 x 42	JG212R	485 x 253 x 44 483 x 251 x 42	JG222R	540 x 253 x 44 538 x 251 x 42
 64	JG113R	243 x 253 x 64 241 x 251 x 62	JG253R	406 x 253 x 64 404 x 251 x 62	JG213R	485 x 253 x 64 483 x 251 x 62	JG223R	540 x 253 x 64 538 x 251 x 62
 94	JG114R	243 x 253 x 94 241 x 251 x 92	JG254R	406 x 253 x 94 404 x 251 x 92	JG214R	485 x 253 x 94 483 x 251 x 92	JG224R	540 x 253 x 94 538 x 251 x 92

Siebkorbeinsätze

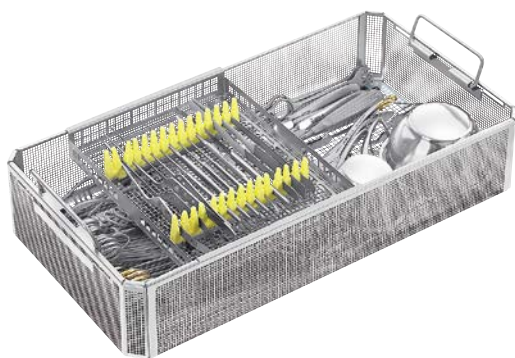

		Außenmaß Innenmaß		Außenmaß Innenmaß		Außenmaß Innenmaß
34	JF110R	196 x 252 x 34 194 x 237 x 33	JF250R	305 x 252 x 34 303 x 237 x 33	JF210R	438 x 252 x 34 436 x 237 x 33

Siebkorbdeckel (JF & JG)



	 Standard 1/2	Außenmaß	 Standard 3/4	Außenmaß	 Standard 1/1 kurz	Außenmaß Innenmaß	 Standard 1/1 lang	Außenmaß Innenmaß
	JF117R	247 x 257 x 18	JF257R	410 x 257 x 18	JF217R	489 x 257 x 18	JF227R	544 x 257 x 18
					JH217R mit 8 mm Perforation	489 x 257 x 18		

AESULAP® Siebkörbe JF/JG sind aus Edelstahl 1.4301 und PEEK (Füße, Verschlussystem Wannendeckel) hergestellt.

Alle Maße: Länge x Breite x **Höhe** (mm)

Siebkörbe

Spezialsiebkörbe



4 mm Perforation	Außenmaß Innenmaß
JF155R (inkl. Deckel)	236 x 72 x 27 230 x 66 x 20



Deckel,
passend für JF156R und JF155R

4 mm Perforation	Außenmaß Innenmaß
JF157R	236 x 72 x 11



Für Kleinteile, zwei Siebe passen in AESCULAP® Mini Sterilcontainer, je 2 passen in JK188 oder JN188

Mini	Außenmaß Innenmaß
JF149R (2 mm Perforation)	135 x 120 x 47 128 x 113 x 38



Siebbodenteil

4 mm Perforation	Außenmaß Innenmaß
JF156R	232 x 68 x 61 227 x 61 x 54



Trennsteg, passend für JF156R

JF158R	



Für Kleinteile oder Mikroinstrumente

4 mm Perforation	Außenmaß Innenmaß
JF150R	235 x 137 x 42 229 x 131 x 35



Für Mikroinstrumente, passend in einen AESCULAP® Mini Sterilcontainer, passen in JK188 oder JN188

Mini	Außenmaß Innenmaß
JF159R (4 mm Perforation)	267 x 125 x 49 261 x 118 x 41

Spezialsiebkörbe



Siebkorb mit Deckel

Dental	Außenmaß Innenmaß	
	JG487R	188 x 84 x 30 181 x 82 x 23



Siebkorb mit Deckel

Dental	Außenmaß Innenmaß	
	JG488R	188 x 125 x 30 181 x 123 x 23



Für Kleinteile

	Außenmaß Innenmaß	
	JF145R	85 x 44 x 25 80 x 39 x 18
2 mm Perforation		
JF146R	85 x 44 x 25 80 x 39 x 18	
4 mm Perforation		



Für Kleinteile

4 mm Perforation	Außenmaß Innenmaß	
	JF140R	80 x 80 x 33 75 x 75 x 26



Für Kleinteile

4 mm Perforation	Außenmaß Innenmaß	
	JF147R	354 x 44 x 35 349 x 39 x 28



Für Kleinteile

4 mm Perforation	Außenmaß Innenmaß	
	JF148R	145 x 44 x 25 140 x 39 x 18

Siebkörbe

Spezialsiebkörbe



Siebkorb ohne Einsätze,
mit Deckelgriff,
passt in Dental Sterilcontainer JN294

Dental	Außenmaß
	Innenmaß
JF264R	273 x 176 x 41 267 x 170 x 34




Siebkorb mit Deckel,
passt in Dental Sterilcontainer JN295

Dental	Außenmaß
	Innenmaß
JG285R	273 x 176 x 60 267 x 170 x 53



Siebkorb ohne Deckel,
passt in Dental Sterilcontainer JN296

Dental	Außenmaß
	Innenmaß
JF282R	269 x 171 x 93 267 x 169 x 91

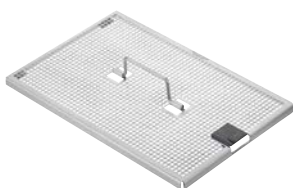

Deckel für Siebkorb JF282R

Dental	Außenmaß
JF289R	273 x 176 x 16



Siebkorb mit drei Instrumentenstegen
(JG392), mit Deckelgriff,
passt in Dental Sterilcontainer JN294

Dental	Außenmaß
	Innenmaß
JG380R	273 x 84 x 41 267 x 78 x 34



Siebkorb mit drei Instrumentenstegen
(JG391), mit Deckelgriff,
passt in Dental Sterilcontainer JN294

Dental	Außenmaß
	Innenmaß
JG381R	273 x 176 x 30 267 x 170 x 23

Spezialsiebkörbe



Siebkorb mit Wundhakenperforation, mit drei Instrumentenstegen (JG391), mit Deckelgriff, passt in Dental Sterilcontainer JN294

Dental	Außenmaß Innenmaß
JG383R	273 x 176 x 30 267 x 170 x 23



Siebkorb mit drei Instrumentenstegen (JG393), mit Deckelgriff, passt in Dental Sterilcontainer JN294

Dental	Außenmaß Innenmaß
JG384R	273 x 176 x 41 267 x 170 x 34



Siebkorb ohne Einsätze, mit Deckelgriff, passt in Dental Sterilcontainer JN294

Dental	Außenmaß Innenmaß
JG386R	273 x 176 x 41 267 x 170 x 34



Siebkorb, enthält die Instrumentenstegen JG400, JG401 für 6 Instrumente

Dental	Außenmaß Innenmaß
JG387R	188 x 84 x 30 181 x 78 x 23



Siebkorb, enthält die Instrumentenstegen JG400, JG401 für 9 Instrumente

Dental	Außenmaß Innenmaß
JG388R	188 x 125 x 30 181 x 119 x 23




Siebkorb, enthält fünf Instrumentenstegen (2 x JG394, 2 x JG400, 1 x JG401), mit Deckelgriff, passt in Dental Sterilcontainer JN294

Dental	Außenmaß Innenmaß
JG389R	273 x 176 x 30 267 x 170 x 23


Siebkörbe

Optiksiebkörbe

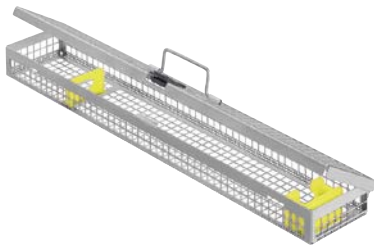


Siebkorb für eine Optik mit einer Schaftlänge bis zu 340 mm

Artikel-Nr.	Außenmaß
JF431R	454 x 84 x 41 448 x 78 x 34

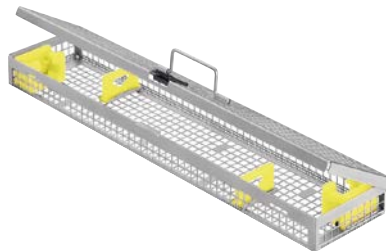


Siebkorb für zwei Optiken mit einer Schaftlänge bis zu 340 mm

Artikel-Nr.	Außenmaß Innenmaß
JF432R	454 x 104 x 41 448 x 98 x 34

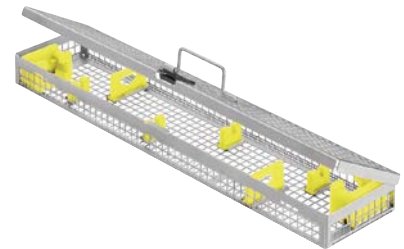

Siebkorb für zwei Optiken mit einer Schaftlänge bis zu 340 mm, mit zusätzlichem Halter

Artikel-Nr.	Außenmaß Innenmaß
JF433R	454 x 104 x 41 448 x 98 x 34

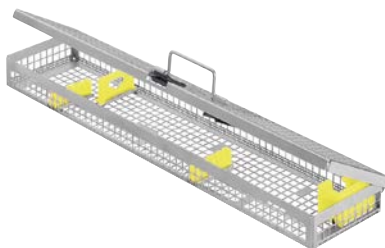

Siebkorb für Mini-Hysteroskop mit Durchmesser < 4 mm


Artikel-Nr.	Außenmaß Innenmaß
JF434R	454 x 104 x 41 448 x 98 x 34



Siebkorb für ein Arthroskop mit Schaftdurchmesser 2,7 mm oder 4 mm und einer Schaftlänge von 140–200 mm


Artikel-Nr.	Außenmaß Innenmaß
JF436R	273 x 84 x 41 267 x 78 x 34

Optiksiebkörbe

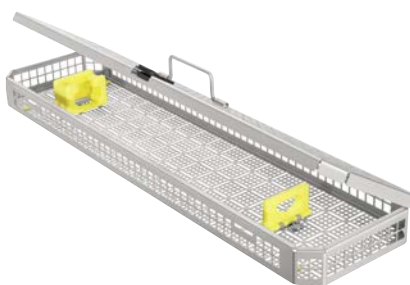

Siebkorb wie JF435R vorkonfiguriert für eine Optik und ein Lichtleitkabel (inkl. 1 x JG367 + 1 x JG368), passt in Optikcontainer, siehe Seite 41 ff.

Artikel-Nr.	Außenmaß Innenmaß
JF428R	500 x 132 x 44 494 x 124 x 30

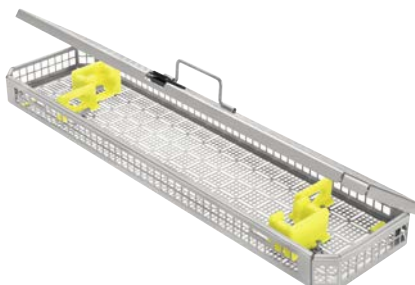

Siebkorb wie JF435R vorkonfiguriert für zwei Optiken und ein Lichtleitkabel (inkl. 2 x JG367 + 2 x JG368), passt in Optikcontainer, siehe Seite 41 ff.


Artikel-Nr.	Außenmaß Innenmaß
JF429R	500 x 132 x 44 494 x 124 x 30



Siebkorb für zwei Laparoskopieoptiken und ein Lichtleitkabel (Optikhalterungen JG367 + JG368 bitte separat bestellen), passt in Optikcontainer, siehe Seite 41 ff.


Artikel-Nr.	Außenmaß Innenmaß
JF435R	500 x 132 x 44 494 x 124 x 30

Lagerungsrack für MIC-Instrumente und Trokare

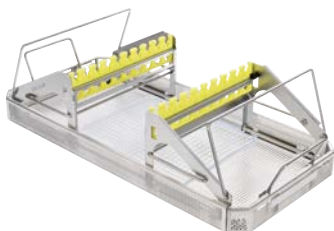

Lagerungsrack-Set für MIC-Instrumente und Trokare, enthält: Lagerungsrack PL963R, Instrumentensiebkorb JF522R und Silikonmatte JF938, passt in JK444 und JK489

	Außenmaß Innenmaß
PL960R	540 x 253 x 166

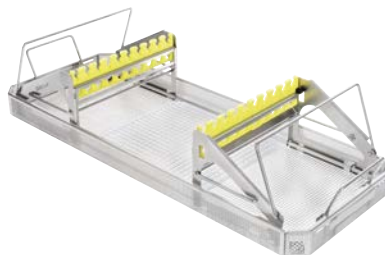

Lagerungsrack-Set für MIC-Instrumente XXL, enthält: Lagerungsrack PL964R, Instrumentensiebkorb JF532R und Silikonmatte JF938, für Instrumente bis zu einer Schaftlänge von 420 mm, passt in JN445 und JK490.

	Außenmaß Innenmaß
PL961R	660 x 253 x 166

Siebkörbe

Lagerungsracks



Lagerungsrack standard


Artikel-Nr.	Außenmaß
PL963R	487 x 250 x 153



Lagerungsrack XXL


Artikel-Nr.	Außenmaß Innenmaß
PL964R	587 x 250 x 153

Lagerungsrahmen

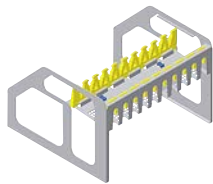

Lagerungsrahmen für Knochenstanzen

Artikel-Nr.	Außenmaß Innenmaß
JF120R	240 x 225 x 151

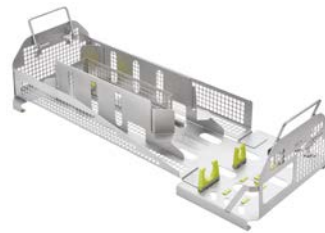

Da Vinci® SP Kamera Lagerung, Verwendung in Kombination mit den XXL Endo Sterilcontainern JN445 und JK490

Artikel-Nr.	Außenmaß Innenmaß
JF449R	660 x 253 x 163




Lagerungsrahmen für fünf SQ.line® KERRISON Knochenstanzen

Artikel-Nr.	Außenmaß Innenmaß
JF125R	209 x 231 x 91



Lagerungsrahmen für eine SQ.line® KERRISON Knochenstanze

Artikel-Nr.	Außenmaß Innenmaß
JF126R	192 x 68 x 83

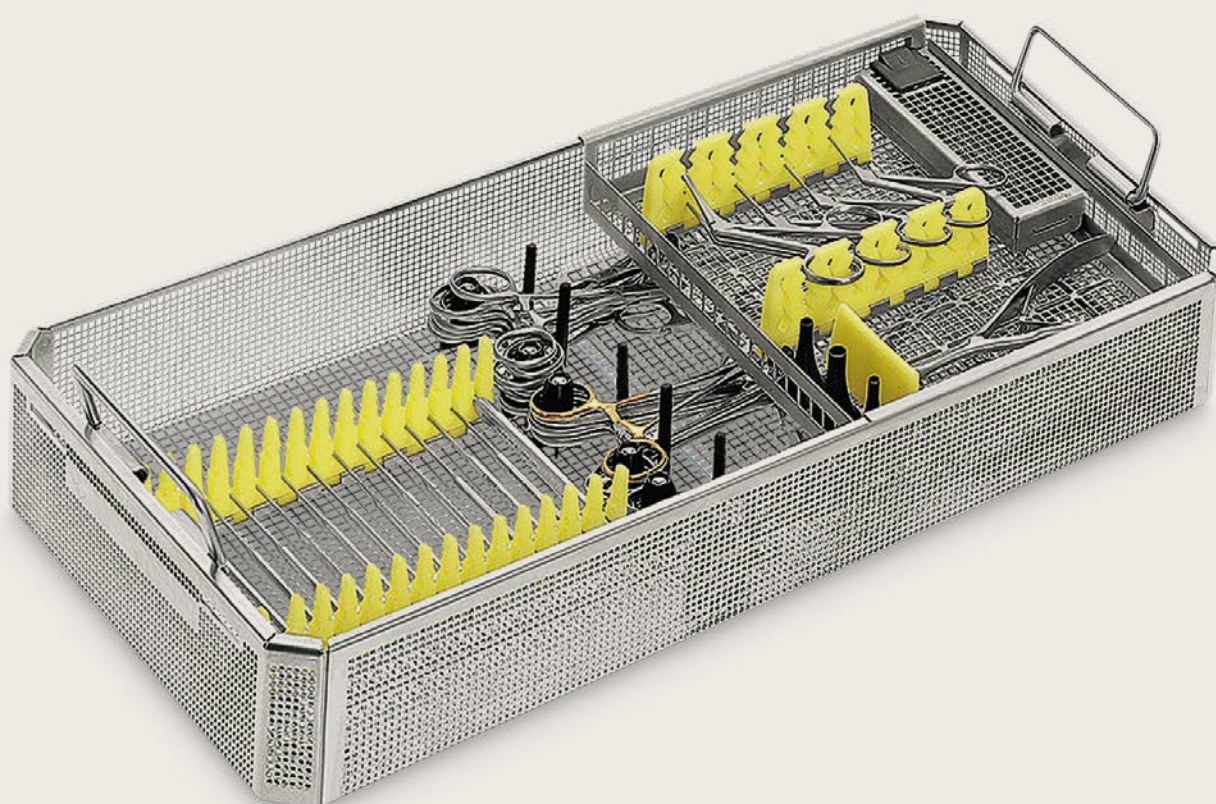

Aesculap InOS® – Instrumenten Organisationssystem

Aesculap InOS® – Instrumenten Organisationssystem



Organisation und Schutz chirurgischer Instrumente

Chirurgische Instrumente stellen wertvolle Güter für jedes Krankenhaus dar und sollen daher auch so effizient und schonend wie möglich aufbereitet werden.

Daher ist der Schutz der Instrumente während der Sterilisation sowie beim Transport in das Sterilgutlager und in den OP von zentraler Bedeutung.



Das AESCULAP® Organisationssystem für Instrumentensiebe erleichtert die sichere Lagerung, insbesondere von empfindlichen Instrumenten und Kleinteilen.

Sieb für transphenoidale
Hypophysektomie

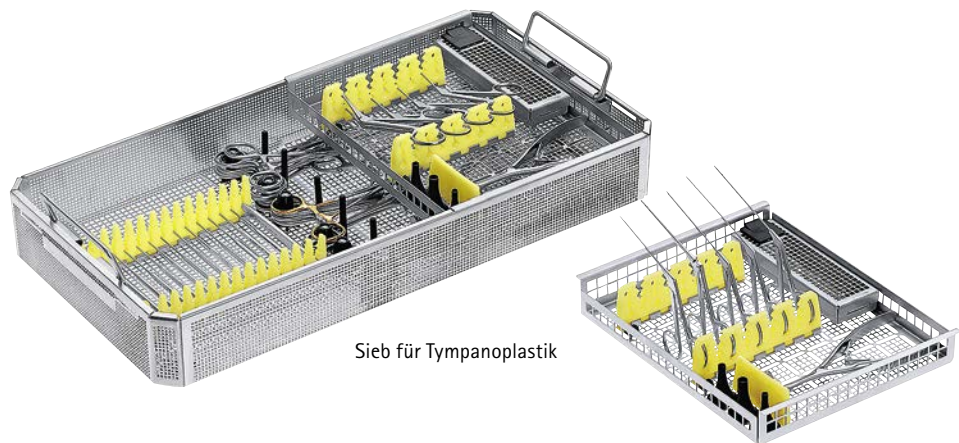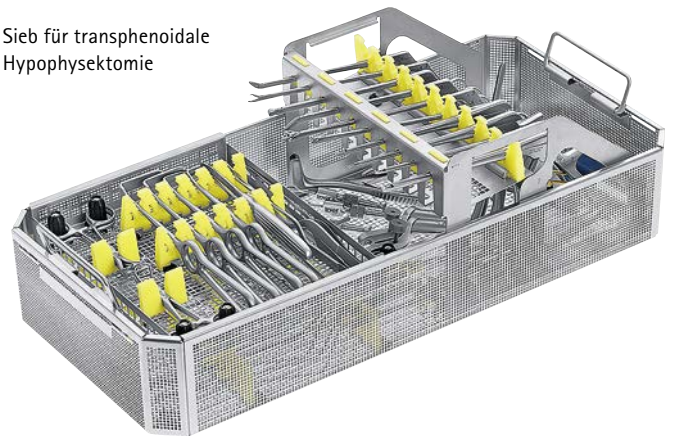


Sieb für Tympanoplastik

Schädelsieb

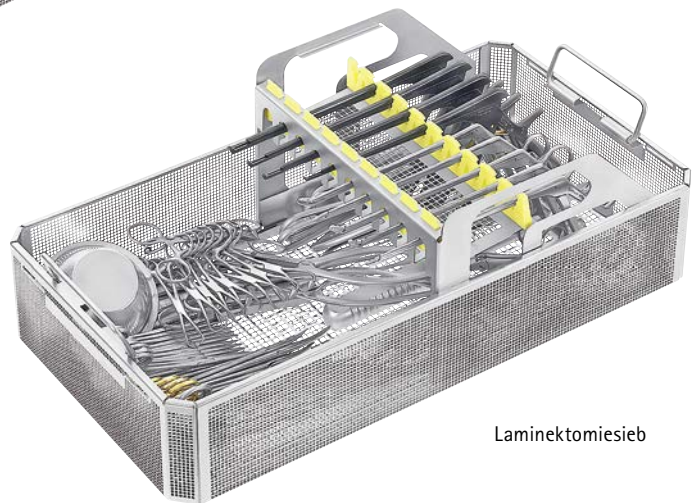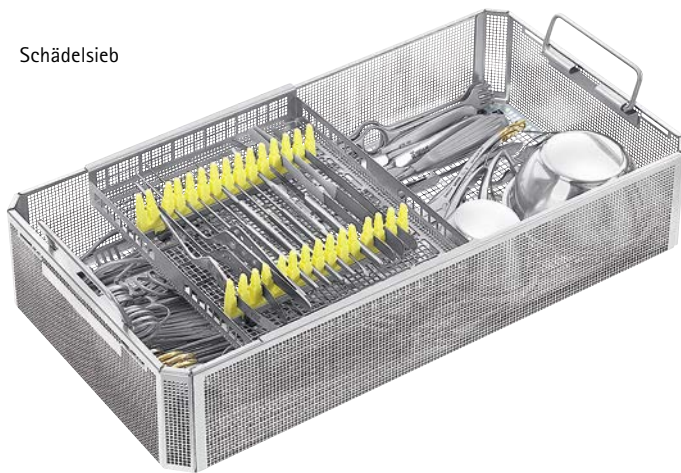





Laminektomiesieb

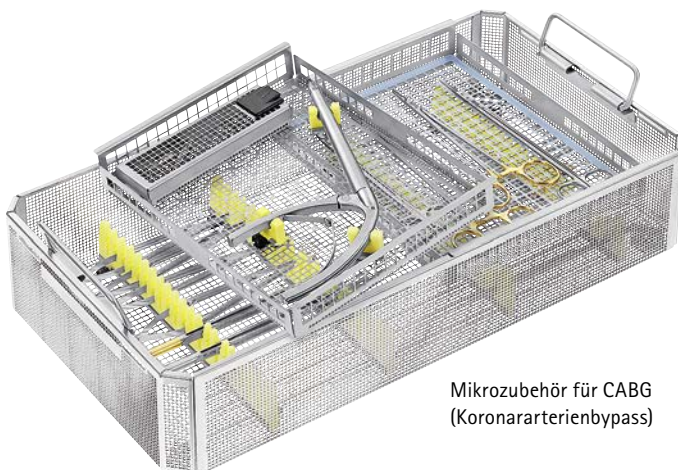

Mikrozubehör für CABG
(Koronararterienbypass)

Aesculap InOS® – Instrumenten Organisationssystem


Instrumentenstege und -halterungen

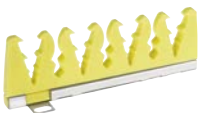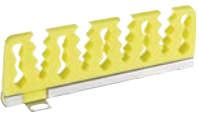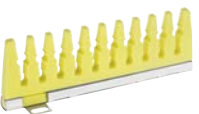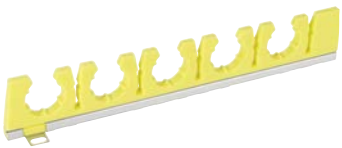Instrumentenstege (Montage A)		Zwischenräume	Außenmaß	Artikel-Nr.
 		7	120 x 40 mm	JG304
		9	160 x 40 mm	JG305
		15	240 x 40 mm	JG306
 		9	120 x 40 mm	JG308
		11	160 x 40 mm	JG309
		17	240 x 40 mm	JG310
 		6	120 x 40 mm	JG312
		8	160 x 40 mm	JG313
		12	240 x 40 mm	JG314
 		10	120 x 40 mm	JG316
		14	160 x 40 mm	JG317
		20	240 x 40 mm	JG318
 		20	120 x 40 mm	JG327
	Für Küretten	10	240 x 41 mm	JG311

Instrumentenstege für bipolare Pinzetten oder weitere abgewinkelte Instrumente	Zwischenräume	Außenmaß	Artikel-Nr.
	29	234 x 41 mm	JG319

Hinweise zu den verschiedenen **Montagetypen** sind ab Seite 77 zu finden.

Instrumentenstege für Mikroinstrumente (Montage A)		Zwischenräume	Außenmaß	Artikel-Nr.
		20	120 x 21 mm	JG320
		7	123 x 18 mm	JG321
		6	123 x 18 mm	JG322
		13	123 x 18 mm	JG323
		7	123 x 45 mm	JG324

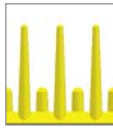
Instrumentenstege für Mikroinstrumente (Montage A)			Zwischenräume	Außenmaß	Artikel-Nr.
		Positionierungssteg	19	160 x 30 mm	JG325
			29	240 x 30 mm	JG326
		Halterung für federbelastete Mikroinstrumente – Griffende	4	120 x 40 mm	JG328
			2	60 x 40 mm	JG333
		Halterung für federbelastete Mikroinstrumente – Arbeitsende	4	120 x 40 mm	JG329
			2	60 x 40 mm	JG334

Aesculap InOS® – Instrumenten Organisationssystem

Halterungen mit Schiene (Montage A)	Durchmesser	Artikel-Nr.
	5 mm	JG340
	7,5 mm	JG341
	8,5 mm	JG342
	10 mm	JG343
	12 mm	JG344

Hinweise zu den verschiedenen **Montagetypen** sind ab Seite 77 zu finden.

Metallklammer mit Silikoneinlage (Montage A)	Durchmesser	Artikel-Nr.
	15 - 20 mm	JG352R
	20 - 30 mm	JG353R
	30 - 45 mm	JG354R

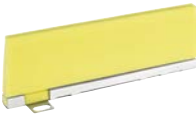Trennsteg (Montage A)	Länge	Artikel-Nr.
	120 x 40 mm	JG358
	160 x 40 mm	JG359
	243 x 40 mm	JG360


Hinweis | Bitte bestellen Sie die Schrauben JG303R separat, wenn nicht anders vermerkt.



Aesculap InOS® – Instrumenten Organisationssystem

Halterungen (Montage A)		Durchmesser	Artikel-Nr.	Durchmesser	Artikel-Nr.
		15 mm	JG330	10 mm	JG335
		25 mm	JG331	7,5 mm	JG336
		30 mm	JG332	5 mm	JG337

Optikhalterungen (Montage A)		Zwischenräume	Artikel-Nr.
		Okularhalter	JG367
		Schafthalter	JG368
		Halter für Winkeloptiken	JG369

Hinweise zu den verschiedenen **Montagetypen** sind ab Seite 77 zu finden.

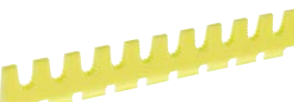
Instrumentensteg für Siebkorbbeinsätze (Montage C)	Zwischenräume	Außenmaß	Artikel-Nr.
 		240 x 30 mm	JG370
 	10	234 x 30 mm	JG371
 	10	227 x 30 mm	JG372

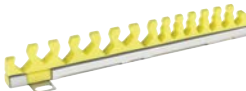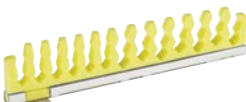Instrumentensteg für Spezialesiebörbe (Montage A)	Zwischenräume	Außenmaß	Artikel-Nr.
	6	76 x 33 mm	JG396
	14	160 x 23 mm	JG397 (inkl. Halte- schrauben)
	13	160 x 34 mm	JG398 (inkl. Halte- schrauben)

Aesculap InOS® – Instrumenten Organisationssystem

Instrumentenstege für Spezialsiebe mit 30 mm Höhe (Montage C)	Zwischenräume	Außenmaß	Artikel-Nr.
	13	159 x 14 mm	JG400
	6	74 x 22 mm	JG394
	10	115 x 22 mm	JG395
	14	158 x 22 mm	JG391

Hinweis | Bitte bestellen Sie die Schrauben JG303R separat, wenn nicht anders vermerkt.


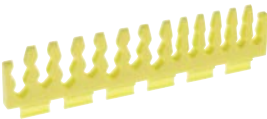
Instrumentenstege für Spezialsiebe mit 41 mm Höhe (Montage C)	Zwischenräume	Außenmaß	Artikel-Nr.
	6	76 x 33 mm	JG392
	13	158 x 33 mm	JG393
		158 x 30 mm	JG390

Überleger		Außenmaß	Artikel-Nr.
		113 x 21 mm	JG378
		113 x 31 mm	JG379
		150 x 15 mm	JG399
		158 x 14 mm	JG401

Zum Niederhalten der
Instrumente, zur Montage an
die Deckelunterseite

Hinweise zu den verschiedenen **Montagetypen** sind ab Seite 77 zu finden.

Aesculap InOS® – Instrumenten Organisationssystem

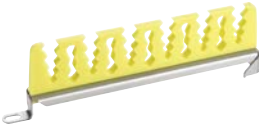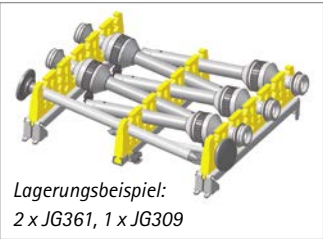
Trokarsteg (Montage A)	Zwischenräume	Außenmaß	Artikel-Nr.
  Lagerungsbeispiel: 2 x JG361, 1 x JG309	11	167 x 53 mm	JG361





Befestigungselemente für Montage A		Artikel-Nr.
	Schraubensatz Montage ausschließlich mit Steckschüssel AF7 Bestelleinheit (PAK): Packung mit 10 Stück	JG303R
	Aesculap InOS® Montage Set inkl. Steckschlüssel AF7	GB459R


Haltestifte für Ringgriffinstrumente	Durchmesser	Artikel-Nr.
	25 mm, Höhe 29 mm	JF346
	6 mm, Höhe 47 mm	JF343*

Hinweise zu den verschiedenen **Montagetypen** sind ab Seite 77 zu finden.

***Hinweis** | Nicht passend für
JJ Siebkörbe (AESCULAP Aicon®)

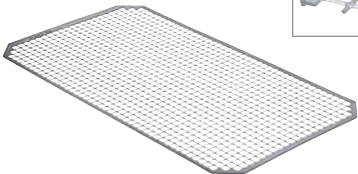Silikonmatten (Netz)		Außenmaß	Artikel-Nr.
 	passt in 1/2 Siebkorb	240 x 250 mm	JF938
	passt in 3/4 Siebkorb	402 x 250 mm	JF940
	passt in 1/1 Siebkorb kurz	480 x 250 mm	JF939
	passt in 1/1 Siebkorb lang	536 x 250 mm	JF941

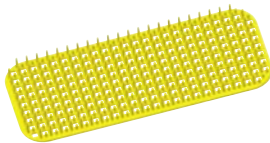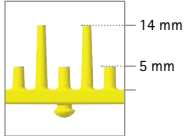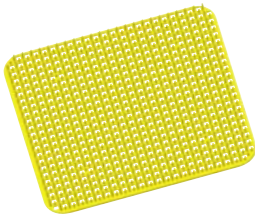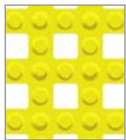Silikonmatten mit Perforation (Noppen)		Außenmaß	Artikel-Nr.
 	passt in JF159R	248 x 102 mm	JF944
	passt in 1/2 Siebkorb	248 x 237 mm	JF945
 	passt in 3/4 Siebkorb	394 x 242 mm	JF947
	passt in 1/1 Siebkorb kurz	472 x 242 mm	JF948
	passt in 1/1 Siebkorb lang	517 x 242 mm	JF949

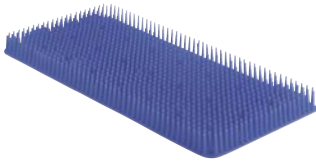Noppenmatte		Außenmaß	Artikel-Nr.
 		470 x 230 x 30 mm	JF932
		276 x 125 x 18 mm	JF934

Aesculap InOS® – Instrumenten Organisationssystem

Lagerungslösung für Hegar Uterusdilatoren





Beispiel:

- 1 x JG362R Mittelsteg
- 2 x JG363R Winkelsteg
- 10 bis 15 Trennsteg JG364R
- 1 x JF112R 1/2 Siebkorb
- 1 x JF117R 1/2 Siebkorbdeckel (nicht abgebildet)


Auch passend:

- 1 x JJ262R AESCULAP Aicon® 1/2 Siebkorb ohne Deckel oder
- 1 x JJ263R AESCULAP Aicon® 1/2 Siebkorb mit Deckel
- JJ267R (nicht abgebildet)

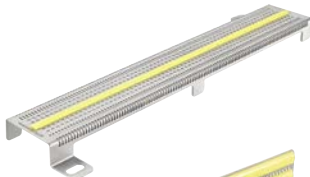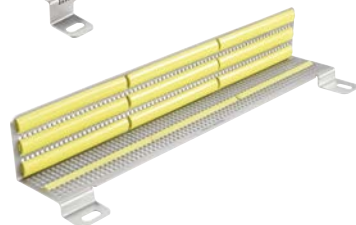Lagerungslösung für Uterusdilatoren	Außenmaß	Artikel-Nr.	
	Mittelsteg mit Befestigungsschrauben	213 x 67 x 16 mm	JG362R
	Winkelsteg mit Befestigungsschrauben	213 x 50 x 42 mm	JG363R
	Trennsteg für Mittelsteg JG362R	40 x 5 x 30 mm	JG364R


Montageanleitung

Montage A zur Befestigung von Instrumentenstegen mit Schrauben

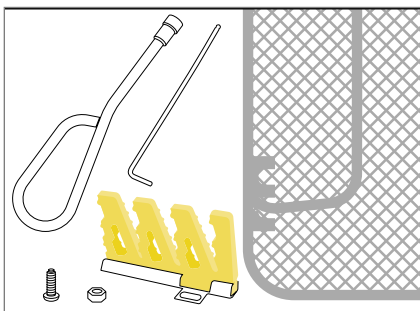


Benötigte Materialien:

- Schraubensatz JJ588R
- Steckschlüssel JJ589R
- Instrumentenhalter, z. B. JG341
- AESCULAP® Siebkörbe (z. B. AESCULAP Aicon® JJ Serie oder JF/JG-Serie)

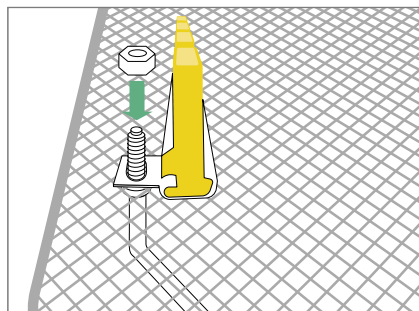


Den Instrumentenhalter in der gewünschten Position im AESCULAP® Siebkorb platzieren und sicherstellen, dass die Befestigungslasche des Instrumentenhalters korrekt auf das Gitter des Korbes passt. Die Schraube von unten durchschieben und von oben mit der Mutter befestigen.

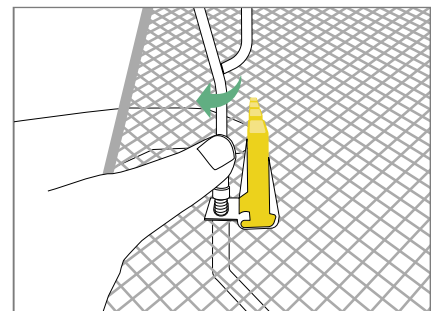


Die Schraube mit dem Finger festhalten, mit der anderen Hand den Steckschlüssel ansetzen und die Mutter festziehen.

Montage C für Silikonstege in Siebkorbeinsätzen

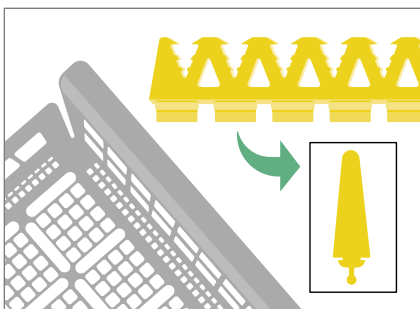


Benötigte Materialien:

- Siebkorbeinsätze JF110R, JF250R oder JF210R
- Instrumentensteg, z. B. JG372

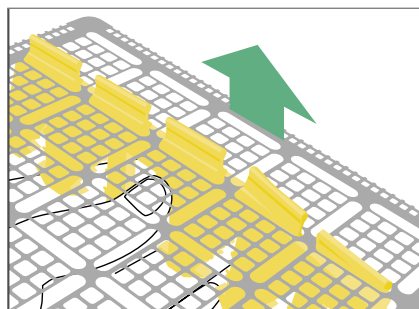

Die Befestigungslaschen durch die Längsschlitze des Siebkorbs schieben.

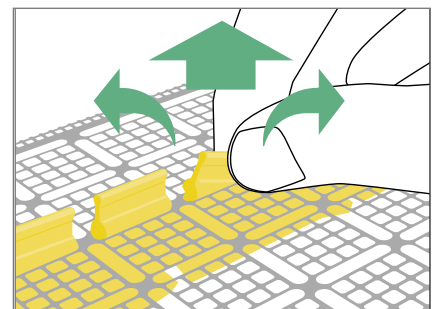

Um die Laschen ganz durch den Schlitz zu ziehen, diese unter Zug nach links und rechts bewegen.

Aesculap InOS® – Instrumenten Organisationssystem

Halteklammern

Nicht für AESCULAP Aicon® Siebkörbe
(JJ-Serie)



Artikel-Nr.	Außenmaß Nutzmaß	
JG691R	24 x 28 x 25 Ø 7-12 mm	Halteklammer



Artikel-Nr.	Außenmaß Nutzmaß	
JG692R	24 x 28 x 29 Ø 12-16 mm	Halteklammer



Artikel-Nr.	Außenmaß Nutzmaß	
JG693R	24 x 28 x 31 Ø 16-26 mm	Halteklammer



Artikel-Nr.	Außenmaß Nutzmaß	
JG694R	24 x 28 x 40 Ø 16-36 mm	Halteklammer



Artikel-Nr.	Außenmaß Nutzmaß	
JG695R	24 x 28 x 44 Ø 36-46 mm	Halteklammer

Befestigungselemente

Nicht für AESCULAP Aicon® Siebkörbe
(JJ-Serie)



Artikel-Nr.	Außenmaß
JG696R	Ø 6,0 x 20
JG702R	Ø 4,9 x 20
JG703R	Ø 4,5 x 22
JG706R	Ø 6,0 x 28
JG708R	Ø 6,0 x 45

Haltestift – z. B. für Motorzubehör

Haltestift – z. B. für Knochenplatten

Haltestift – z. B. für Koriotomköpfe

Haltestift – z. B. für Motorzubehör

Haltestift – z. B. für Motorzubehör


Aesculap InOS® – Instrumenten Organisationssystem

Anschlagrahmen




Artikel-Nr.	Außenmaß
JF921R	110 x 15 x 28

Anschlagrahmen mit
Befestigungsschrauben

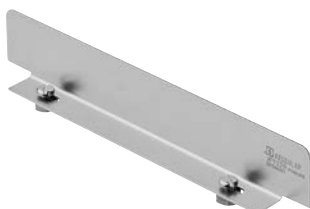

Artikel-Nr.	Außenmaß
JF922R	174 x 15 x 28

Anschlagrahmen mit
Befestigungsschrauben

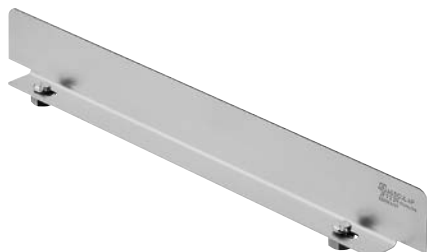

Artikel-Nr.	Außenmaß
JF923R	244 x 15 x 28

Anschlagrahmen mit
Befestigungsschrauben



Artikel-Nr.	Außenmaß
JF378R	164 x 27 x 12

Anschlagrahmen mit
Befestigungsschrauben



Zubehör

Zubehör

Kennzeichnungsschilder



JG785B	rot
JG786B	blau
JG787B	grün
JG788B	gold
JG790B	schwarz
JG792B	oliv-braun
JG793B	violett
JG794B	orange

Kennzeichnungsschilder mit Beschriftung einzeilig oder zweizeilig (Schriftgröße 5 mm), bis zu 13 Zeichen pro Zeile
Abmessungen: 56 x 18 mm
Für alle Standard-Sterilcontainer außer JK299, JK309 und JK339

HINWEIS: Kennzeichnungsschilder aus Aluminium mit pH-neutralem Reinigungsmittel aufbereiten.



JG785U	rot
JG786U	blau
JG787U	grün
JG788U	gold
JG790U	schwarz
JG792U	oliv-braun
JG793U	violett
JG794U	orange

Kennzeichnungsschilder ohne Beschriftung

Spezifikationen wie oben

HINWEIS: Kennzeichnungsschilder aus Aluminium mit pH-neutralem Reinigungsmittel aufbereiten.



JG645B	rot
JG646B	blau
JG647B	grün
JG648B	gold
JG650B	schwarz
JG652B	oliv-braun
JG653B	violett
JG654B	orange

Kennzeichnungsschilder mit Beschriftung einzeilig oder zweizeilig (Schriftgröße 5 mm), bis zu 13 Zeichen pro Zeile
Abmessungen: 50 x 18 mm
Für die Sterilcontainer Mini, Dental und Optik sowie für Entsorgungscontainer und JK299, JK309, JK339

HINWEIS: Kennzeichnungsschilder aus Aluminium mit pH-neutralem Reinigungsmittel aufbereiten.



JG645U	rot
JG646U	blau
JG647U	grün
JG648U	gold
JG650U	schwarz
JG652U	oliv-braun
JG653U	violett
JG654U	orange

Kennzeichnungsschilder ohne Beschriftung

Spezifikationen wie oben

HINWEIS: Kennzeichnungsschilder aus Aluminium mit pH-neutralem Reinigungsmittel aufbereiten.



Kennzeichnungsschilder



Artikel-Nr.	Außenmaß
-------------	----------

JG736	56 x 18
-------	---------

Barcodeschilder, Kunststoff, allgemein, passend für den Etikettenhalter an AESCULAP® Sterilcontainern. Schriftart 128, max. Code-Länge 10 Zeichen, max. Beschriftungslänge 10 Zeichen.

BESONDERER HINWEIS:

Bitte bei der Bestellung die gewünschte Bezeichnung angeben. Barcode und Bezeichnung haben denselben Inhalt. Passt auch für Halterung JG730.



Artikel-Nr.	Außenmaß
-------------	----------

IC-V006	56 x 18
---------	---------

Barcodeschilder, Kunststoff, für instacount®, passen in den Etikettenhalter an AESCULAP® Sterilcontainern. Schriftart 128, max. Code-Länge 10 Zeichen, max. Beschriftungslänge 20 Zeichen.

BESONDERER HINWEIS:

Bitte die gewünschte Bezeichnung sowie die Seriennummer des instacount®-Sets angeben.



Artikel-Nr.	Außenmaß
-------------	----------

JG730U	50 x 35 x 13
--------	--------------

Halterung für Kennzeichnungsschilder, zum Anbringen an Siebkörben, ohne Beschriftung



Artikel-Nr.	Außenmaß
-------------	----------

JG730B	50 x 35 x 13
--------	--------------

Halterung für Kennzeichnungsschilder, zum Anbringen an Siebkörben, mit Beschriftung (einzeilig, max. 14 Zeichen/Zeile, Schrifthöhe max. 4 mm)

Zubehör

Kennzeichnungsschilder



Artikel-Nr.

Außenmaß

JG625R

50 x 20 x 4

Halterung für Kennzeichnungsschilder,
zum Anbringen an Siebkörben



Artikel-Nr.

Außenmaß

JG636R

33 x 20

Kennzeichnungsschild für Siebkörbe,
mit Beschriftung (ein- oder zweizeilig),
bis zu 8 Zeichen pro Zeile, Schriftgröße 5 mm



Artikel-Nr.

Außenmaß

JG616U

58 x 23

JG616B

58 x 23

Kennzeichnungsschild für Siebkörbe
zum Aufbringen von Barcode-Etiketten
Kennzeichnungsschild für Siebkörbe,
mit Beschriftung (ein- oder zweizeilig),
bis zu 14 Zeichen pro Zeile, Schriftgröße 5 mm



Artikel-Nr.

Außenmaß

JG617U

89 x 30

JG617B

89 x 30

Kennzeichnungsschild für Siebkörbe
zum Aufbringen von Barcode-Etiketten
Kennzeichnungsschild für Siebkörbe,
mit Beschriftung (ein- oder zweizeilig),
bis zu 20 Zeichen pro Zeile, Schriftgröße 5 mm



Artikel-Nr.

Außenmaß

JJ586U

96 x 34

JJ586B

96 x 34

Kennzeichnungsschild für Siebkörbe
zum Aufbringen von Barcode-Etiketten
Kennzeichnungsschild für Siebkörbe,
mit Beschriftung (ein-, zwei- oder dreizeilig),
bis zu 13 Zeichen pro Zeile, Schriftgröße 5 mm



Artikel-Nr.

Außenmaß

JJ587U

105 x 54

JJ587B

105 x 54

Kennzeichnungsschild für Siebkörbe
zum Aufbringen von Barcode-Etiketten
Kennzeichnungsschild für Siebkörbe,
mit Beschriftung (ein-, zwei- oder dreizeilig),
bis zu 13 Zeichen pro Zeile, Schriftgröße 5 mm

Entsorgungsmarken



Artikel-Nr.	Außenmaß
JG673B	40 x 35 x 9
JG673U	40 x 35 x 9

Entsorgungsmarke mit Beschriftung
(ein- oder zweizeilig), bis zu 14 Zeichen pro Zeile

Entsorgungsmarke ohne Beschriftung
Bestelleinheit: ST = Stück



Artikel-Nr.	Außenmaß
JG675B	40 x 35 x 9
JG675U	40 x 35 x 9

Entsorgungsmarke mit Beschriftung
einzeilig bis zu 3 Stellen (nur Zahlen)

Entsorgungsmarke ohne Beschriftung
Bestelleinheit: PR = Paar



Artikel-Nr.	Außenmaß
JG690R	393 x 85 x 155

Ablagegeständer
für Entsorgungsmarken

Fixierklammer



Artikel-Nr.	Außenmaß
JF484R	65 x 20 x 20

Fixierklammer
zum Aneinanderklammern der auf dem
Bereitstellungstisch nebeneinander stehenden
Siebe und Sterilcontainer



Artikel-Nr.	Außenmaß
JF509R	50 x 20 x 12

Fixierklammer
für Einschlagtücher

Zubehör

Filterzubehör



Artikel-Nr.

JK100

Universal-Filterhalterung für Dauerfilter und Papierfilter, passend für alle Deckel- und Bodenkomponenten der Standard-Sterilcontainer



Artikel-Nr.

JG731R

Barcode-Kennzeichnungsring für Filterhalterung zur Erfassung der Zyklenzahl des Dauerfilters JK090, Beschriftung nach Angabe mit bis zu 6 Stellen mit Barcode BC128A



Artikel-Nr.

JK098

Außenmaß

245 x 100 x 6

Universal-Filterhalterung für Dauerfilter und Papierfilter, passend für alle Deckel- und Bodenkomponenten der Sterilcontainer Mini, Dental und Optik



Artikel-Nr.

JK096

Außenmaß

197 x 197 x 40

Filterspender für runde Filter



Artikel-Nr.

JP050

Filtereinsatz für PRIMELINE® und PRIMELINE® PRO Deckel, validiert für 5.000 Sterilisationszyklen



Artikel-Nr.

JP055

Montagegriff für Filtereinsatz, PRIMELINE® und PRIMELINE® PRO Deckel



Verbrauchsmaterial

Verbrauchsmaterial

Dauerfilter



Standard XXL	Außenmaß
JK090	Ø 190

AESCULAP® Dauerfilter rund
Verwendungsdauer 1.000 Reinigungs- und Sterilisationszyklen

Bestelleinheit (PAK): Packung à 10 Stück



Standard	Außenmaß
JK089	225 x 225

AESCULAP® Dauerfilter quadratisch
passend für Standard-Sterilcontainer
der Vorgängermodelle, Verwendungsdauer
1.000 Reinigungs- und Sterilisationszyklen

Bestelleinheit (PAK): Packung à 10 Stück



Mini Dental Optik	Außenmaß
JK091	95 x 215

AESCULAP® Dauerfilter
für Sterilcontainer Mini, Dental und Optik
mit Filterhalterung JK098, Verwendungsdauer
1.000 Reinigungs- und Sterilisationszyklen

Bestelleinheit (PAK): Packung à 2 Stück



Dental	Außenmaß
JK092	171 x 231

AESCULAP® Dauerfilter
für Dental Sterilcontainer ohne Filter-
halterung JK098, Verwendungsdauer
1.000 Reinigungs- und Sterilisationszyklen

Bestelleinheit (PAK): Packung à 2 Stück

Einmal-Papierfilter



Standard	Außenmaß
XXL	
JK095	Ø 190

AESCULAP® Papierfilter
mit Prozessindikator für Dampfsterilisation*

Bestelleinheit (PAK): Packung à 100 Stück



Mini	Außenmaß
Dental	
Optik	
JF166	118 x 235

AESCULAP® Papierfilter für Sterilcontainer Mini,
Dental und Optik mit Prozessindikator für
Dampfsterilisation*, zur Verwendung mit Filter-
halterung JK098

Bestelleinheit (PAK): Packung à 100 Stück



Dental	Außenmaß
JF066	171 x 232

AESCULAP® Papierfilter für Dental Sterilcontainer
mit Prozessindikator für Dampfsterilisation*,
zur Verwendung ohne Filterhalterung JK098

Bestelleinheit (PAK): Packung à 100 Stück



Standard	Außenmaß
JF481	230 x 230

AESCULAP® Papierfilter quadratisch für
Standard-Sterilcontainer der Vorgängermodelle,
ohne Prozessindikator

Bestelleinheit (PAK): Packung à 100 Stück



Optik	Außenmaß
JF167	235 x 118

Einwegfilter zur Wasserstoffperoxid-Sterilisation
im Sterrad® 100S, Sterrad® 200, Sterrad® NX, Sterrad®
100NX, STERIS V-PRO® 1 und STERIS V-PRO® 1 Plus


Bestelleinheit (PAK): Packung à 100 Stück

* gemäß EN ISO 11140-1 Typ 1

Alle Maße: Länge x Breite x Höhe (mm)

Verbrauchsmaterial

Indikatoretiketten

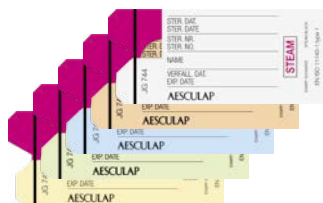

Standard	Farbe	Außenmaß
JG744	weiß	80 x 35
JG745	rot	80 x 35
JG746	blau	80 x 35
JG747	grün	80 x 35
JG748	gelb	80 x 35

Indikatorplombe mit Kleberücken und Prozessindikator zur Dampfsterilisation*, zur Sicherung des Sterilcontainers gegen unbefugtes Öffnen, passend für Standard-Sterilcontainer

Bestelleinheit (PAK): Packung à 1.000 Stück



Standard	Außenmaß
JG743	80 x 35

Plombe ohne Prozessindikator und ohne Kleberücken, zur Sicherung des Sterilcontainers gegen unbefugtes Öffnen, passend für Standard-Sterilcontainer


Bestelleinheit (PAK): Packung à 1.000 Stück



Mini Dental	Außenmaß
JG687	60 x 18

Indikatoretikett mit Kleberücken und Prozessindikator für Dampfsterilisation* für Sterilcontainer Mini und Dental, Wanne JK339.


Bestelleinheit (PAK): Packung à 100 Stück

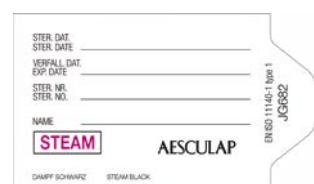

	Außenmaß
JG682	67 x 40

Indikatoretikett mit Prozessindikator für Dampfsterilisation* für Standard-Sterilcontainer der Vorgängermodelle

Bestelleinheit (PAK): Packung à 1.000 Stück

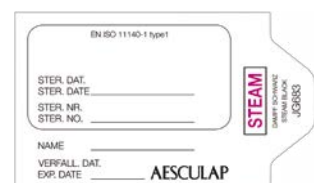

	Außenmaß
JG683	67 x 40

Indikatoretikett mit Kleberücken und Prozessindikator für Dampfsterilisation für Standard-Sterilcontainer der Vorgängermodelle

Bestelleinheit (PAK): Packung à 1.000 Stück



Optik	Außenmaß
JG750	67 x 35
JG751	67 x 35


Kennzeichnungsetikett mit Kleberücken und Prozessindikator zur Sterilisation mit verdampftem Wasserstoffperoxid*

Bestelleinheit (PAK): Packung à 100 Stück

Kennzeichnungsetikett mit Kleberücken und Prozessindikator zur Dampfsterilisation* und zur Sterilisation mit Ethylenoxid*

Bestelleinheit (PAK): Packung à 100 Stück

Plomben

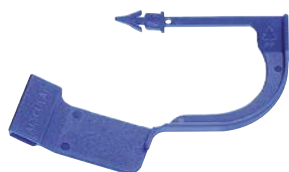

Artikel-Nr.

JG738

JG739

Plombe** – zur Sicherung des Sterilcontainers gegen unbefugtes Öffnen

Bestelleinheit (PAK): Packung à 100 Stück

Bestelleinheit (PAK): Packung à 1.000 Stück




Artikel-Nr.

JG740

Reparaturmarke – zur Kennzeichnung von reparaturbedürftigen Instrumenten oder Sterilcontainern mit Reparaturware

Bestelleinheit (PAK): Packung à 1.000 Stück

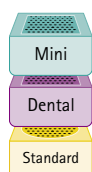

Artikel-Nr.

JG752

JG753

Plombe** – zur Sicherung des Sterilcontainers gegen unbefugtes Öffnen, mit Prozessindikator für die Dampfsterilisation*

Bestelleinheit (PAK): Packung à 100 Stück

Bestelleinheit (PAK): Packung à 1.000 Stück

* gemäß EN ISO 11140-1 Typ 1

** Bildliche Darstellung derzeit nicht aktuell abgebildet. Die Spitze der Plombe wurde verändert.

Verbrauchsmaterial

Pflegemittel



Artikel-Nr.

JG598

STERILIT® I

AESULAP® Tropföler zum Ölen der Scharniere des
Containerverschlusses, Instrumentengelenke, etc.
Zur Verwendung vor der Sterilisation.

Inhalt: 50 ml



Artikel-Nr.

JG600

STERILIT® I – inklusive 6 Sprühdüsen

AESULAP® Ölspray zum Ölen der Scharniere des
Containerverschlusses, Instrumentengelenke, etc.
Zur Verwendung vor der Sterilisation.

Inhalt: 300 ml

Bestelleinheit: Packung à 6 Stück



Artikel-Nr.

JG601

Eloxalreiniger

zur Reinigung und Pflege der Aluminiumoberflächen
von Sterilcontainern

Inhalt: 300 g

Etiketten, Barcode-Etiketten



Artikel-Nr.

IC-V004

Etikettenrolle, doppelseitig selbstklebend, nach außen gewickelt, ohne Indikator, für Schneidwerkzeug

Länge 70 m (ca. 2.000 Etiketten bei Höhe von 35 mm), Breite 75 mm, Kerndurchmesser 3 Zoll, Bestelleinheit (ST)



Artikel-Nr.

IC-V001

Etikettenrolle, doppelseitig selbstklebend, nach außen gewickelt, mit Prozessindikator für die Dampfsterilisation nach EN ISO 11140-1 Typ 1, für Schneidwerkzeug

Länge 70 m (ca. 2.000 Etiketten bei Höhe von 35 mm), Breite 77 mm, Bestelleinheit (ST)



Artikel-Nr.

IC-V002

Einzeletiketten, doppelseitig selbstklebend, nach außen gewickelt, ohne Indikator, für kontaktfreien Spender

Etikettenhöhe 35 mm, Etikettenbreite 75 mm, Kerndurchmesser 3 Zoll, Bestelleinheit (ST)



Artikel-Nr.

IC-V005

Einzeletiketten, doppelseitig selbstklebend, nach außen gewickelt, für kontaktfreien Spender

Etikettenhöhe 35 mm, Etikettenbreite 75 mm, Kerndurchmesser 3 Zoll, Bestelleinheit (ST)



Artikel-Nr.

IC-V003

Thermotransferband Wachs, Farbseite innen

Länge 360 m, Breite 76,5 mm, Kerndurchmesser 1 Zoll, Bestelleinheit (ST)



Artikel-Nr.

IC-V008

Thermotransferband Wachs, Farbseite außen

Länge 300 m, Breite 80 mm, Kerndurchmesser 1 Zoll, Bestelleinheit (ST)

Verbrauchsmaterial

Etiketten, Druckerzubehör



Artikel-Nr.

IC-V012

Einzeletiketten, doppelseitig selbstklebend, nach außen gewickelt, mit Prozessindikator, gemäß EN ISO 11140-1 Typ 1, für Schneidwerkzeug

1.500 Etiketten perforiert, Etikettenhöhe 35 mm, Breite 78 mm, Kerndurchmesser 3 Zoll



Artikel-Nr.

IC-V013

Einzeletiketten, einseitig selbstklebend, nach außen gewickelt, mit Prozessindikator zur Dampfsterilisation gemäß EN ISO 11140-1 Typ 1, für Schneidwerkzeug

Länge 70 m (ca. 2.000 Etiketten bei Höhe von 35 mm), Breite 77 mm, Kerndurchmesser 3 Zoll



Artikel-Nr.

IC-V017

Etikettenanhänger, dreischichtige Spezialfolie, weiß

Außenmaß 75 x 265 mm
Bestelleinheit (PAK): Packung à 500 Stück

Index

Index

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
GB459R	74	JF214R	54	JF940	75
IC-V001	93	JF217R	55	JF941	75
IC-V002	93	JF221R	54	JF944	75
IC-V003	93	JF222R	54	JF945	75
IC-V004	93	JF223R	54	JF947	75
IC-V005	93	JF224R	54	JF948	75
IC-V006	83	JF227R	55	JF949	75
IC-V008	93	JF232R	45	JG111R	54
IC-V012	94	JF236R	45	JG112R	54
IC-V013	94	JF250R	55	JG113R	54
IC-V017	94	JF251R	54	JG114R	54
JF066	89	JF252R	54	JG211R	54
JF110R	55	JF253R	54	JG212R	54
JF111R	54	JF254R	54	JG213R	54
JF112R	54	JF257R	55	JG214R	54
JF113R	54	JF264R	58	JG221R	54
JF114R	54	JF282R	58	JG222R	54
JF117R	55	JF289R	58	JG223R	54
JF120R	62	JF343	74	JG224R	54
JF125R	62	JF346	74	JG251R	54
JF126R	62	JF378R	80	JG252R	54
JF140R	57	JF428R	61	JG253R	54
JF145R	57	JF429R	61	JG254R	54
JF146R	57	JF431R	60	JG285R	58
JF147R	57	JF432R	60	JG303R	74
JF148R	57	JF433R	60	JG304	66
JF149R	56	JF434R	60	JG305	66
JF150R	56	JF435R	42, 61	JG306	66
JF155R	56	JF436R	60	JG308	66
JF156R	56	JF449R	45, 62	JG309	66
JF157R	56	JF481	89	JG310	66
JF158R	56	JF484R	85	JG311	66
JF159R	56	JF509R	85	JG312	66
JF166	42, 89	JF921R	80	JG313	66
JF167	43, 89	JF922R	80	JG314	66
JF210R	55	JF923R	80	JG316	66
JF211R	54	JF932	75	JG317	66
JF212R	54	JF933	45	JG318	66
JF213R	54	JF934	75	JG319	66
		JF938	75	JG320	67
		JF939	75		

Artikel-Nr.	Seite
JG321	67
JG322	67
JG323	67
JG324	67
JG325	67
JG326	67
JG327	66
JG328	67
JG329	67
JG330	70
JG331	70
JG332	70
JG333	67
JG334	67
JG335	70
JG336	70
JG337	70
JG340	68
JG341	68
JG342	68
JG343	68
JG344	68
JG352R	69
JG353R	69
JG354R	69
JG358	69
JG359	69
JG360	69
JG361	74
JG362R	76
JG363R	76
JG364R	76
JG367	70
JG368	70
JG369	70
JG370	71
JG371	71
JG372	71
JG378	73
JG379	73
JG380R	58

Artikel-Nr.	Seite
JG381R	58
JG383R	59
JG384R	59
JG386R	59
JG387R	59
JG388R	59
JG389R	59
JG390	73
JG391	72
JG392	73
JG393	73
JG394	72
JG395	72
JG396	71
JG397	71
JG398	71
JG399	73
JG400	72
JG401	73
JG487R	57
JG488R	57
JG598	92
JG600	92
JG601	92
JG616B	84
JG616U	84
JG617B	84
JG617U	84
JG625R	84
JG636R	84
JG645B	82
JG645U	82
JG646B	82
JG646U	82
JG647B	82
JG647U	82
JG648B	82
JG648U	82
JG650B	82
JG650U	82
JG652B	82

Artikel-Nr.	Seite
JG652U	82
JG653B	82
JG653U	82
JG654B	82
JG654U	82
JG673B	85
JG673U	85
JG675B	85
JG675U	85
JG682	90
JG683	90
JG687	90
JG690R	85
JG691R	78
JG692R	78
JG693R	78
JG694R	78
JG695R	78
JG696R	79
JG702R	79
JG703R	79
JG706R	79
JG708R	79
JG730B	83
JG730U	83
JG731R	86
JG736	83
JG738	91
JG739	91
JG740	91
JG743	90
JG744	90
JG745	90
JG746	90
JG747	90
JG748	90
JG750	43, 90
JG751	42, 90
JG752	91
JG753	91
JG785B	82

Index

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
JG785U	82	JK174	39	JK478A	32
JG786B	82	JK187	39	JK479A	32, 33
JG786U	82	JK188	39	JK485	32, 33
JG787B	82	JK262R	46	JK486	32
JG787U	82	JK267R	46	JK487	32
JG788B	82	JK268R	46	JK488	32
JG788U	82	JK286	40	JK489	32, 33
JG790B	82	JK288	40	JK490	44
JG790U	82	JK289	40	JK740	28 ff
JG792B	82	JK290	40	JK741	28 ff
JG792U	82	JK339	30 ff	JK742	28 ff
JG793B	82	JK340	30 ff	JK744	28 ff
JG793U	82	JK341	30 ff	JK775A	34, 35
JG794B	82	JK342	30 ff	JK776A	34
JG794U	82	JK344	30 ff	JK777A	34
		JK346	30 ff	JK778A	34
JH217R	55	JK375A	36, 37	JK779A	34, 35
		JK376A	36	JK785	34, 35
JJ586B	84	JK377A	36	JK786	34
JJ586U	84	JK378A	36	JK787	34
JJ587B	84	JK379A	36, 37	JK788	34
JJ587U	84	JK385	36, 37	JK789	34, 35
		JK386	36		
JK020	42	JK387	36	JM020	43
JK060R	46	JK388	36	JM021	43
JK062R	46	JK389	36, 37	JM174	39
JK067R	46	JK395	36	JM188	39
JK068R	46	JK396	36		
JK089	88	JK397	36	JN021	42
JK090	88	JK398	36	JN086	40
JK091	42, 88	JK399	36, 37	JN088	40
JK092	88	JK440	26 ff	JN089	40
JK095	89	JK441	26 ff	JN090	40
JK096	86	JK442	26 ff	JN091	40
JK098	43, 86	JK443	44	JN092	40
JK100	86	JK444	26 ff	JN094	40
JK170	39	JK446	26 ff	JN095	40
JK171	39	JK475A	32, 33	JN096	40
JK172	39	JK476A	32	JN187	39
JK173	39	JK477A	32	JN188	39

Artikel-Nr.	Seite
JN292	40
JN294	40
JN295	40
JN296	40
JN340	36, 37
JN341	36, 37
JN342	36, 37
JN344	36, 37
JN346	36, 37
JN440	32, 33
JN441	32, 33
JN442	32, 33
JN443	44
JN444	32, 33
JN445	44
JN446	32, 33
JN740	34, 35
JN741	34, 35
JN742	34, 35
JN744	34, 35
JP050	86
JP055	86
JP101	26, 27
JP102	26
JP103	26
JP104	26
JP105	26, 27
JP111	28, 29
JP112	28
JP113	28
JP114	28
JP115	28, 29
JP121	30, 31
JP122	30
JP123	30
JP124	30
JP125	30, 31
JP131	30, 31
JP132	30

Artikel-Nr.	Seite
JP133	30
JP134	30
JP135	30, 31
PL960R	61
PL961R	45, 61
PL963R	62
PL964R	62

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel.: (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Tuttlingen | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ und die Produktmarken „Aesculap InOS“, „instacount“, „PRIMELine“, „SQ.line“ und „STERILIT“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG oder ihrer Tochtergesellschaften. Die Produktmarke „Sterrad“ ist eine eingetragene Marke von ASP. Die Produktmarke „Da Vinci“ ist eine eingetragene Marke von Intuitive Surgical. Die Produktmarken „AMSCO“ und „V-PRO“ sind eingetragene Marken von STERIS. Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Nr. 4008230 Stand: 06/2025