

PRODUKTKATALOG

BANDAGEN UND ORTHESEN

2026





VON MENSCHEN FÜR MENSCHEN

Für mehr Lebensqualität

Die Bauerfeind AG ist einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel. Mit unseren Produkten bringen wir Menschen in Bewegung und leisten dadurch einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit.

MEDIZINISCHES WISSEN UND FACHLICHE KOMPETENZ

Über Jahrzehnte erworbene Kompetenz in Technologie und Fertigung verbinden wir mit Innovationskraft, die Tradition eines mittelständischen Familienunternehmens mit globalem Denken. Unsere Spezialisten arbeiten mit Ärzten, Wissenschaftlern und Entwicklern zusammen. Das Ergebnis sind patentierte sowie preisgekrönte Produkte und Dienstleistungen.

Bandagen und Orthesen von Bauerfeind stehen für höchste Qualität.


WIRKSAME VIELFALT

Bauerfeind hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit modernen orthopädischen Bandagen und Orthesen dazu beizutragen, Menschen ein aktives und beschwerdefreies Leben bis ins hohe Alter zu ermöglichen. Die Produkte zeichnen sich durch bestätigte medizinische Wirksamkeit und neueste Materialien aus.

Die Bandagen und Orthesen unterstützen Heilungsprozesse nach Verletzungen, bei degenerativen Veränderungen sowie nach Operationen und sorgen für neue Mobilität.

KOMPROMISSLOSE QUALITÄT

Bauerfeind-Produkte erfüllen nicht einfach Standards – sie genügen höchsten Ansprüchen an Qualität, Wirksamkeit und Tragekomfort. Das bestätigen regelmäßige Prüfverfahren, deren Siegel und Kennzeichen unsere Produkte nach erfolgreicher Testung tragen dürfen. Alle Bandagen und Orthesen von Bauerfeind entsprechen den Anforderungen der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745. Alle medizinischen Bandagen und Orthesen sind CE-gekennzeichnet und erfüllen damit die aktuell gültigen rechtlichen Vorgaben.

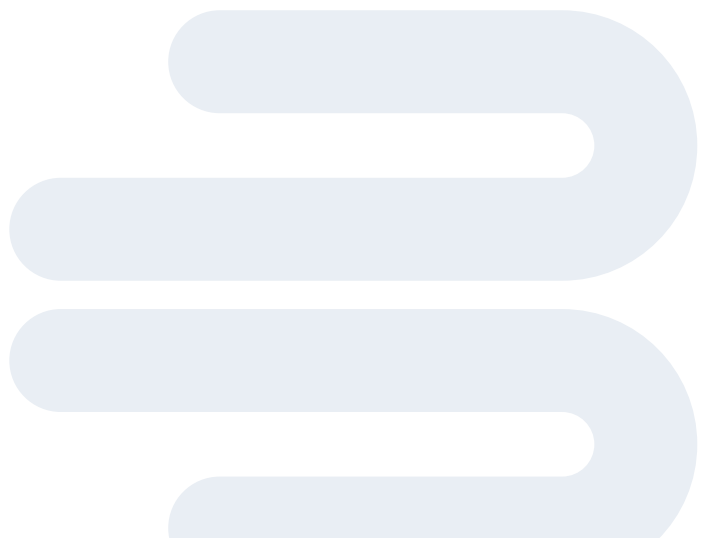



WEITERE BAUERFEIND SORTIMENTSBEREICHE

Für jede Zielgruppe ein passendes Produkt



VenoTrain-KOMPRESSIONSSTRÜMPFE

zeichnen sich durch medizinisch bestätigte Wirksamkeit und einzigartige Materialeigenschaften aus. Sie verbessern die Venentätigkeit und wirken venös bedingten Beinbeschwerden entgegen. Sowohl bei leichten bis mittleren als auch bei fortgeschrittenen Venenerkrankungen sowie im Beruf und auf Reisen bietet das VenoTrain-Sortiment den jeweils passenden Strumpf an. Durch eine breite Auswahl an Farben und Mustern lassen sie sich wunderbar modisch kombinieren.



KOMPRESSIONSSTRÜMPFE FÜR DIE ÖDEMTERAPIE

Jeder Tag wird liebenswerter, wenn man sich wohlfühlt. Dafür wurden die flachgestrickten, maßgeschneiderten VenoTrain® curaflow Kompressionsstrümpfe entwickelt. Die vielseitige und farbenfrohe Versorgung passt sich den individuellen Formen der Beine, Arme, Hände oder des Brustkorbs (Thorax) von Lymph- und Lipödempatienten optimal an. VenoTrain® curaflow entlastet spürbar, um unbeschwert, selbstbewusst und attraktiv durch den Alltag zu gehen.



EINLAGENROHLINGE

Die Füße sind das Fundament des Körpers. Sie unterstützen den Fuß in seiner natürlichen Funktionsweise und können so die Biomechanik des Körpers positiv beeinflussen. Da nicht jeder Fuß die gleiche Art der Unterstützung braucht, hält Bauerfeind über 300 verschiedene Modelle bereit.



HILFSMITTEL- UND THERAPIE-APP

Das ganzheitliche Konzept
von Bauerfeind

DIE BAUERFEIND- HILFSMITTEL-APP

Der Produktfinder für Ärzte
und Fachhändler

Der intuitiv bedienbare, digitale Produktfinder vereinfacht Ärzten und Fachhändlern die Auswahl des geeigneten medizinischen Hilfsmittels enorm: Erhalten Sie alle relevanten Informationen zum Bauerfeind-Produktportfolio schnell und unkompliziert. Zudem können Sie sich eine individuelle Merkliste erstellen und Produkte mit Ihren Patienten und Kunden aus der App heraus teilen.



Kostenlos verfügbar für iOS und Android.

Mehr Informationen finden Sie unter:

bauerfeind.de/himi-app

TRAINING MIT DER BAUERFEIND-THERAPIE-APP


Beweglichkeit kommt von Bewegung

Nur mit konsequenter Bewegung bleibt der Körper mobil und kann optimal regenerieren. In Abstimmung mit dem behandelnden Arzt unterstützt die Bauerfeind-Therapie-App Patienten dabei, mit Produkten von Bauerfeind zu trainieren. Sie motiviert die Anwender gezielt, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Für mehr körperliche Aktivität in der Schwangerschaft wurden Übungen zusammengestellt, die speziell auf die Bedürfnisse von Schwangeren abgestimmt sind.



Kostenlos verfügbar für iOS und Android.
Mehr Informationen finden Sie unter:
bauerfeind.de/app

Infoflyer für Ihre Kunden
können Sie bestellen unter:
1902060031001 Flyer Therapie-App

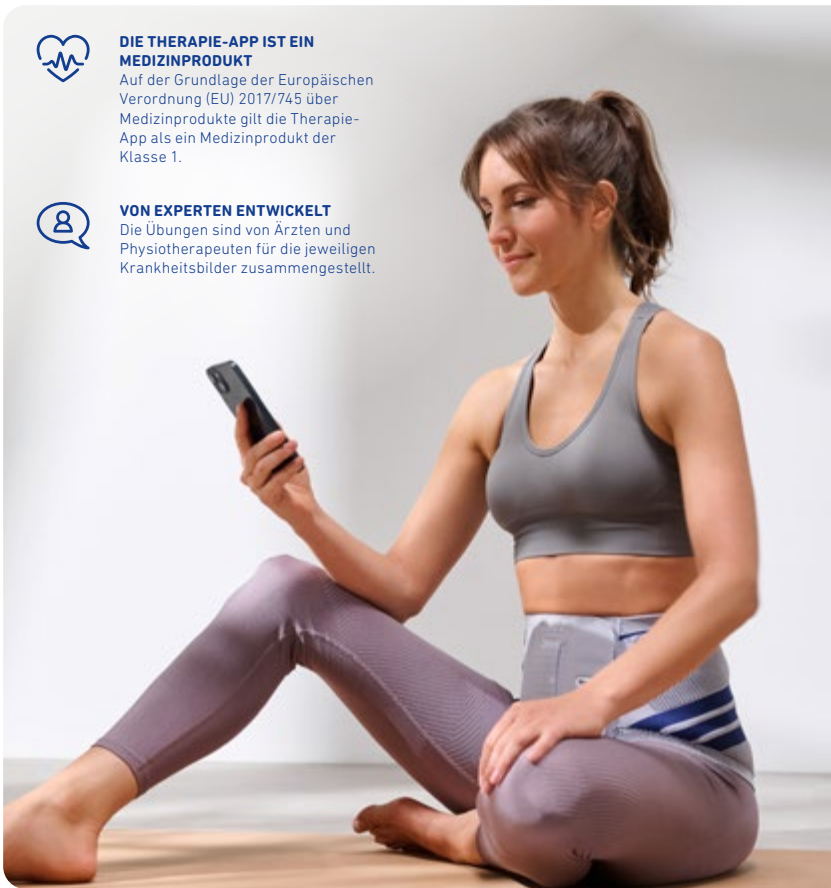


DIE THERAPIE-APP IST EIN MEDIZINPRODUKT
Auf der Grundlage der Europäischen Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte gilt die Therapie-App als ein Medizinprodukt der Klasse 1.



VON EXPERTEN ENTWICKELT
Die Übungen sind von Ärzten und Physiotherapeuten für die jeweiligen Krankheitsbilder zusammengestellt.

WAS KANN DIE THERAPIE-APP?

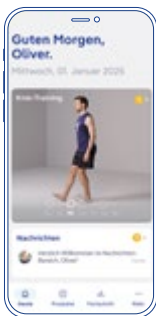


FLEXIBLES TRAINING FÜR JEDEN PATIENTEN

Das Training wird individuell für die Indikation und das aktuelle Befinden zusammengestellt. Die Übungsauswahl lässt sich jederzeit flexibel durch den Anwender anpassen – auch wenn mehr als ein Bauerfeind-Produkt im Einsatz ist.



EXPERTEN-KNOW-HOW RUND UM DIAGNOSE UND BAUERFEIND-PRODUKT

Anwender erhalten regelmäßig nützliches und verständlich aufbereitetes Hintergrundwissen zu Indikationen und Bauerfeind-Produkten von unseren Experten.

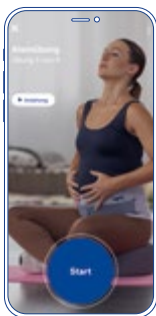

SPEZIELLES RÜCKEN-TRAINING WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT

Für das Training bei Rückenbeschwerden während der Schwangerschaft sind zahlreiche Übungen enthalten, die speziell auf die Bedürfnisse von Schwangeren abgestimmt sind.

INHALT

- 10** **DER BAUERFEIND-ONLINESHOP**
die 24 / 7 Bauerfeind-Versorgung
- 12** **DER BAUERFEIND-SERVICE**
auf den können Sie sich verlassen
- 14** **BAUERFEIND-PRODUKTEIGENSCHAFTEN**
das Plus an Funktion, Qualität und Tragekomfort
- 16** **TRAIN-BANDAGEN**
der Maßstab für die Zukunft
- 18** **THERAPIE NEU GEDACHT**
SecuTec® Genu Flex – die innovative Knieorthese
- 20** **BAUERFEIND-AKADEMIE**
Kompetent. Zielorientiert. Erfolgreich.
- 22** **DIGITAL VERMESSEN**
für höchste Qualität





FUß UND SPRUNGGELENK

26 Indikationstabelle

- 28 MalleoTrain®
- 29 MalleoTrain® S
- 30 MalleoTrain® S open heel
- 31 MalleoTrain® Plus
- 32 AchilloTrain®
- 34 AirLoc®
- 35 MalleoLoc® L
- 36 MalleoLoc® L3
- 37 MalleoLoc®
- 38 CaligaLoc®
- 39 ValguLoc®
- 40 ValguLoc® II
- 41 Xtern® Summit
- 41 Xtern® Frontier



WIRBELSÄULE UND HALS

70 Indikationstabellen

- 72 Bauerfeind-Rückenportfolio
- 74 LumboTrain® straight
- LumboTrain® waisted
- 76 SacroLoc®
- 78 Spinova® Mum
- 80 LordoLoc®
- 81 LumboLoc®
- 82 LumboLoc® Forte
- 83 Spinova®-System
- 86 Spinova® Stabi Classic
- 87 Spinova® Support Plus
- 88 Spinova® Unload Classic
- 89 Spinova® Unload Plus
- 90 Spinova® Immo Plus
- 91 Spinova® Immo
- 92 SecuTec® Dorso
- 93 SecuTec® Lumbo
- 94 SofTec® Lumbo
- 95 Spinova® Osteo
- 96 SofTec® Dorso
- 97 CerviLoc® | CerviLoc® S



KNIE, OBERSCHENKEL UND HÜFTE

44 Indikationstabelle

- 46 Bauerfeind-Knieportfolio
- 48 GenuTrain®
- 50 GenuTrain® A3
- 51 GenuTrain® P3
- 52 GenuTrain® S
- 53 GenuTrain® S Pro
- 54 GenuPoint®
- 55 SofTec® Genu
- 56 SecuTec® Genu
- 58 SecuTec® Genu Flex
- 60 GenuTrain® OA
- 61 SecuTec® OA
- 62 MOS-Genu
- 63 GenuLoc®
- 64 CoxaTrain®
- 66 SofTec® Coxa
- 67 MyoTrain®



HAND, ELLENBOGEN UND SCHULTER

100 Indikationstabelle

- 102 ManuTrain®
- 103 ManuLoc®
- 104 ManuLoc® long
- 105 ManuLoc® long Plus
- 106 RhizoLoc® OA
- 107 RhizoLoc®
- 108 ManuLoc® Rhizo
- 109 ManuLoc® Rhizo long
- 110 ManuLoc® Rhizo long Plus
- 111 EpiTrain®
- 112 EpiPoint®
- 113 OmoTrain®
- 114 OmoTrain® S
- 115 OmoLoc®

ERSATZTEILE, ZUBEHÖR UND ZUSÄTZE

- 118 Fuß und Sprunggelenk
- 119 Knie, Oberschenkel und Hüfte
- 122 Wirbelsäule und Hals
- 126 Hand, Ellenbogen und Schulter
- 127 Werkzeugbedarf Orthesen
- 128 Zusatzprodukte



MAßVERSORGUNG


- 132 Maßbestellblätter
- 139 Serienbestellbatt



DER BAUERFEIND-ONLINESHOP

Der 24 / 7 Bauerfeind-Service auf den Sie sich verlassen können


experts.bauerfeind.com

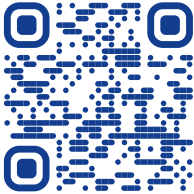

ONLINESHOP-SERVICE

Bei Bestellungen über den Bauerfeind-Onlineshop zu reduzierten Versandkosten können Sie vielfältige Funktionen nutzen, wie z.B. den Bestellstatus, die Verfügbarkeitsanzeige oder die Patientenakte.

Zum Anlegen eines Kundenkontos registrieren Sie sich unter:
experts.bauerfeind.com/register

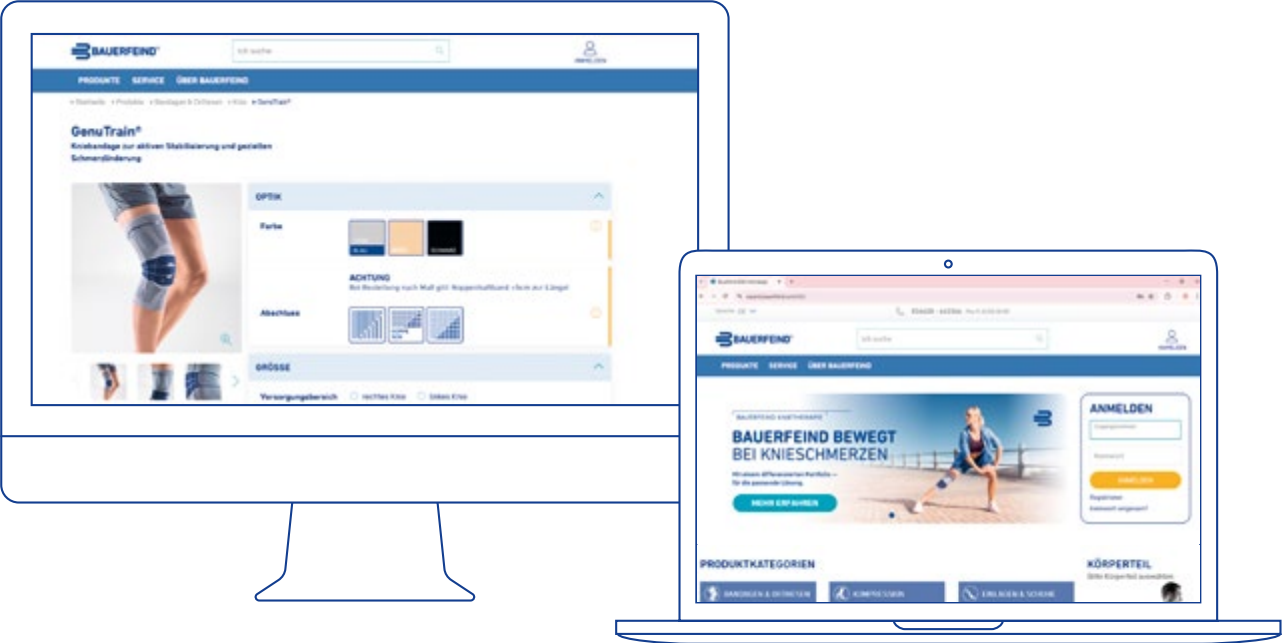



SERVICE- GARANTIE

Für Fachhändler
in Deutschland

**KUNDENSERVICE
BANDAGEN UND ORTHESEN**

Profitieren Sie von unserem Know-how und lassen Sie sich beraten. Telefonisch stehen wir Ihnen gern von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung. Sie erreichen uns 24 Stunden täglich per E-Mail und Fax.

bauerfeind.com

P +49 (0) 800 001 05 20

F +49 (0) 800 001 05 25

E info@bauerfeind.com



**KOSTENFREIE TELEFON-
UND FAXHOTLINE**

Wir sind gern für Sie da!



100 % ERREICHBAR

Als kompetente Ansprechpartner stehen wir Ihnen Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr telefonisch gern zur Verfügung. Über Fax, E-Mail und elektronische Bestellsysteme erreichen Sie uns rund um die Uhr (Systemstörungen und Wartungsarbeiten ausgenommen).



ELEKTRONISCHE BESTELLSYSTEME

Bestellen Sie einfach, schnell und mit reduzierten Versandkosten: Per elektronischer Schnittstellenanbindung oder unserem Onlineshop mit vielfältigen Funktionen, wie z. B. dem Bestellstatus und der Verfügbarkeitsanzeige.



VERSAND AM GLEICHEN ARBEITSTAG

Sie bestellen bis 15.00 Uhr – wir versenden Lagerware am gleichen Tag (Großaufträge ausgenommen). Express-Wünsche stimmen wir gern mit Ihnen ab.



**EXPRESS-FERTIGUNG FÜR
SCHNELLE MAßVERSORGUNG**

Eilige Maßaufträge VenoTrain micro, VenoTrain soft und soft S sowie VenoTrain impuls in der Farbe Caramel versenden wir noch am gleichen Arbeitstag, wenn Sie bis 10.00 Uhr den Auftrag auslösen.



GENAUER LIEFERTERMIN

Zu Ihren Bestellungen nennen wir Ihnen den genauen Liefertermin.



KEINE VERSANDKOSTEN

Bei einem Auftragswert über 200,00 €, sowie für Maßanfertigungen, übernehmen wir die Versandkosten. Sie können sortimentsübergreifend alle Artikel in einem Auftrag bestellen.



KOSTENFREIE WARENABHOLUNG

Avisieren Sie die Retoure in unserem Onlineshop oder senden Sie uns das ausgefüllte Rücksendeformular und wir holen nach Prüfung die Ware ab – auf unsere Kosten.



365 TAGE WARENRÜCKNAHME

Einwandfreie Lagerware nehmen wir innerhalb von 365 Tagen nach Lieferung laut AGB zurück.



RETOURENBEARBEITUNG IN FÜNF TAGEN

Wir bearbeiten Ihre Retoure innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Wareneingang.

BAUERFEIND- PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Das Plus an Funktion, Qualität und Tragekomfort

Bauerfeind steht seit über 95 Jahren für ausgezeichnete Qualität und eine exzellente Hilfsmittelversorgung.

Erfahren Sie mehr über anspruchsvolles Know-how und hochwertige Produkteigenschaften, welche sich durch unser gesamtes Portfolio ziehen.

+ TRAIN-GESTRICK

Die dreidimensionale Oberfläche des atmungsaktiven Materials ermöglicht eine stete Mikrozirkulation und Wechselkompression während der Bewegung.

Die neuromuskuläre Stabilisierung unterstützt physiologische Bewegungsabläufe. Das Train-Gestrick liegt passgenau an und sitzt positionssicher.



+ KOMFORTZONE

An besonders sensiblen Stellen des Körpers, wie zum Beispiel an Beugen, knöchernen Vorsprüngen oder an Randzonen, bieten wir besonders dehnbares Material für mehr Tragekomfort, minimalen Druck und erleichtertes An- und Ausziehen.



+ HAUTFREUNDLICH UND ATMUNGSAKTIV

Es ist uns ein großes Anliegen, den Wünschen vieler Anwender nach besonders hautfreundlichen Produkten nachzukommen. Deshalb entwickeln wir Materialien, die angenehm und atmungsaktiv auf der Haut anliegen.



+ EINFACHE HANDHABUNG

Wir legen Wert auf leichtes Anlegen und kraftsparende Handhabung unserer Produkte. Dafür integrieren wir individuelle Versorgungslösungen, wie zum Beispiel ergonomische Anziehhilfen, praktische Handschlaufen, spezielle Reißverschlüsse, flexible Klettgurte oder individuelle Verschlussysteme.



+ WERKZEUGFREIE ANPASSUNG

Für die individuelle Versorgung können Sie viele unserer Komponenten, wie zum Beispiel Aluminiumrahmen oder Gelenke, ohne Werkzeug anformen oder einstellen.



+ MEHRSTUFIGE THERAPIE

Der modulare Aufbau moderner Orthesen ermöglicht durch die Zugabe bzw. Entnahme von Funktionselementen eine mehrstufige Therapie je nach erforderlicher Stabilisierung und gewünschter Mobilisierung.




+ IN STUDIEN BELEGT

Erfahren Sie mehr über neueste Studienergebnisse von Ihrem Bauerfeind-Außendienst, in zertifizierten CME-Fortbildungen oder unter bauerfeind.de/arzt.



+ DIGITALE VERMESSUNG

Mit den zukunftsweisenden BODYTRONIC-Messsystemen bietet Bauerfeind die Möglichkeit, Bandagen, Kompressionsstrümpfe, Einlagen und Schuhe individuell anzupassen. Das gewährleistet perfekten Sitz, hohen Tragekomfort und die volle Entfaltung der medizinischen Wirksamkeit – für eine qualitativ hochwertige Versorgung.

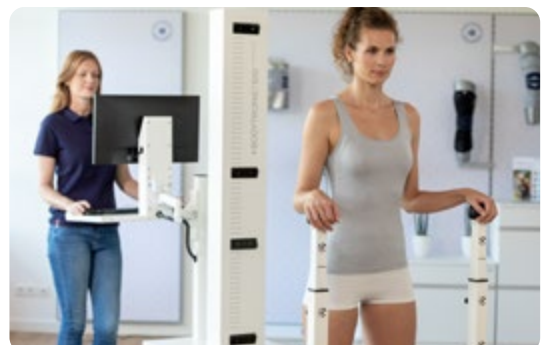

TRAIN-BANDAGEN

Der Maßstab für die Zukunft


Weniger Schmerzen und mehr Gelenkstabilität sind die therapeutischen Ziele medizinischer Bandagen. Aber eine Bandage kann nur wirklich helfen, wenn sie gut sitzt und angenehm zu tragen ist. Sie muss täglich überzeugen, denn:

DAS IST PATIENTEN / INNEN BEIM KAUF EINER BANDAGE WICHTIG.*


Nach diesen Aspekten handelt Bauerfeind seit jeher.

Bei den neuen Train-Bandagen sind


WIRKUNG, TRAGEKOMFORT UND HANDLING JETZT NOCH ÜBERZEUGENDER.

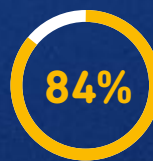

angenehm zu tragen

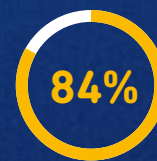

einfach und unkompliziert an- und ausziehen

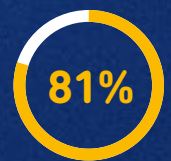

Gefühl von Sicherheit und Stabilität



MODERNE VISKOELASTISCHE PELOTEN FÖRDERN SCHMERZLINDERNDE WIRKUNG**

- entlasten und reduzieren Schmerzen
- innovative Massageelemente aus unterschiedlich festen Komponenten stimulieren intensiv

* Repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag von eurocom e.V., 2023

**Schween R, Gehring D, Gollhofer A (2015); Immediate Effects of an Elastic Knee Sleeve on Frontal Plane Gait Biomechanics in Knee Osteoarthritis. PLoS ONE 10(1): e0115782. doi:10.1371/journal.pone.0115782



» DIE PASSFORM IST EINZIGARTIG «

Die dreidimensionale, anatomische Grundform und hohe Elastizität des Gestricks sorgen dafür, dass Train-Bandagen in Bewegung optimal sitzen und so ihre Wirkung voll entfalten können.

Birgit Görnert,
Leiterin Globales Produktmanagement

DAS HOCH-TIEF-GESTRICK

+ GEZIELTE KOMPRESSION FÜR STABILISIERENDE UND SCHMERZLINDERNDE WIRKUNG

dank stark strukturierter Oberfläche in Verbindung mit Pelotten

+ REGT DEN STOFFWECHSEL AN UND WIRKT HEILUNGSFÖRDERND

das komprimierende Gestrick erzeugt bei Bewegung eine wohltuende Wechseldruckmassage

+ WIRKT DANK OPTIMALER PASSFORM

das Gestrick ist anatomisch vorgeformt und hochelastisch für einen sicheren Sitz, vor allem in der Bewegung

+ ANGENEHM ZU TRAGEN

an den empfindlichen Körperstellen ist das Gestrick dünner, die Struktur luftiger und die Kompression sanfter

BEWÄHRTE BAUERFEIND QUALITÄT

KOMFORTABEL UND STRAPAZIERFÄHIG

Die elastischen Kompressionsgarne werden von uns vor dem Strickprozess zweimal umwunden. Das garantiert ein optimales Dehnverhalten und sorgt für die angenehm weiche Oberfläche unserer Bandagen.

WEICHE RÄNDER

breite druckminimierte Ränder verhindern Einschneiden




THERAPIE NEU GEDACHT

SecuTec® Genu Flex

Die innovative Knieorthese
von Bauerfeind

- + **FLEXIBEL IN DER BEWEGUNG**
durch einzigartige Flex-Module
- + **DAUERHAFT POSITIONSSICHER**
dank teilflexiblem Rahmen
- + **INDIVIDUELLE PASSFORM**
durch Ein- und Ausklicken der Flex-Module und
verlängerbare Gelenkschenkel
- + **THERAPIEBEGLEITEND ANPASSBAR**
bei Muskelzu- und -abnahme
- + **ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ**
im aktiven Alltag

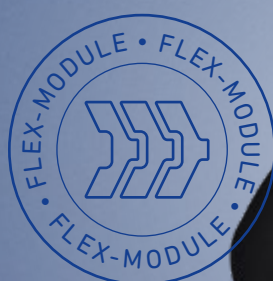

SecuTec Genu Flex passt sich an.

Muskeln verändern in der Bewegung
ihre Form und während der Therapiezeit
ihren Umfang.

VON
EXPERTEN
EMPFOHLEN



ÜBERZEUGEND IM DUO

Für die zielgerichtete Versorgung
nach orthopädischen Eingriffen
oder Verletzungen am Knie.

» Nach Kreuzbandoperation sorgen vor allem effektive Stabilisierung und Ödemreduktion für einen zügigen Heilungsprozess. Als Mittel der Wahl gelten positionssichere Orthesen und medizinische Kompressionsstrümpfe, die einfach anzulegen sind.«

Prof. Dr. med. Rolf Haaker
Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Rheumatologie und Traumatologie, St. Vincenz Hospital Brakel

SecuTec® Genu Flex

Für mehr Dynamik in der Therapie



+ effektive Führung und Stabilisierung nach dem Vier-Punkt-Prinzip und flexibel in der Bewegung

VenoTrain® soft S

Das Multitalent für leichtes Anlegen



+ effektive postoperative und post-traumatische Ödemkontrolle zum Schwellungsabbau

Vorteile in der Therapie

✓ **Rehabilitation verbessern**

✓ **entstandene Ödeme reduzieren**

✓ **Heilungsprozess fördern**

*Eine vollständige Übersicht erhalten Sie im Produktkatalog der Med. Kompressionsstrümpfe (Art.-Nr. 271 2010 1000 003).
Für Hinweise zu Indikationen, Kontraindikationen und der Handhabung des von Ihnen gewünschten Produkts bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung konsultieren!



BAUERFEIND- AKADEMIE

Kompetent. Zielorientiert. Erfolgreich.

Sie wollen, dass Kunden Ihren Fachhandel klar favorisieren und das Know-how Ihres Teams honorieren?

Wir unterstützen Sie gern dabei!

Wir bieten Ihnen dafür qualifizierte Trainings mit hohem Praxisbezug in ganz Deutschland zu folgenden Kategorien:

MEDIZINISCHES WISSEN UND FACHLICHE KOMPETENZ

- Basistraining Bandagen
- Training »Die Knietherapie mit Bauerfeind«

VORTEILE AUF EINEN BLICK

+ TRAININGS MIT HOHEM PRAXISBEZUG

Die Trainings unserer Akademie beinhalten stets einen medizinischen Anteil für ein besseres Verständnis und mehr fachliche Kompetenz. Speziell ausgebildete Trainer wie Orthopädietechniker, Physiotherapeuten und Lymphtherapeuten führen Sie professionell und zielgruppenspezifisch durch die unterschiedlichen Themenbereiche.

+ ONLINE-TRAININGS

Sie möchten zeit- und kosteneffizient lernen? Sie können ein individuelles Online-Training buchen und bestimmen den Inhalt und das Thema ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen.

+ INHOUSE-TRAININGS – DIREKT ZU IHNEN. MASSGESCHNEIDERT. EFFIZIENT. PERSÖNLICH.

Sie möchten ein Training, das genau zu Ihnen passt? Bei uns stellen Sie Ihr persönliches Training selbst zusammen: Thema, Inhalte, Zeitpunkt, Ort und Referent – alles nach Ihren Wünschen. Sprechen Sie uns an, wir erstellen Ihr maßgeschneidertes Trainingsangebot!

Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter oder der Bauerfeind-Akademie:

T +49 (0) 800 0 01 05 01
F +49 (0) 800 0 01 05 02
E akademie@bauerfeind.com

Wir bieten Ihnen **E-Learnings** für zeit- und ortsunabhängiges Lernen in Ihrer eigenen Geschwindigkeit an.



Registrieren Sie sich gleich hier:

IN WENIGEN MINUTEN
ZUM PASSENDEN TRAINING
MIT UNSEREM
SCHULUNGSFINDER

experts.bauerfeind.com/b2b/produktfinder_akademie_schulungen



DIGITAL VERMESSEN FÜR HÖCHSTE QUALITÄT



PRODUKTFINDER:
[experts.bauerfeind.com/
 b2b/messtechnik](https://experts.bauerfeind.com/b2b/messtechnik)



BODYTRONIC® 410

Flexibler 3D-Scanner für die unteren Extremitäten

- berührungsloses Messen für Kompressionsstrümpfe und Knie- / Sprunggelenkbandagen
- Digitalisierung von Trittschäumen möglich
- 3D-Abbild des Messbereiches bis zur Taille
- schneller und einfacher Auf- und Wiederabbau
- mobil und platzsparend Vermessen auf kleinstem Raum
- Standfläche von lediglich 1,60 m im Durchmesser





AUSWAHL DES PASSGENAUEN PRODUKTES
Das BODYTRONIC 610 bietet Ihnen eine Entscheidungshilfe bei der Auswahl einer optimalen Serien- oder Maßversorgung.



SCANNER UND KAMERA
Muster aus unbedenklichen Infrarot-Lichtstrahlen werden auf die zu vermessende Person projiziert und digital erfasst. Die Software berechnet aus den Bildinformationen das exakte 3D-Abbild.



SELBSTDREHENDE MESSPLATTFORM
Bewegt den Patienten gleichmäßig und schließt so Fehlerquellen bei der Messung aus.



BODYTRONIC® 610
Ganzkörper-Scanner inklusive
Produktversorgung aller Extremitäten

- berührungsloses Messen für Kompressionsstrümpfe, Knie- und Sprunggelenkbandagen, Knieorthesen sowie für Rücken-, Arm- und Schulterprodukte
- Digitalisierung von Trittschäumen möglich
- Ganzkörper-Scan möglich
- Export der 3D-Daten
- Standfläche von lediglich 1,6 m²
- dank Infrarot-Musterprojektion auch zur Vermessung in der Schwangerschaft unbedenklich

FUSS UND SPRUNGGELENK

FÜR EINE GEZIELTE FUß- UND SPRUNGGELENK- THERAPIE

AchilloTrain®





INDIKATIONSTABELLE FUß- UND SPRUNGGELENKThERAPIE

PRODUKT	MalleoTrain®	MalleoTrain® S / S open heel	MalleoTrain® Plus	AchilloTrain®	AirLoc®
					
PRODUKTMERKMAL	Entlastung und Stabilisierung des Sprunggelenks	Stabilisierung des Sprunggelenks durch funktionelles Gurtsystem	Erhöhte Stabilisierung und Entlastung des Sprunggelenks durch funktionelles Gurtsystem	Linderung von Achillessehnenbeschwerden durch Friktionspelotte und Fersenkeil	Bewegungslimitierende Sprunggelenkorthese mit anpassbarer Luftpolsterung
HILFSMITTELNUMMER*	05.02.01.0001	keine	05.02.01.2004	05.02.01.1003	23.02.02.0007
SEITENZAHL	28	29 + 30	31	32 + 33	34
INDIKATIONEN					
	leicht	•	•	•	
Bandinsuffizienz / Instabilität	mittel				•
	schwer				
Reizzustände (posttraumatisch / postoperativ)	•		•	•	
Kapselbandverletzung (akut)					•
frühfunktionelle Therapie	•		•		•
konservative / postoperative Therapie	•		•		•
Sinus-Tarsi-Syndrom / Instabilität des Subtalargelenks					
Rezidivprophylaxe	•	•	•		•
Arthrose / Arthritis	•				
Tendopathie	•				
Tendomyopathie	•				
Achillodynie				•	
Haglundferse				•	
Hallux valgus (konservativ / postoperativ)					
Weber-A-Fraktur (nicht disloziert)					•
Fußheberschwäche (z. B. nach Trauma, Schlaganfall, Operation, MS)					

* Angaben zur Rezeptierung gelten nur in Deutschland

MalleoLoc® L	MalleoLoc® L3	MalleoLoc®	CaligaLoc®	ValguLoc®	ValguLoc® II	Xtern® Summit	Xtern® Frontier
							
Laterale Stabilisierung des Sprunggelenks	Laterale Stabilisierung des Sprunggelenks – abrüstbar in drei Stufen	Erhöhte Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks	Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks nach schweren Verletzungen	Korrektur der Großzehe in Ruhe	Korrektur der Großzehe in Ruhe und Bewegung	unterstützt ein natürliches Gangbild	unterstützt ein natürliches Gangbild
23.02.02.1042	23.02.04.0010	23.02.02.2004	23.02.01.0003	23.01.01.0007	23.01.01.1002	23.03.02.6047	23.03.02.6046
35	36	37	38	39	40	41	41
•	•						
•	•	•					
		•	•				
•	•						
•	•	•	•				
•	•	•					
•	•	•	•				
•	•		•				
•	•	•					
				•	•		
						•	•

MalleoTrain®

Entlastung und Stabilisierung des Sprunggelenks

Hilfsmittelnummer

05.02.01.0001



laterale und mediale Pelotte



an Innen- und Außenknöchel
angepasste Pelotten



Train-Gestrick



Komfortzone am Spann



weicher Bandagenrand

INDIKATIONEN

- chronische, postoperative und posttraumatische Reizzustände, z. B. nach Distorsionen
- Arthrose und Arthritis, Gelenkergüsse und Schwellungen
- Tendopathie
- Tendomyopathie
- Bänderinsuffizienz
- frühfunktionelle / konservative Therapie
- Rezidivprophylaxe

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- die dosierte Kompression beschleunigt die Resorption von Ödemen, Ergüssen und Hämatomen
- durch die Pelotten wird eine Umverteilung der Bandagenkompression von den prominenten Malleolen auf das umgebende Weichteilgewebe bewirkt
- neuromuskuläre Gelenkstabilisierung durch Gestrickkompression
- in der Bewegung entsteht eine intermittierende Kompression, die über Gelenkkapsel und Sehnenloggen die Durchblutung fördert
- optimierte Haltbarkeit auch bei hoher Beanspruchung durch Verstärkung der Naht mit einem elastischen Band
- die atmungsaktive und besonders weiche Komfortzone am Spann des anatomisch geformten Train-Gestricks ermöglicht höchsten Tragekomfort bei optimaler medizinischer Wirkung

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan

Ausführungen: rechts, links

optional:

Maßanfertigung (beige, titan)

Hinweis:

bei Maßanfertigung zusätzliche Hilfsmittelnummer: 05.99.99.0001

LIEFERUMFANG

inklusive Anziehhilfe

IN STUDIE^A BELEGT

- **60 % der Patienten** empfinden weniger Schmerzen mit der Sprunggelenkbandage MalleoTrain

GRÖÖE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Fusselumfang (cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29	110 1110 30*0 +0°

* = Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan
+ = Ausführung (6) rechts, (7) links
° = Größe (1 – 6)

Maßanfertigung: Die genauen Messpunkte entnehmen Sie bitte dem Maßbestellblock oder dem Maßbestellblatt auf Seite 137.

^A Heß, T.; Milani, T.L.; Kilper, A.; Mitschke, C.
Immediate Effects of Wearing an Ankle Bandage on Fine Coordination, Proprioception, Balance and Gait in the Subacute Phase of Ankle Sprains.
Life 2024, 14, 810. <https://doi.org/10.3390/life14070810>



MalleoTrain® S

Stabilisierung des Sprunggelenks durch funktionelles Gurtsystem

Hilfsmittelnummer

KEINE

Keine Erstattung durch die Krankenkasse, außer mit Einzelfallgenehmigung.



in Achter-Tour gewickeltes Gurtsystem



flaches Gurtsystem



Train-Gestrick



Komfortzone am Spann



weicher Bandagenrand

INDIKATIONEN

- Bandinsuffizienz
- Supinationsprophylaxe
- leichte Distorsionen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- stabilisiert Bewegungsebenen des Sprunggelenks und wirkt antisupinatorisch dank individuell einstellbarem Gurtsystem
- wirkt wie ein funktioneller Tapeverband und verbindet Mittelfuß mit distalem Unterschenkel über eine vertikale Achter-Tour
- neuromuskuläre Gelenkstabilisierung durch Gestrickkompression
- die atmungsaktive und besonders weiche Komfortzone am Spann des anatomisch geformten Train-Gestricks ermöglicht höchsten Tragekomfort bei optimaler medizinischer Wirkung
- besonders flaches Gurtsystem auf anatomisch geformtem Train-Gestrick passt in viele Schuhe
- optimierte Haltbarkeit auch bei hoher Beanspruchung durch Verstärkung der Naht mit einem elastischen Band

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: schwarz, titan

Ausführungen: rechts, links

LIEFERUMFANG

inklusive Anziehhilfe

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Fesselumfang (cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29	110 1111 30*0 +0°

* = Farbe (7) schwarz, (8) titan
+ = Ausführung (6) rechts, (7) links
° = Größe (1 – 6)



MalleoTrain® S open heel

**Stabilisierung des Sprunggelenks und
verbesserter Bodenkontakt durch offenen
Fersenbereich**

Hilfsmittelnummer

KEINE

Keine Erstattung durch die Krankenkasse,
außer mit Einzelfallgenehmigung.



in Achter-Tour gewickeltes
Gurtsystem



flaches Gurtsystem



offener Fersenbereich



Train-Gestrick



Komfortzone am Spann

INDIKATIONEN

- Bandinsuffizienz
- Supinationsprophylaxe
- leichte Distorsionen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- stabilisiert Bewegungsebenen des Sprunggelenks und wirkt antisupinatorisch dank individuell einstellbarem Gurtsystem
- wirkt wie ein funktioneller Tapeverband und verbindet Mittelfuß mit distalem Unterschenkel über eine vertikale Achter-Tour
- neuromuskuläre Gelenkstabilisierung durch Gestrickkompression
- die atmungsaktive und besonders weiche Komfortzone am Spann des anatomisch geformten Train-Gestricks ermöglicht höchsten Tragekomfort bei optimaler medizinischer Wirkung
- offener Fersenbereich für einen verbesserten Bodenkontakt
- besonders flaches Gurtsystem auf anatomisch geformtem Train-Gestrick passt in viele Schuhe

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, titan

Ausführungen: rechts, links

GRÖÖSE	1	2	3	4	5	ARTIKEL-NR.
Fesselumfang (cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	110 1115 10*0 +0°

* = Farbe (1) beige, (8) titan
+ = Ausführung (6) rechts, (7) links
° = Größe (1 – 5)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-s-open-heel



MalleoTrain® Plus

**Erhöhte Stabilisierung und Entlastung
des Sprunggelenks durch funktionelles
Gurtsystem**

Hilfsmittelnummer

05.02.01.2004



laterale und mediale Pelotte



in Achter-Tour gewickeltes
Gurtsystem



flaches Gurtsystem



Train-Gestrick



Komfortzone am Spann

INDIKATIONEN

- chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- postoperative Rehabilitation
- frühfunktionelle Therapie von Kapselbandverletzungen des oberen bzw. unteren Sprunggelenks
- Bandinsuffizienz / Instabilität
- Supinationsprophylaxe, besonders bei gesteigerten Aktivitäten

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- stabilisiert Bewegungsebenen des Sprunggelenks und wirkt antisupinatorisch dank individuell einstellbarem Gurtsystem
- wirkt wie ein funktioneller Tapeverband und verbindet Mittelfuß mit distalem Unterschenkel über eine vertikale Achter-Tour
- zusätzliche Stabilität durch mediale und laterale Pelotten, die vom Achter-Gurt eng umfasst werden
- neuromuskuläre Gelenkstabilisierung durch Gestrickkompression
- die atmungsaktive und besonders weiche Komfortzone am Spann des anatomisch geformten Train-Gestricks ermöglicht höchsten Tragekomfort bei optimaler medizinischer Wirkung
- besonders flaches Gurtsystem auf anatomisch geformtem Train-Gestrick passt in viele Schuhe
- optimierte Haltbarkeit auch bei hoher Beanspruchung durch Verstärkung der Naht mit einem elastischen Band

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

LIEFERUMFANG

inklusive Anziehhilfe

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Fesselumfang (cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29	110 1112 1080 +0°

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

° = Größe (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-plus




AchilloTrain®

Linderung von Achillessehnenbeschwerden
durch Friktionspelotte und Fersenkeil

Hilfsmittelnummer

05.02.01.1003

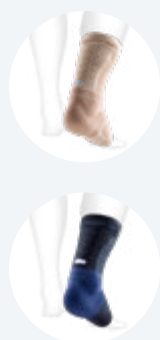



hochreichende Friktionspelotte



Wirkung der Pelotte über den gesamten Sehnenverlauf



integrierte Anziehhilfe



zwei Fersenkeile für zusätzliche Entlastung



Komfortzone am Spann

INDIKATIONEN

- Achillodynie (Tendinose, Paratendinitis, Bursitis subachillea)
- Haglundferse
- chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände, z. B. bei Achillessehnenrupturen
- entzündliche Prozesse an der Achillessehne

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- die Pelotte sorgt für eine gleichmäßige Druckeinleitung und bewirkt in der Bewegung einen Massageeffekt, die Durchblutung wird lokal verbessert, Ödeme werden reduziert
- die integrierte Sehnenpelotte ist viskoelastisch und anatomisch geformt
- gezielte Wechselkompression dient u. a. zur Verbesserung der Muskelsteuerung und der Koordination der Bewegung

ANWENDUNGSHINWEISE

- Fersenkeile bitte beidseitig verwenden zum Beinlängenausgleich der Gegenseite

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 118 und Preisliste

LIEFERUMFANG

inklusive Anziehhilfe

inklusive viskoelastische Fersenkeile (ein Paar)

IN STUDIE^A BELEGT

- Frühmobilisierung mit AchilloTrain ist genauso sicher wie Gipsimmobilisierung postoperativ (nach minimal-invasiver Sehennaht)

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Fesselumfang (cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29	110 1101 40*0 00°

* = Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan

° = Größe (1 – 6)

^A Groetelaers, R., P., T., G., C., et al., Orthopaedic Foot & Ankle Society on June 12, 2014; DOI: 10.1177/1071100714536167 fai.sagepub.com

experts.bauerfeind.com/achillotrain



AirLoc®

Bewegungslimitierende Sprunggelenkorthese mit anpassbarer Luftpolsterung

Hilfsmittelnummer

23.02.02.0007



Anpassen der Luftpolsterung an den Schwellungszustand mittels integrierter Pumpe und Ablassventil



passt sich an die individuelle Fußbreite an, dank einer elastischen Schalenverbindung



optimaler Sitz am Unterschenkel durch zwei anatomisch geformte Klettgurte



angenehmes Tragen dank flacher, anatomisch geformter Konstruktion mit weichen Polstern



stabilisiert in Kombination mit einem Schuh

INDIKATIONEN

- Versorgung bei Kapsel-Bandverletzungen (akut)
- frühfunktionelle / konservative Therapie, z. B. nach Sprunggelenkdistorsion und Bandruptur
- postoperative Rehabilitation / Protektion, z. B. nach Bandnaht / -rekonstruktion
- chronische Bandsuffizienz / Instabilität
- Rezidivprophylaxe
- Weber-A-Fraktur (nicht disloziert)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- stabilisiert nach akuten Verletzungen in Kombination mit einem Schuh den medialen und lateralen Kapselbandapparat des Sprunggelenks
- Pronation und Supination werden mechanisch eingeschränkt, um vor erneuten Traumata zu schützen
- die flache, anatomisch geformte Orthese in Universalgröße für rechts/links ist vor allem für die Akutversorgung ausgelegt
- innenseitig liegen großflächige Schaumstoffpolster in einem weichen Mikrofaserbezug an
- zwei anatomisch vorgeformte Kunststoffschalen bilden eine U-Schiene und werden mit zwei anatomisch geformten Klettgurten fixiert, die zirkulär um Fessel und Unterschenkel verlaufen
- unterhalb des Fersenbeins sind die Schalen elastisch miteinander verbunden und passen sich an die individuelle Fußbreite und den aktuellen Schwellungsgrad an

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + werkzeugfreie Anpassung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: blau

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

Größe: universal

IN STUDIEN^A BELEGT

- **34 % weniger Komplikationen** in der Sprunggelenktherapie im Vergleich zu einem Tapeverband
- reduziert Schmerzen
- erhöht die Gelenkstabilisierung

ANWENDUNGSHINWEISE

- die zusätzlich lateral eingefügte Luftpolsterung kann mittels integrierter Pumpe und Ablassventil an den individuellen Schwellungszustand angepasst werden
- trägt kaum auf und passt gut in verschiedenes Schuhwerk

GRÖÖE

In einer Universalgröße erhältlich

ARTIKEL-NR.

120 1303 2050 000

^A Lardenoye, S., Theunissen, Ed., Cleffken, B., Brink, P., R., G., de Bie, R., A., Poeze, M.: The effect of taping versus semi-rigid bracing on patient outcome and satisfaction in ankle sprains: a prospective, randomized controlled trial BMC Musculoskeletal Disorders 2012, 13:8; <http://www.biomedcentral.com/1471-2474/13/81>
Nicht Interventionelle Studie, Evaluation von Einsatzgebiet, Wirkung und Therapiesicherheit, Bauerfeind AG

MalleoLoc® L

Laterale Stabilisierung des Sprunggelenks

Hilfsmittelnummer

23.02.02.1042



Plantar-Pelotte



Mikrofaser-Polstermaterial



Schale



schlanke L-Schale



passt in Alltags- und
Businesschuhe

INDIKATIONEN

- konservative Behandlung von Distorsionen und Bandrupturen
- akute und chronische Kapselbandinstabilitäten
- Prophylaxe bei chronischer Bandinstabilität
- postoperative Rehabilitation / Protektion, z. B. nach Bandnaht / -rekonstruktion
- posttraumatische / postoperative Reizzustände

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- stabilisiert den Fuß im Schuh und schützt lateral vor seitlichem Umknicken, ohne das normale Abrollen des Fußes einzuschränken
- L-Schale liegt vor dem Talus an und wirkt einem Talusvorschub entgegen
- individuell positionierbare Plantar-Pelotte (optional) stimuliert die Fußhebermuskulatur für eine zusätzliche aktive Stabilisierung
- angenehmer Tragekomfort durch weiches Mikrofaser-Polster

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + werkzeugfreie Anpassung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

Größe: Universal

Ersatzteile / Zusätze:
siehe Seite 118 und Preisliste

IN STUDIE^A BELEGT

- wirkt einem Umknicken entgegen
- stabilisiert das Sprunggelenk

GRÖßE

In einer Universalgröße erhältlich

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

ARTIKEL-NR.

120 1326 1080 +00

^A Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., Laborstudie:
Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus;
Orthopädieschuhtechnik, Ausg. 10, S. 26 – 29, 2018

MalleoLoc® L3

Laterale Stabilisierung des Sprunggelenks – abrüstbar in drei Stufen

Hilfsmittelnummer

23.02.04.0010



Therapielösung für drei Stabilitätsbedürfnisse



Reißverschluss



passt in Alltags- und
Businesschuhe

INDIKATIONEN

- konservative Behandlung von Distorsionen und Bandrupturen
- akute und chronische Kapselbandinstabilitäten
- Prophylaxe bei chronischer Bandinstabilität
- postoperative Rehabilitation / Protektion, z. B. nach Bandnaht / -rekonstruktion
- posttraumatische / postoperative Reizzustände

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- abrüstbare Orthese begleitet den Patienten während der Therapie und bietet eine Lösung für drei Stabilitätsbedürfnisse entsprechend des Heilungsverlaufes
- Weichteilkompression der Bandage beschleunigt den Abbau von Schwellungen, verbessert die Propriozeption und wirkt muskelaktivierend
- stabilisiert den Fuß im Schuh lateral und schützt vor seitlichem Umknicken, ohne das normale Abrollen des Fußes einzuschränken
- L-Schale liegt vor dem Talus und arbeitet einem Talusvorschub entgegen
- Reißverschluss für leichtes Anlegen der Bandage

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + mehrstufige Therapie
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

Ersatzteile / Zusätze:
siehe Seite 118 und Preisliste

IN STUDIE^A BELEGT

- wirkt einem Umknicken entgegen
- stabilisiert das Sprunggelenk

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Fesselumfang (cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29	120 1327 1080 +0°

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

° = Größe (1 – 6)

^A Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., Laborstudie:
Nachweis von antispinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus; Orthopädieschuhtechnik, Ausg. 10, S. 26 – 29, 2018



MalleoLoc®

Erhöhte Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks

Hilfsmittelnummer

23.02.02.2004



plantare Zunge



anatomisch geformtes, bilaterales
Stabilisierungselement

INDIKATIONEN

- frühfunktionelle / konservative Therapie bei Kapselbandverletzungen und bei Verletzungen des Lig. Bifurcatum, z. B. nach Distorsion und Bandruptur
- postoperative Protektion nach Bandnaht / -rekonstruktion
- chronische Bandinsuffizienz
- Rezidivprophylaxe

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- stabilisiert den Fuß und schützt vor seitlichem Umknicken
- ermöglicht Plantarflexion sowie Dorsalextension und arbeitet gleichzeitig einem Talusvorschub entgegen, »normales« Gehen wird nicht eingeschränkt
- aktiviert die Fußhebermuskulatur über eine plantare Zunge und unterstützt so die stabilisierende Wirkung und den Supinationsschutz durch die Orthese

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

Ersatzteile / Zusätze:
siehe Seite 118 und Preisliste


IN STUDIEN^A BELEGT

- wirkt einem Umknicken entgegen
- stabilisiert das Sprunggelenk

GRÖßE	1 (NORMAL)	2 (BREIT)	ARTIKEL-NR.
Fersenbreite (cm)	< 6	> 6	120 1301 3080 +0°

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links
° = Größe (1–2)

^A Gehring et al.: Expecting ankle tilts and wearing an ankle brace influence joint control in an imitated ankle sprain mechanism during walking. Gait & Posture 2014; 39 (3), 894–898.
Eberbach H., et al., J. Orthop. Surg. Res. (2021) 16:620; <https://doi.org/10.1186/s13018-021-02750-6>

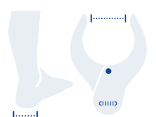

CaligaLoc®

Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks nach schweren Verletzungen

Hilfsmittelnummer

23.02.01.0003



Pronationskeil zur Entlastung der lateralen Bandstrukturen



Ansicht von medial

INDIKATIONEN

- konservative Therapie von schweren Sprunggelenkverletzungen
- postoperative Protektion nach Bandnaht / -rekonstruktion
- chronische Instabilität des oberen und / oder unteren Sprunggelenks mit Gegenanzeigen zur Operation
- posttraumatisches Sinus-Tarsi-Syndrom und dekompensierte Instabilität des Subtalargelenks, auch temporäre Stabilisierungshilfe

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- verhindert unphysiologische Stresssituationen für das obere und teilweise auch untere Sprunggelenk
- Anhebung der Außenkante des Rückfußes und Entlastung des lateralen Bandapparates dank integriertem Pronationskeil

ANWENDUNGSHINWEISE

- individuelle Anpassung durch Ausschneiden des Polsters bei starker Schwellung dank Aussparung im Bereich des Außenknöchels
- ausschließlich in bequemen Straßen- oder Turnschuhen zu tragen, im Liegen oder Sitzen entlastet die Orthese das Sprunggelenk auch ohne Schuhe

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

IN STUDIE^A BELEGT

- **23,3 Tage früher wieder arbeitsfähig** im Vergleich zum Gips

GRÖßE	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Richtwert Schuhgröße	34 – 38	39 – 43	44 – 48	120 1300 4080 +0°

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

° = Größe (1 – 3)

^A Zwipp et al, Die konservativ-funktionelle Behandlung des Knöchelbänderrisses hat sich bewährt: 5-Jahres-Ergebnisse, Med. Orth. Tech., Ausg. 114, S. 122 – 126, 1994 © Gentner Verlag Stuttgart

ValguLoc®

Korrektur der Großzehe in Ruhe

Hilfsmittelnummer

23.01.01.0007



Lagerungsschiene

INDIKATION

- Hallux valgus (konservativ und postoperativ)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- korrigiert die Fehlstellung der Großzehe und dehnt verkürzte Kapselanteile bzw. Weichteile
- postoperativ können Korrekturverluste (z.B. durch Narbenzüge) vermieden werden und die Schalung vermittelt der Großzehe einen gewissen Schutz vor mechanischen Einflüssen
- stufenlos anpassbarer Korrekturdruck mit Klettverschluss
- hoher Tragekomfort dank weichem Gurt- und Polstermaterial

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

Ersatzteile / Zusätze:
siehe Seite 118 und Preisliste

GRÖßE	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Richtwert Schuhgröße	34 – 36	37 – 40	41 – 46	120 1310 2080 +0°

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links
° = Größe (1 – 3)

ValguLoc® II

Korrektur der Großzehe in Ruhe und Bewegung

Hilfsmittelnummer

23.01.01.1002



mehrdimensionales Gelenk zur Einstellung des Abduktions- und Adduktionswinkel



freie Beweglichkeit des Großzehengrundgelenks oder Fixierung in einstellbaren Flexions- und Extensionswinkeln

INDIKATIONEN

- postoperative Protektion / Rehabilitation nach Hallux-valgus-OP
- konservativ-funktionelle Therapie der Hallux-Fehlstellung mit Mobilisationsfunktion

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- individuelle Einstellung eines Korrekturwinkels der Großzehe dank dreidimensional verstellbarem Gelenk
- anpassbar an die individuelle Fußform, optional stufenweise arretierbar zur postoperativen Schienung / Ruhigstellung des Großzehengrundgelenks
- Druckentlastung des Großzehengrundgelenks durch Korrektur
- passt in weites Straßenschuhwerk durch flach anliegende Bauhöhe
- ermöglicht natürliches Abrollen des Fußes

DAS BAUERFEIND-PLUS

+ einfache Handhabung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

Größe: Universal

Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 118 und Preisliste

GRÖÖE

In einer Universalgröße erhältlich

ARTIKEL-NR.

120 1316 0050 000

Xtern® Summit*

Xtern® Frontier*

Unterstützen ein natürliches Gangbild

Hilfsmittelnummer

23.03.02.6047 Xtern Summit

23.03.02.6046 Xtern Frontier



Der Patient kann mit Xtern verschiedene Schuhe tragen (Bild zeigt Beispiele)



schneller Schuhwechsel dank Schuhbefestigungsclips (beim Produkt enthalten)



selbstschließender Magnetverschluss von Xtern Frontier, auch bei Xtern Summit verwendbar

Testorthesen verwenden, um die richtige Größe zu bestimmen.

INDIKATIONEN

Fußheberschwäche ohne oder mit leichter Spastik:

- Peroneus-Parese
- nach einer Rücken-, Hüft- oder Knieoperation
- nach einer traumatischen Verletzung im Bereich der unteren Gliedmaßen

Zusätzlich (Versorgung mit Xtern Frontier):

- Parese nach Schlaganfall mit eingeschränkter Beweglichkeit der Finger
- Multiple Sklerose (MS)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- gibt dem Fuß Bewegungsenergie zurück, dank biomechanisch-optimiertem Orthesendesign
- natürliches Gehen, Wandern und mehr: Orthesenkonstruktion passt sich unebenen Untergründen an
- passt an viele Schuhe durch Klicksystem, auswechselbar an Alltags-, Sportschuhen und sogar Sandalen (10 Clips enthalten)
- hoher Tragekomfort: kein direkter Körperkontakt am Fuß und Sprunggelenk, damit Vermeidung von Blasen und Druckstellen
- geringe Lagerkapazität durch Drei-Größen-system mit einer Ausführung für das rechte und das linke Bein
- individuelle Einlagenversorgung möglich

ANWENDUNGSHINWEISE

bei eingeschränkter Feinmotorik der Hände empfehlen wir die Xtern Frontier aufgrund von:

- einhändig schließbarem Magnetverschluss
- Einstieg von hinten

BESTELLOPTIONEN

Farben: schwarz

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 119 und Preisliste

GRÖßE		S	M	L	ARTIKEL-NR.
Xtern Summit	Richtwert Schuhgröße	34,5 – 41,5	40,5 – 46,0	45,0 – 51,0	120 1355 1170 00°
Xtern Frontier	Richtwert Schuhgröße	34,5 – 41,5	40,5 – 44,5	44,5 – 51,0	120 1356 1170 00°
Xtern Testset					190 0110 0110 001

° = Größe S (1), M (2), L (3)

Bei Zwischengrößen: für schlankere Füße die kleinere Größe verwenden.

experts.bauerfeind.com/turbomed-xtern

* Hersteller:
TurboMed Orthotics Inc.
240 Sydney (Suite 101)
St-Augustin-de-Desmaures, QC,
G3A 0P2, CANADA



GenuTrain® P3

KNIE, OBERSCHENKEL UND HÜFTE

FÜR EINE GEZIELTE **KNIE- UND HÜFT- THERAPIE**

INDIKATIONSTABELLE KNIE- UND HÜFTTHERAPIE

PRODUKT						GenuPoint®	SofTec® Genu
PRODUKTMERKMAL	Aktivierung, Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenks	Aktivierung und Stabilisierung bei komplexen Kniebeschwerden wie Gonarthrose	Zentrierung und Sicherung der Patella durch einstellbaren Korrekturzügel	Verstärkte Stabilisierung des Kniegelenks durch seitliche Gelenkschienen	Verstärkte Stabilisierung des Kniegelenks durch seitliche Gelenkschienen und Limitierung des Bewegungsumfangs	Gezielte Entlastung und Führung der Patellasehne	Aktive und passive Stabilisierung des Kniegelenks – ideal für die Langzeit-Therapie
HILFSMITTELNUMMER*	05.04.01.0006	05.04.01.2006	23.04.05.0011	23.04.03.0014	23.04.03.1045	05.04.01.1023	mit Kosten- voranschlag
INDIKATIONEN I SEITENZAHL	48	50	51	52	53	54	55
Reizzustände (posttraumatisch / postoperativ)	•	•	•			•	
rezidivierender Gelenkerguss	•	•					
Patellalateralisation		•	•				
Patella(sub)luxation			•				
femoropatellares Schmerzsyndrom			•			•	
Instabilität	leicht bis mittel	•	•	•	•		
	schwer bis komplex						•
	funktionell, z.B. Non Coper						•
Meniskusverletzung	•				•		•
nach Meniskusrefixation							•
Seitenbandverletzung							•
Ruptur vorderes / hinteres Kreuzband (ACL / PCL)							•
Gonarthrose / Arthritis	leicht bis mittel	•	•	•	•		
	mittel bis schwer						
Zustand nach Knorpeltransplantation							
Tendopathie	•	•					
Patellafraktur (konservativ oder postoperativ)							
Genu recurvatum							•
Umstellungsosteotomie							
Knieruhigstellung							
Muskelverletzung (Muskelverhärtung, Muskelzerrung, Muskelfaserriss)							
Rezidivprophylaxe	•	•	•	•	•		•
Coxarthrose							
Hüftgelenkluxation							
nach endoprothetischem Eingriff / Wechselprothesen							
muskuläre Dysbalance Lenden-Becken-Hüft-Region							
muskuläre Probleme nach Gelenkoperationen Hüfte							
Impingement Hüftgelenk							
Instabilität des Hüftgelenks (nach T.E.P., nach Revisionseingriff)							
Instabilitätsgefühl in der Hüfte							
Lockerung Hüftprothese, wenn OP nicht möglich							
chronische Reizzustände (z.B. Bursitis i.V.m. Arthrose)							
chronische Tendinopathie i.V.m. Arthrose							

*Angaben zur Rezeptierung gelten nur in Deutschland

¹ Kellgren-Lawrence-Score 2 – 4 ¹ Kellgren-Lawrence-Score 2 – 4

BAUERFEIND KNIETHERAPIE

GEZIELTE UND ERSTKLASSIGE VERSORGUNG

GEZIELTE UNTERSTÜTZUNG FÜR DAS KNIE.

Ein schmerzendes Knie kann viele Ursachen haben und verändert meist die Bewegungsroutine sowie den Alltag Ihrer Patienten. Genau hier setzt Bauerfeind mit durchdachten Lösungen in die Knietherapie an, die Stabilität, Sicherheit und Tragekomfort bieten können.

Jahrzehntelange Erfahrung wird mit innovativer Technik vereint. So entsteht ein orthopädisches Versorgungskonzept, das sich einfach anwenden lässt und echten Mehrwert schafft.



Bauerfeind bewegt bei Knieschmerzen!

Allgemeine Diagnose:

ALLGEMEINER KNIESCHMERZ

GenuTrain®

ergänzend zur Therapie



TRlactive® Select¹

Differenzierte Diagnose:

PATELLA

GenuPoint®

GenuTrain® P3

GONARTHROSE

GenuTrain® A3

GenuTrain® OA

SecuTec® OA¹

TRAUMA

GenuTrain® S / S Pro

SofTec® Genu

SecuTec® Genu¹

SecuTec® Genu Flex¹

ergänzend zur Therapie



TRlactive® Select¹

TRlactive® Select OA¹

TRlactive® Select¹

VenoTrain® soft S¹



THERAPIE-APP

¹ Produkt ist in der Training App nicht enthalten




Prof. Dr. med. Rolf Haaker
Chefarzt der Klinik für Orthopädie,
Rheumatologie und Traumatologie,
St. Vincenz Hospital Brakel

»Die zahlreichen Krankheitsbilder des komplexen Kniegelenkes erfordern eine große und exklusive Auswahl an Hilfsmitteln für die bestmögliche therapeutische Umsetzung.«



bauerfeind.de/app

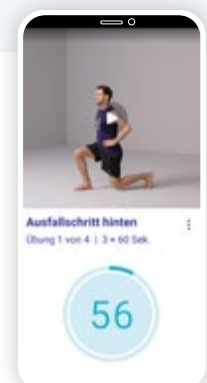

Um die Knietherapie perfekt abzurunden, empfehlen wir als zusätzlichen Therapie-Baustein die **Bauerfeind-Therapie-App**.

ACHTUNG: nicht nach der direkten Trauma-Therapie verwenden.

Schmerzen im Kniegelenk*

17,3%
der Frauen



15,1%
der Männer



im Alter
von 18 bis 79
Jahren.



Nach der Versorgung mit Bandagen und Orthesen bestätigen Patienten:

80 %

spürbar gesteigerte Lebensqualität**

72 %

mehr Mobilität**

61 %

weniger Schmerzmittel**

25 %

verzichten auf OPs**

18 %

verzichten auf Schmerzmittel**

* JoHM_03_2017; Fuchs & Prütz 2017, S. 67 reSp

** Allensbach-Patientenumfrage 2023 (Allensbach Archiv, IfD-Umfrage 10658) im Auftrag der Eurocom:
www.eurocom-info.de/studien/patientenum-frage-ifd-allensbach/

GenuTrain® BEI KNIESCHMERZ

Der Klassiker bei vielen Problemen rund ums Knie ist die Kniebandage GenuTrain von Bauerfeind. Sie vereint Expertise, höchste Qualität und jahrelange Erfahrung in einem Produkt.

**Schnell gegen Schmerz,
langfristig wirksam.**



2 von 3 Patienten haben weniger Schmerzen¹

GenuTrain lindert gezielt den Schmerz

9 von 10 Patienten empfinden mehr Stabilität¹

GenuTrain stabilisiert das Kniegelenk spürbar

9 % weniger Belastung¹

GenuTrain entlastet das Kniegelenk

bei jedem Schritt entsteht weniger Druck auf das Tibiaplateau

2° nachgewiesene Reduktion der max.

Knieadduktion der Gelenkachse¹

GenuTrain beeinflusst die neuromuskuläre Steuerung des Gangs

verbesserte Sensomotorik²

GenuTrain steigert die Propriozeption

bei Patienten mit Defizit in der Gelenkwahrnehmung und bewirkt eine neuromuskuläre Stabilisierung des Kniegelenks

¹ Schween R, Gehring D, Gollhofer A (2015); Immediate Effects of an Elastic Knee Sleeve on Frontal Plane Gait Biomechanics in Knee Osteoarthritis. PLOS | one 10(1): e0115782. doi:10.1371/journal.pone.0115782

² Sell S, Zacher J, Lack S; Proprioception decline in the osteoarthritic knee; Z. Rheumatol, 52: 150-155; (1993) Gait Biomechanics in Knee Osteoarthritis. PLOS | one 10(1): e0115782. doi:10.1371/journal.pone.0115782

GenuTrain®

Aktivierung, Entlastung und Stabilisierung
des Kniegelenks

Hilfsmittelnummer

05.04.01.0006






Omega+ Pad



Train-Gestrick



integrierte An- und Ausziehhilfe

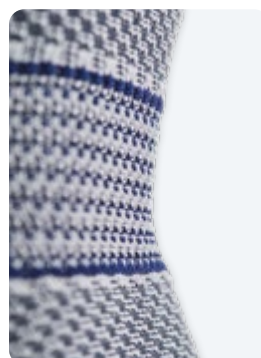

komfortable Kniekehle

NEU Comfort-Größen mit
optionalem Haftband

INDIKATIONEN

- Tendopathie, Tendomyopathie, Ansatzligamentose, Meniskopathie, chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- rezidivierender Gelenkerguss
- Gonarthrose / Arthritis (Gelenkverschleiß / Gelenkentzündung)
- Prävention / Rezidivprophylaxe
- Instabilitätsgefühl

IN STUDIEN^a BELEGT

- 89 % der Probanden empfinden **mehr Kniegelenkstabilität**
- messbar **weniger Belastung auf das Kniegelenk**
- nachweisliche **Reduzierung von Schmerzen** beim Tragen der Bandage
- **Steigerung des Leistungsvermögens** und der **koordinativen Fähigkeiten** des Kniegelenks

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- nachweisliche Entlastung und neuromuskuläre Stabilisierung des Kniegelenks
- Massage der Menisken durch seitliche Meniskusflügel trägt zur Schmerzminderung bei
- Hoffa Spots wirken auf die Hoffa-Region, die den Stoffwechsel fördert und Entzündungsprozesse reguliert
- komplexe Stimulation von Mechanosensoren verbessert Koordination, Sensomotorik und physiologische Bewegungsabläufe
- Verbesserung der Beweglichkeit dank der Massage verspannter Muskeln, Sehnen und Faszien
- beschleunigt die Resorption von Ödemen und Ergüssen und unterstützt den Heilungsverlauf bei Reizzuständen
- die atmungsaktiven Wirkzonen und besonders weichen Komfortzonen des anatomisch geformten Train-Gestricks ermöglichen höchsten Tragekomfort bei optimaler medizinischer Wirkung

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

optional:

Silikonisierung:
Standard-Größen (schwarz, titan),
Comfort-Größen (beige, schwarz, titan)

Haftband:
Comfort-Größen
(beige, schwarz, titan)

Maßanfertigung (beige, titan):
Haftband, Klettverschluss

Hinweis: bei Maßanfertigung zusätzliche Hilfsmittelnr.: 05.99.99.0001

Ersatzteile / Zusätze:

Noppenhaftband (titan),
siehe Seite 119 und Preisliste

GRÖßE		0	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Standard	Umfang oben (cm)	35–38	38–41	41–44	44–47	47–50	50–53	53–56	56–59	110 4120 60*▲ 00°
	Umfang unten (cm)	25–28	28–31	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46	46–49	
Comfort	Umfang oben (cm)				47–50	50–53	53–56	56–59	59–62	110 4120 60*▲ 08°
	Umfang unten (cm)				34–37	37–40	40–43	43–46	46–49	

* = Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan

▲ = (0) ohne Silikonisierung, ohne Haftband, (7) Haftband Noppe 5 cm (nur Comfort-Größen), (9) Silikonisierung (nur titan und schwarz, Comfort-Größen auch in beige)

° = Größe (0–7)

^a Schween R., Gehring D., Gollhofer A. »Immediate effects of an elastic knee sleeve on frontal plane gait biomechanics in knee osteoarthritis«. PLoS One. 2015 Jan 26;10(1):e0115782. doi: 10.1371/journal.pone.0115782. eCollection 2015.
Sole et al. BMC Musculoskeletal Disorders (2021) 22:655; https://doi.org/10.1186/s12891-021-04540-x.
Sole et al. BMC Musculoskeletal Disorders (2022) 23:560; https://doi.org/10.1186/s12891-022-05488-2.

experts.bauerfeind.com/genutrain

Maßanfertigung: Die genauen Messpunkte entnehmen Sie bitte dem Maßbestellblock oder dem Maßbestellblatt auf Seite 133.



▲ 14 cm
● 12 cm

Bei 30° Flexion
im Stehen messen.

GenuTrain® A3

**Aktivierung und Stabilisierung
bei komplexen Kniebeschwerden
wie Gonarthrose**

Hilfsmittelnummer

05.04.01.2006



neue Zwei-Komponenten-Pelotte



Pelotte mit genoppten Funktionszonen und Friktionspunkten



Dehnungszone im Unterschenkelbereich



Silikonisierung am oberen Bandagenrand



ergonomisch geformte Anziehhilfen

INDIKATIONEN

- Gonarthrose und Arthritis
- chronische, posttraumatische und postoperative Reizzustände
- Tendopathie, Ansatzligamentosen und Tendomyopathie
- Gonalgie bei funktioneller Instabilität infolge muskulärer Dysbalancen
- rezidivierender Gelenkerguss
- Prävention/Rezidivprophylaxe
- Patellalateralisation

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Zwei-Komponenten-Pelotte mit Funktionszonen wirkt auf typische Beschwerdeareale ein; die in der Bewegung entstehende Funktionsmassage zielt darauf ab, Schmerzen im medialen Kapselbandbereich zu lindern
- Aktivierung der gelenkstabilisierenden Muskulatur und Verbesserung der Koordination durch die Stimulation von Mechanosensoren in der Haut und im Muskel-Sehnenübergang
- Wechsedruckmassage in der Bewegung fördert die Ödemableitung und Resorption von Ergüssen und unterstützt Heilungsprozesse
- kraftsparendes An- und Ablegen der Bandage dank ergonomisch geformter Anziehhilfen und aufgrund einzigartiger Dehnungszone im Unterschenkelbereich
- Höchstmaß an Tragekomfort dank druckminimierter Randbereiche, besonders weicher Kniekehle und feuchtigkeitsregulierender Eigenschaften des Train-Gestricks
- positionssicherer Sitz durch anatomische Passform und Punktsilikonisierung am oberen Bandagenrand
- GenuTrain A3 steht für Anti Arthros Algos

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan

Ausführungen: rechts, links


GRÖÖE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang oben (cm)	35–41	39–46	42–51	47–56	51–60	55–64	59–68	110 4125 20*0 +0°
Umfang unten (cm)	27–29	29–32	32–35	35–38	38–41	41–44	44–47	

* = Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

° = Größe (1–7)

experts.bauerfeind.com/genutrain-a3

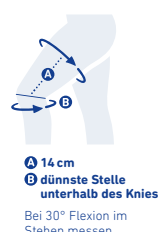

GenuTrain® P3

Zentrierung und Sicherung der Patella durch einstellbaren Korrekturzügel

Hilfsmittelnummer

23.04.05.0011

NEU



Patellaplatte mit Korrekturzügel



Korrekturzügel individuell einstellbar



Detonisierungspelotte



Silikonisierung am oberen Bandagenrand



Kunststoffstäbe mit An- und Ausziehhilfe



KNIE, OBERSCHENKEL
UND HÜFTE

INDIKATIONEN

- Reizzustände des Kniegelenks (Femoropatellares Schmerzsyndrom, Chondropathia patellae, Chondromalazie, Patellaspitzen-syndrom / Jumper's Knee, Runner's Knee)
- Retropatellararthrose
- Patellalateralisation
- Patellasubluxation / Patella-luxation; posttraumatisch
- Patellahochstand (Patella alta)
- postoperativ (z. B. nach Patella-stabilisierung)
- Instabilitätsgefühl

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- der in die Pelotte integrierte Korrekturzügel führt schützend die Patella und wirkt lateralem Abdriften oder Herausdrehen entgegen; durch den einzigartigen Verlauf des Zügels kann seine Wirkung präzise und individuell eingestellt werden
- Friktionspunkte auf distalem Pelottenabschnitt wirken auf die Hoffa-Region, die den Stoffwechsel fordert und Entzündungsprozesse reguliert
- Detonisierungspelotte fördert eine leichte Entspannung des Tractus iliotibialis; der laterale Zug auf die Patella kann so minimiert werden
- Verbessern der Propriozeption durch Pelottenflügel mit proximaler Verlängerung bis zum gelenkstabilisierenden Musculus vastus medialis
- beschleunigte Resorption von Ödemen und Ergüssen dank medizinisch wirksamer Kompression und Wechseldruckmassage in der Bewegung
- GenuTrain P3 steht für Permanent Patella Protection

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan

Ausführungen: rechts, links

optional:

Maßanfertigung (beige, titan): mit Haftband

Hinweise:

- bei Maßanfertigung zusätzliche Hilfsmittelnummer: 23.99.99.0001
- Punktsilikonisierung am oberen Rand für positionssicheren Sitz

NEU

Größensystem,
Messpunkte,
Silikonisierung
serienmäßig

GRÖÖSE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang oben (cm)	35–41	39–46	42–51	47–56	51–60	55–64	59–68	110 4140 40°0 +0°
Umfang unten (cm)	27–29	29–32	32–35	35–38	38–41	41–44	44–47	

* = Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

° = Größe (1–7)

Maßanfertigung: Die genauen Messpunkte entnehmen Sie bitte dem Maßbestellblock oder dem Maßbestellblatt auf Seite 134.



GenuTrain® S

Verstärkte Stabilisierung des Kniegelenks durch seitliche Gelenkschienen

Hilfsmittelnummer

23.04.03.0014

Pelotte



seitliche Gelenkschienen

INDIKATIONEN

- Gelenkinstabilitäten (leichten bis mittleren Grades)
- Gonarthrose
- Arthritiden (z. B. rheumatoide Arthritis)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Stabilisierung und Führung des Kniegelenks erfolgt durch seitliche Gelenkschienen in Kombination mit dem zirkulär umlaufenden Gurtsystem an Ober- und Unterschenkel
- flach anliegend und individuell einstellbar durch Zuggurte mit Mikroklett
- hoher Tragekomfort dank atmungsaktivem, feuchtigkeitsabsorbierendem Train-Gestrick mit spezieller Kniekehle und druckminimierten Randbereichen
- Förderung der neuromuskulären Gelenkstabilisierung durch die Ansprache der Propriosensoren
- Schmerzminderung durch Wechseldruckmassage der parapatellaren Weichteilstrukturen in der Bewegung dank Train-Gestrick und viskoelastischer Pelotte
- beschleunigte Resorption von Ödemen und Ergüssen durch Kompressions- und Massageeffekt des anliegenden elastischen Gestricks

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan**Ausführungen:** rechts, links**optional:**

Maßanfertigung (titan): mit Haftband

Hinweis:

bei Maßanfertigung zusätzliche Hilfsmittelnummer: 23.99.99.0001

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 119 und Preisliste

ANWENDUNGSHINWEISE

- die anatomisch geformten Gelenkschienen sind thermoplastisch anformbar und können an die individuelle Anatomie angepasst werden

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang oben (cm)	38–41	41–44	44–47	47–50	50–53	53–56	56–59	110 4130 40°0 +0°
Umfang unten (cm)	28–31	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46	46–49	

* = Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan
 + = Ausführung (6) rechts, (7) links
 ° = Größe (1–7)

Maßanfertigung: Die genauen Messpunkte entnehmen Sie bitte dem Maßbestellblock oder dem Maßbestellblatt auf Seite 135.



A 14 cm
 B 12 cm


Bei 30° Flexion im Stehen messen.

GenuTrain® S Pro

**Verstärkte Stabilisierung des Kniegelenks
durch seitliche Gelenkschienen und Limitierung
des Bewegungsumfangs**

Hilfsmittelnummer


23.04.03.1045

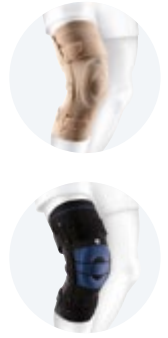


KNIE, OBERSCHENKEL
UND HÜFTE



Pelotte

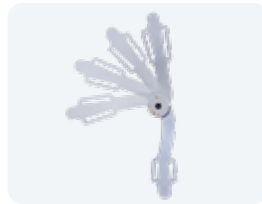

Limitierung der Knieflexion

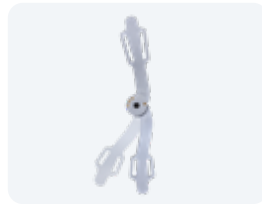

Limitierung der Knieextension

INDIKATIONEN

- Gelenkinstabilitäten (leichten bis mittleren Grades)
- Gonarthrose
- Arthritiden (z. B. rheumatoide Arthritis)
- Meniskusverletzungen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- therapiegerechte Einschränkung des Bewegungsumfangs über limitierbare Gelenke
- Stabilisierung und Führung des Kniegelenks erfolgt durch seitliche Gelenkschienen in Kombination mit dem zirkulär umlaufenden Gurtsystem an Ober- und Unterschenkel
- Förderung der neuromuskulären Gelenkstabilisierung durch die Ansprache der Propriozeptoren
- beschleunigte Resorption von Ödemen und Ergüssen durch Kompressions- und Massageeffekt des anliegenden Kompressionsgestricks
- flach anliegend und individuell einstellbar durch Zuggurte mit Mikrolett
- Schmerzminderung durch Wechsellagerung der parapatellaren Weichteilstrukturen in der Bewegung dank Train-Gestrick und viskoelastischer Pelotte

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan

Ausführungen: rechts, links

optional:

Maßanfertigung (titan): mit Haftband

Hinweis:

bei Maßanfertigung zusätzliche Hilfsmittelnummer: 23.99.99.0001

ANWENDUNGSHINWEISE

- Flexion und Extension des Kniegelenks können unabhängig voneinander limitiert werden (Flexion: 30°, 60°, 90°) (Extension: 20°)
- die anatomisch geformten Gelenkschienen sind thermoplastisch anformbar und können an die individuelle Anatomie angepasst werden

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang oben (cm)	38–41	41–44	44–47	47–50	50–53	53–56	56–59	110 4135 00*0 +0°
Umfang unten (cm)	28–31	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46	46–49	

* = Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan
+ = Ausführung (6) rechts, (7) links
° = Größe (1–7)

Maßanfertigung: Die genauen Messpunkte entnehmen Sie bitte dem Maßbestellblock oder dem Maßbestellblatt auf Seite 136.



A 14 cm
B 12 cm

Bei 30° Flexion im Stehen messen.

GenuPoint®

Gezielte Entlastung und Führung der Patellasehne

Hilfsmittelnummer

05.04.01.1023



Pelotte mit Friktionsnoppen

INDIKATIONEN

- Reizzustände im Bereich der Patellasehne (Femoropatellares Schmerzsyndrom, Chondropathia patellae, Patellaspitzensyndrom / Jumper's Knee)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Führung und Entlastung der Patellasehne durch punktgenaue Kompression
- die viskoelastische Pelotte mit speziellen Druckpunkten massiert typische Schmerz-areale, lindert Beschwerden und verbessert die Koordination
- dynamische Druckanpassung und bedarfsgerechte Kompression durch individuell einstellbaren Gurt
- maximale Bewegungsfreiheit dank anatomischer Form

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: schwarz, titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

IN STUDIE^A BELEGT

- **weniger Schmerzen und verbesserte Propriozeption**

GRÖÖE	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Umfang (cm)	28 – 30	30 – 35	35 – 44	120 4240 00*0 00°

* = Farbe (7) schwarz, (8) titan

° = Größe (1–3)

^A Astrid J. de Vries; Inge van den Akker-Scheek; Svenja L. Haak; Ron L. Diercks; Henk van der Worp; Johannes Zwerver
Effect of a patellar strap on the joint position sense of the symptomatic knee in athletes with patellar tendinopathy
Journal of Science and Medicine in Sport; 20, 11, S. 986–991, 2017




SofTec® Genu

Aktive und passive Stabilisierung des Kniegelenks – ideal für die Langzeit-Therapie

**namentliche
Verordnung
mit Kostenvoranschlag**



KNIE, OBERSCHENKEL
UND HUFTE

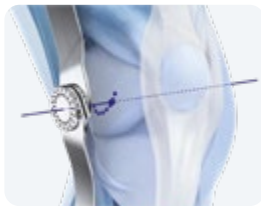

Selbstfindung der individuellen Kompromissdrehachse



stabiler, zirkulärer Kraftschluss nach dem Vier-Punkt-Prinzip



seitliche Gelenkschienen mit limitierbaren Gelenken



Pelotte mit integriertem Korrekturzügel

INDIKATIONEN

- Ruptur des vorderen und / oder hinteren Kreuzbandes (ACL / PCL) zur konservativen Therapie, prä- und zeitversetzten postoperativen Versorgung, Langzeit-Rehabilitation und bei chronischer Insuffizienz
- schwere und / oder komplexe Instabilitäten (traumatisch, degenerativ; z. B. »Unhappy Triad«)
- Seitenbandverletzungen
- funktionelle Instabilitäten, z. B. Defizite der neuromuskulären Steuerung, Non-Coper
- zur Begrenzung des Bewegungsumfanges (z. B. nach Meniskusrefixation oder Meniskusimplantation)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Stabilisierung des Kniegelenks nach dem Vier-Punkt-Prinzip durch zugfesten, unelastischen Gestrickanteil, seitliche Gelenkschienen und Klettgurte
- Vermeidung schädigender Zwangskräfte auf das Kniegelenk durch die dreidimensionale Einstellung der Orthesengelenke auf die individuelle Kompromissdrehachse
- Selbstfindung der individuellen Kompromissdrehachse
- korrekte Positionierung der SofTec Genu am Bein mittels Patella-Aussparung in der Pelotte
- wirkt dem Abdriften der Patella entgegen über einen in der Pelotte integrierten Korrekturzügel
- dauerhaft sicherer Sitz dank anatomisch geformter Klettzuggurte

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: schwarz, titan

Ausführungen: rechts, links

optional:

Gelenkschutz (Sportschutz) zum sicheren Tragen auf dem Spielfeld

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 119 und Preisliste

IN STUDIEN^A BELEGT

- **mechanische und neuromuskuläre Stabilisierung des Kniegelenks**

ANWENDUNGSHINWEISE


- die Gelenke sind für Extension und Flexion in 10°-Abständen limitierbar

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang oben (cm)	38–42	41–45	44–49	48–53	51–57	54–60	
Umfang Mitte (cm)	29–32	32–35	35–38	38–41	41–44	44–47	122 4600 10*0 +0°
Umfang unten (cm)	28–32	31–35	34–38	36–40	39–43	42–46	
Gelenkschutz für Kontaktsportarten							129 4601 1070 000

* = Farbe (7) schwarz, (8) titan
+ = Ausführung (6) rechts, (7) links
° = Größe (1–6)

^A Strutzenberger, G., et al., Effect of Brace Design on Patients with ACL-Ruptures; Int. J. Sports Med. 2012; 33: 934–939
Focke A., Steingrebe H., Möhler F., Ringhof S., Sell S., Potthast W. and Stein T. (2020) Effect of Different Knee Braces in ACL-Deficient Patients. Front. Bioeng. Biotechnol. 8:964. doi: 10.3389/fbioe.2020.00964

experts.bauerfeind.com/softec-genu

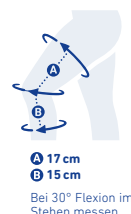

A 17 cm
B 15 cm
Bei 30° Flexion im Stehen messen.

SecuTec® Genu

Stabilisierung mit Limitierung des Bewegungsumfangs bei komplexen Knieverletzungen

Hilfsmittelnummer

23.04.03.3011





einfaches Anlegen von vorn

Wadengurtverstellung

Ober- / Unterschenkelrahmen
sind in verschiedenen Größen
kombinierbarZ-Schiene mit weichen
Schieneingurten

adaptive Wadenschelle

INDIKATIONEN

- Ruptur des vorderen und / oder hinteren Kreuzbandes (ACL / PCL)
- nach Bandoperationen / Bandplastiken
- schwere und / oder komplexe Instabilitäten (traumatisch, degenerativ, z. B. »Unhappy Triad«)
- Seitenbandverletzungen
- zur Begrenzung des Bewegungsumfangs des Kniegelenks (z. B. nach Meniskusrefixation oder Meniskusimplantation)
- Patellafraktur (konservativ und postoperativ)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- umfassende Stabilisierung sowohl einer ACL-, PCL- oder komplexen Bandverletzung bieten sechs Gurte in Kombination mit dem Hartrahmen nach dem Vier-Punkt-Prinzip
- Gelenk werkzeuglos limitieren und ruhigstellen, Winkel von außen ablesbar
- anatomisch korrekter und sicherer Sitz
- extrem leicht, schlank und stabil dank spezialveredelter Leichtmetall-Legierung des Rahmens

VERSION FRONTAL:

- kann vom Patienten leicht frontal aufgelegt und fixiert werden, somit verringert sie den Stress auf das verletzte Knie
- hohe Rotationsstabilität mittels anatomisch geformter Rahmenkonstruktion, inkl. Tibiakantenform

VERSION DORSAL:

- die adaptive Wadenschelle mit selbstregulierendem Neigungswinkel passt sich der Kontur des Wadenmuskels für höchsten Tragekomfort und sicheren Sitz an

ANWENDUNGSHINWEISE

Flexion und Extension werden unabhängig voneinander limitiert:

- Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- Ruhigstellung kann in 0°, 10°, 20°, 30°, 45° realisiert werden

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: blau, grün (nur frontal)

Ausführungen: frontal oder dorsal, rechts oder links

Kombination von Ober- und Unterschenkelteil in zwei unterschiedlichen Größen möglich (max. Differenz: zwei Größen)
Lieferung als Bausatz

Ersatzteile:

siehe Seite 120 und Preisliste

IN STUDIE^A BELEGT

- **besonders positionsstabil in der Bewegung**

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.	FRONTAL	DORSAL
Umfang oben (cm)	38–42	41–45	44–49	48–53	51–57	54–60	60–72	Kauforthese	121 4610 1**0 +0°	121 4655 1050 +0°
Umfang unten (cm)	28–32	31–35	34–38	36–40	39–43	42–46	46–51	Rückführorthese	121 4614 0**0 +0°	121 4656 1050 +0°
KOMBINATIONEN								teilmontiert	121 4619 0**0 +0°	121 4657 1050 +0°
proximale Rahmengröße	1	2	3	4	5	6	7	Bausatz	121 4647 0**0 +^>	121 4658 1050 +^>
distale Rahmengröße	1–3	1–4	1–5	2–6	3–7	4–7	5–7			

* = Farbe (05) blau, (23) grün
+ = Ausführung (6) rechts, (7) links
° = Größe (1–7)

^ = proximale Rahmengröße
> = distale Rahmengröße

^A Berschin et al.; Achsentreue und Achsenmigration von Knieorthesen in der Praxis, MOT. S 69–79, 2003.



SecuTec® Genu Flex

Stabilisierung mit Limitierung des Bewegungsumfangs
bei komplexen Knieverletzungen

Hilfsmittelnummer

23.04.03.3084





verlängerbare Gelenkschenkel

ein- und ausklickbare
KettengliederRahmen passt sich in der
Bewegung an die Beinanatomie anwerkzeuglos limitierbare
Extension und Flexion

flach ausgepolstert

INDIKATIONEN

- Ruptur des vorderen und / oder hinteren Kreuzbandes (ACL / PCL)
- nach Bandoperationen / Bandplastiken
- schwere und / oder komplexe Instabilitäten (traumatisch, degenerativ, z. B. »Unhappy Triad«)
- Seitenbandverletzungen
- zur Begrenzung des Bewegungsumfangs des Kniegelenks (z. B. nach Meniskusrefixation oder Meniskusimplantation)
- zur konservativen Therapie oder Langzeit-Rehabilitation
- funktionelle Instabilitäten

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- zuverlässige Stabilisierung nach dem Vier-Punkt-Prinzip durch Kombination von teilflexibler Rahmenkonstruktion mit unelastischen Gurten
- positionssicherer Sitz und hoher Tragekomfort dank teilflexiblem Rahmen, der sich in der Bewegung an die Anatomie des Beines anpasst
- adaptive Passform auch während des Therapieverlaufs durch ein- und ausklickbare Kettenglieder am Ober- und Unterschenkel
- optimale Größeneinstellung dank verlängerbarer Gelenkschenkel
- bewährte Gelenkkonstruktion für werkzeugloses Limitieren oder Ruhigstellen
- unauffälliger und sicherer Schutz im aktiven Alltag durch leichte, flach anliegende Konstruktion mit weichen Mikrofaserpolstern

ANWENDUNGSHINWEISE

Flexion und Extension werden unabhängig voneinander limitiert:

- Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- Ruhigstellung kann in 0°, 10°, 20°, 30°, 45° realisiert werden

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farbe: blau

Ausführungen:
rechts oder links

Ersatzteile:
siehe Seite 120 und Preisliste

ÜBERZEUGEND IM DUO

SecuTec® Genu Flex

VenoTrain® soft S

Das Multitalent für
leichtes Anlegen

- + effektive postoperative und posttraumatische Ödemkontrolle zum Schwellungsabbau



GRÖÖSE	1	2	3	4	5	ARTIKEL-NR.	
Umfang oben (cm)	37–45	45–53	53–61	61–69	69–81	Kauforthese	121 4678 1050 +0°
Umfang unten (cm)	28–36	32–40	36–44	40–48	44–52	Rückführorthese	121 4677 1050 +0°

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links
° = Größe (1–5)

experts.bauerfeind.com/secutec-genu-flex



A 17 cm
B 15 cm

Bei 30° Flexion im
Stehen messen.

GenuTrain® OA

Gezielte Entlastung und Stabilisierung für mehr Aktivität bei Gonarthrose

Hilfsmittelnummer

23.04.04.1021



innovatives Entlastungssystem



Boa® Fit System



3D-Netzgestrick



druckfreie Beugezone



große An- und Ausziehhilfen

INDIKATIONEN

- mediale oder laterale Gonarthrose
- Instabilität (mediolateral)
- Knorpelknochenläsion unikompartmentell
- Zustand nach Knorpelchirurgie bzw. Knorpelaufbau bei notwendiger einseitiger postoperativer Entlastung
- nach einseitigen Meniskusläsionen
- Osteochondrosis dissecans (postoperativ)
- Bone Bruise (Knochenödem des medialen Femur condylus / Tibiaplateau)

IN STUDIEN^A BELEGT

- **reduziert spürbar Schmerzen und erhöht die schmerzfreie Gehstrecke**
- **steigert die Gelenkstabilität**
- **intensiviert körperliche Aktivität**
- **erhöht die Mobilität**
- **verbessert die Lebensqualität**

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- spürbare Entlastung der schmerzhaften Knie- seite durch das innovative Entlastungs- und Stabilisierungssystem mit seinen umlaufenden Bändern nach dem Drei-Punkt-Prinzip
- einfaches Dosieren der Entlastung über den Drehverschluss des Boa® Fit Systems – ohne weitere Betätigung von Klettverschlüssen
- mehr Aktivität dank leichtem Gewicht und sicherer Positionierung am Bein
- flexible Gelenkschiene, Doppel-8-Gurt und 3D-Netzgestrick adressieren die Sensomotorik und fördern natürliche Bewegungsabläufe
- angenehmes Tragen auch über längeren Zeitraum durch das atmungsaktive 3D-Netzgestrick und die druckfreie Beugezone in der Kniekehle
- einfaches An- und Ablegen ermöglichen zwei leicht zu fassende Schlaufen am jeweils oberen und unteren Rand der Orthese

ANWENDUNGSHINWEISE

- werkzeugfreie Anformung der Gelenkschiene für die individuelle Anpassung an das Patientenbein
- einfache Handhabung des Boa® Fit Systems:
 - Drehverschluss öffnen, um die Bänder zu entspannen und die Orthese an- und abzulegen
 - Drehverschluss schließen und drehen zur Regulierung der Schmerzentlastung

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + werkzeugfreie Anpassung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: schwarz-blau

Ausführungen:

- rechts medial / links lateral: für mediale Entlastung am rechten Bein; oder für laterale Entlastung am linken Bein
- links medial / rechts lateral: für mediale Entlastung am linken Bein; oder für laterale Entlastung am rechten Bein

optional:

Limitierungs-Set in 3 Größen
siehe Seite 120 und Preisliste


GRÖßE	1	2	3	4	5	ARTIKEL-NR.
Umfang oben (cm)	40–47	47–52	52–58	57–65	60–72	121 4165 0070 +0°
Umfang unten (cm)	28–34	34–39	39–43	43–46	46–50	

+ = Ausführung (6) rechts medial / links lateral, (7) links medial / rechts lateral

° = Größe (1–5)

^A Stetter, B.J.; et al.; Osteoarthritis. J. Clin. Med. 2024, 13, 1535, <https://doi.org/10.3390/jcm13061535>

experts.bauerfeind.com/genutrain-oa

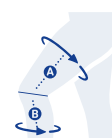

A 17 cm
B 15 cm

Bei 30° Flexion
im Stehen messen.

SecuTec® OA


Entlastung und Stabilisierung bei Gonarthrose mit Beinachsenfehlstellung

Hilfsmittelnummer


23.04.04.2010



eine Orthese für beide Entlastungsrichtungen, keine Verengung der Kniebreite

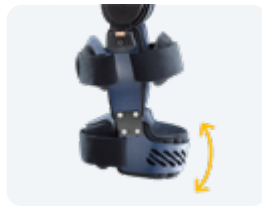

anpassbare Wadenschelle

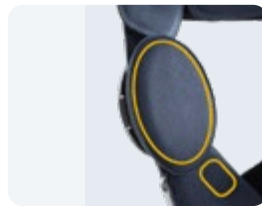

Gelpolster mit Einschubkeilen



Kombination von unterschiedlichen Größen für ideale Passform



leichtes An- und Ablegen durch Schnellverschlüsse

INDIKATIONEN

- mediale oder laterale Gonarthrose / Arthritis (mittel bis schwer)
- Zustand nach Knorpeltransplantation
- nach Meniskusrefixation
- Ruptur vorderes / hinteres Kreuzband (ACL / PCL) mit Beinachsenfehlstellung

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Korrektur und Entlastung nach dem Drei-Punkt-Prinzip (varus und valgus)
- Stabilisierung nach dem Vier-Punkt-Prinzip (Schublade; anterior / posterior)
- ideale Passform und Kraftübertragung durch anpassbare Wadenschelle und verstellbaren Unterschenkelrahmen
- hoher Tragekomfort dank leichtem Aluminiumrahmen
- leichtes An- und Ablegen durch Schnellverschlüsse
- für exakte Anpassung sorgen die anatomisch geformten Kondylengelpolster mit Einschubkeilen

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: blau

Ausführungen: rechts, links

optional:

Limitierungs-Set

Kombination von Ober- und Unterschenkelteil in zwei unterschiedlichen Größen möglich (max. Differenz: zwei Größen)
Lieferung als Bausatz

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 121 und Preisliste

IN STUDIE^A BELEGT

- **reduziert dauerhaft die Schmerzen (-40 %) und steigert die Gelenkstabilität**

ANWENDUNGSHINWEISE

- individuelle Anpassung am distalen Rahmen zur Varus- oder Valguseinstellung (jeweils 25°) mit 3 mm Inbusschlüssel
- Flexion und Extension werden unabhängig voneinander limitiert (Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) (Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°)
- bewegungseinschränkend bis fixierend durch Gelenklimitierungen (separat bestellbar)


GRÖÖSE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang oben (cm)	38–42	41–45	44–49	48–53	51–57	54–60	60–72	121 4690 0050 +0° Kauforthese
Umfang unten (cm)	28–32	31–35	34–38	36–40	39–43	42–46	46–51	121 4691 0050 +0° Rückführorthese
KOMBINATIONEN								121 4692 0050 +^> Bausatz
proximale Rahmengröße	1	2	3	4	5	6	7	
distale Rahmengröße	1–3	1–4	1–5	2–6	3–7	4–7	5–7	

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links
° = Größe (1–7)

^ = proximale Rahmengröße
> = distale Rahmengröße

de Jong LD, et al., PLoS One 20(9): e0330157. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0330157>, 2025

experts.bauerfeind.com/secutec-oa

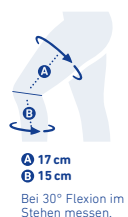

A 17 cm
B 15 cm
Bei 30° Flexion im Stehen messen.

MOS-Genu

Korrektur und Stabilisierung nach komplexen Knieverletzungen oder bei Umstellungsosteotomie

Hilfsmittelnummer

23.04.03.3012 short

23.04.04.2006 long



lange Ausführung



Einstellung in Varus- und Valgusrichtung



Varus- /Valguseinstellung bis 12° möglich

INDIKATIONEN

Konservativ:

- Kreuz- und Seitenbandverletzungen
- komplexe Instabilitäten
- Entlastung des jeweiligen Gelenkteiles bei O- und X-Bein-Gelenkverschleiß

nach OP MOS-Genu kurz:

- Bandoperationen / Bandrekonstruktionen
- Meniskusnaht- und Meniskusersatz-Operationen (Meniskusimplantation)

nach OP MOS-Genu lang:

- nach Achskorrektur am Schienbein (tibiale Umstellungsosteotomie)
- nach komplexen Bandrekonstruktionen
- in Einzelfällen für gelenknahe Knochenbrüche (Frakturen)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- die Varus- / Valgus-Einstellung wirkt im Drei-Punkt-Prinzip und entlastet das entsprechende Knie-Kompartiment bzw. Kollateralband und korrigiert die Beinachsenstellung
- die Knieorthese basiert auf dem bekannten Vier-Punkt-Prinzip und wirkt so einer vorderen Schublade entgegen
- die Rahmenkonstruktion stabilisiert das Kniegelenk gegen varisierende bzw. valgusierende Kräfte, als Langversion mit längerem Hebel
- sehr gute Kraftübertragung und sicherer Sitz dank großer Auflagefläche der Gurte
- monozentrisches Gelenk mit physiologisch optimiertem Gelenkdrehpunkt reduziert mögliche Zwangskräfte der Orthese auf das Kniegelenk auf ein Minimum

ANWENDUNGSHINWEISE

- Varus- /Valguseinstellung bis 12° möglich.
- die monozentrischen Gelenke sind in 10°-Schritten für Flexion und Extension limitierbar
- Größenbestimmung der MOS-Genu-Knieorthese: das Bein des Patienten im 30°-Beugungswinkel lagern und die Bestimmung des Beugungswinkels mit dem MOS-Genu-Goniometer überprüfen. Das Ausmessen der M-L-Kniebreite erfolgt in Höhe der Femurkondylen mit dem MOS-Genu-Orthometer (ohne Druck). Die Größe der Orthese wird im Sichtfenster abgelesen. Bei geteilter Größenanzeige muss der Zustand der Schwellung oder einer Atrophie sowie die Breite des anderen Kniegelenks berücksichtigt werden.

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: blau

Ausführungen: short, long, rechts, links

optional: Poplitealgurt wirkt einer Hyperextension entgegen

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 121 und Preisliste

IN STUDIE^A BELEGT

- **30 % weniger Belastung** auf der medialen Seite

GRÖßE	1	2	3	4	5	ARTIKEL-NR.
Max. Kniebreite (mm)	85 – 95	95 – 105	105 – 115	115 – 125	125 – 135	121 4660 405# +0°

= Ausführung (1) short, (2) long
+ = Ausführung (6) rechts, (7) links
° = Größe (1 – 5)

^A Kutzner et al., The effect of valgus braces on medial compartment load of the knee joint – in vivo load measurements in three subjects, Journal of Biomechanics 44, 1354–1360, 2011

experts.bauerfeind.com/mos-genu



GenuLoc®

Ruhigstellung des Kniegelenks – gestreckt
oder in einem voreingestellten Beugewinkel

Hilfsmittelnummer

23.04.01.0014



KNIE, OBERSCHENKEL
UND HUFTE



Kniekehlenpolster



vorgeformte Aluminiumschienen



seitliche Kunststoffstäbe

INDIKATIONEN

- präoperative, postoperative, posttraumatische Ruhigstellung
- konservative Behandlung von Patellafrakturen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Kniebeugewinkel anpassbar über dorsale Aluminiumschienen
- geringere Ödembildung dank herausnehmbarem Kniekehlenpolster
- seitliche, stabilisierende Kunststoffstäbe passen sich an dem eingestellten Kniebeugewinkel automatisch an und gewährleisten eine gute Passform

ANWENDUNGSHINWEISE

- die Aluminiumschienen sind auf 20°-Kniewinkel vorgeformt
- Universalgröße, eine Ausführung für rechtes und linkes Knie

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv

BESTELLOPTIONEN

Farben: schwarz

Größe: Universal

GRÖÖE

In einer Universalgröße erhältlich

ARTIKEL-NR.

120 4320 0070 000


CoxaTrain®

Stabilisierung und Schmerzreduktion im Hüftgelenk
für mehr Aktivität bei Coxarthrose

Hilfsmittelnummer

23.05.01.0006



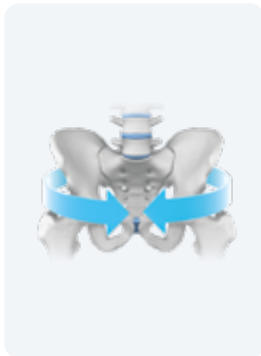

Stabilisierung

Gluteal Pad – massiert
TriggerpunkteTrochanter Pad – massiert in der
BewegungGelenkschiene werkzeugfrei
montier- und anformbarhöhenverstellbare
Gelenkschiene

INDIKATIONEN

- Coxarthrose (Kellgren-Lawrence-Score 2 – 4)
- muskuläre Dysbalance Lenden-Becken-Hüft-Region
- muskuläre Probleme nach Gelenkoperationen der Hüfte
- Impingement des Hüftgelenks
- Instabilität des Hüftgelenks (nach T.E.P., nach Revisions-eingriff)
- Instabilitätsgefühl in der Hüfte
- Lockerung der Hüftprothese, wenn OP nicht möglich
- chronische Reizzustände (z. B. Bursitis i. V. m. Arthrose)
- chronische Tendinopathie i. V. m. Arthrose

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- schmerzlindernder Ausgleich muskulärer Dysbalancen in der Lenden-Becken-Hüft-Region (LBH) bei Bewegung mit positivem Einfluss auf das Gangbild:
 - durch Stabilisierung des Beckens und Entlastung der Iliosakralgelenke (ISG)
 - durch Massageeffekt der dorsalen ISG-Frictionspelotten auf die lokalen Bandstrukturen und die anliegende Muskulatur
 - durch Friktionsmassage des Trochanter Pads, das sich beim Gehen zyklisch auf und ab bewegt
 - durch Triggerpunkt-Massage des Gluteal Pads
- stabilisierende Führung durch die laterale Gelenkschiene
- hohe Patienten-Compliance
- einfaches Anlegen ohne viel Kraftaufwand durch umgelenkte Zuggurte und praktische Fingertaschen / -schlaufen

- dreistufige Einschränkung der Hüftbewegung in Flexion und Extension durch optionale Gelenklimitierungsstifte (60°, 75°, 90°)
- beidseitige Versorgung möglich (Bestellung für die noch zu versorgende Seite notwendig)

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + werkzeugfreie Anpassung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Ausführungen:

Gelenk short < 170 cm Körpergröße
Gelenk long > 170 cm Körpergröße

optional:

Limitierungsstifte

Hinweis:

- in Einzelfällen kann es sein, dass statt einer gemessenen Größe »short« eine »long« Gelenkschiene besser passt oder umgekehrt

Ersatzteile:

siehe Seite 121 und Preisliste

IN STUDIEN^a BELEGT


- **reduziert Nachschmerzen**
- **reduziert Schmerzen beim Gehen**
- **erhöht die Mobilität**
- **verbessert das Gangbild**

ANWENDUNGSHINWEISE

Gezielte Anpassung durch

- werkzeugfreies Schränken der Gelenkschiene an die jeweilige Anatomie
- höhenverstellbare Oberschenkelbandage über die Gelenkschiene
- individuell einstellbare Zuggurte der Beckenbandage zur Stabilisierung

BECKEN- BANDAGE	GRÖßE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
	Umfang Becken (cm)	85 – 95	95 – 105	105 – 115	115 – 125	125 – 135	135 – 145	122 2581 2080 00°
	° = Größe (1 – 6)							
OBER- SCHENKEL- BANDAGE	GRÖßE	1	2	3				ARTIKEL-NR.
	Umfang Oberschenkelmitte (cm)	43 – 53	53 – 63	63 – 73				122 2582 1080 +0°
	+ = Ausführung (6) rechts, (7) links ° = Größe (1 – 3)							
GELENK	GRÖßE	SHORT	LONG					ARTIKEL-NR.
	Körpergröße (cm)	< 170 cm	> 170 cm					122 2584 100# 000
	# = Ausführung (1) short, (2) long							

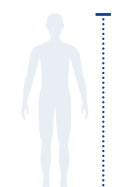

SofTec® Coxa

Erhöhte Stabilisierung und Führung des Hüftgelenks

Hilfsmittelnummer

23.05.01.1003



monozentrisches Gelenk für Abduktion / Adduktion und Flexion / Extension



dreiteilige Beckenfassung aus Kunststoff



höhenverstellbares Gelenk



Gelenkschutz



beidseitige Versorgung

INDIKATIONEN

- Luxation
- totalendoprothetischer Eingriff
- totalendoprotethischer Revisionseingriff
- Hüftkopfresektion (Girdlestone-Situation)
- Hüftspacer bei zweizeitiger Wechseloperation
- Coxarthrose (mittelschwerer bis schwerer Grad)
- Instabilitäten

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Orthese fixiert den Gelenkkopf sicher in der Gelenkpfanne durch die Kombination aus
 - der sicheren Positionierung der Beckenfassung auf den Beckenkämmen
 - der individuellen Anpassung der seitlichen Oberschenkelfassung
 - der indikationsgerechten Adaption des Orthesengelenks
- lässt die Versorgung in der individuell erforderlichen Adduktions- oder Abduktionsstellung zu und begrenzt Extension und Flexion dank des mehrdimensionalen, monozentrischen Orthesengelenks
- sicheres Operationsergebnis durch die Limitierung vorgegebener Bewegungen
- einfache und korrekte Positionierung der Orthese durch im Gestrück integrierte, anatomisch vorgeformte Beckenfassung
- individuell zuschneidbare Gestrückteile und Zuggurte an Becken- und Beinfassung
- optimale Führung des Hüftgelenks und anatomisch korrekter Sitz dank monozentrischem Orthesengelenk

ANWENDUNGSHINWEISE

- individuell und parallel zum Hüftdrehpunkt einstellbar
- das Gelenk ist für Extension und Flexion in 10°-Abständen zwischen -10° und +90° limitierbar

- Adduktion und Abduktion sind stufenlos zwischen -6° und +6° einstellbar
- das Gelenk ist in ungekröpfter und gekröpfter Version erhältlich und kann sowohl für die Versorgung des rechten als auch des linken Hüftgelenks verwendet werden
- beidseitige Versorgung möglich (Bestellung Erweiterungsset notwendig)
- die Anpassung der Orthese ist direkt am Krankenbett auch am liegenden Patienten möglich

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen:

Gelenk gekröpft / Gelenk ungekröpft, gleiche Ausführung für rechts und links

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 122 und Preisliste

GRÖßE	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	75 – 95	95 – 115	115 – 135	122 252# 0080 00°

= Ausführung (4) Gelenk gekröpft (für Damen), (5) Gelenk ungekröpft (für Herren)
° = Größe (1 – 3)

experts.bauerfeind.com/softec-coxa



MyoTrain®

Einstellbare Kompression zur Behandlung von Muskelverletzungen des Oberschenkels

Hilfsmittelnummer

KEINE

Keine Erstattung durch die Krankenkasse, außer mit Einzelfallgenehmigung.



optional einsetzbar:
Funktionspelotte und kleine
Akutpelotte

INDIKATIONEN

- Muskelverhärtung
- Muskelzerrung
- Muskelprellung (sogenannter Pferdekuss)
- Muskelfaserriss
- Muskelfaserbündelriss, bspw. der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur (Hamstrings)
- Verletzung der Fascia lata
- posttraumatische, postoperative Reizzustände
- Prävention / Rezidivprophylaxe

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- wirkt nach den Prinzipien eines Muskelaufhängeverbandes mit Kompression auf die verletzte Stelle
- Einstellung der Kompression durch Klettgurtsystem und zwei frei einsetzbare Pelotten
- gezielte Wirkung mittels Akutpelotte unmittelbar nach der Verletzung, um Blutungen zu hemmen und Hämatome einzugrenzen
- flächige Kompression dank großer Funktionspelotte minimiert Schwellungen und mindert Beschwerden
- Höchstmaß an Tragekomfort und Positionssicherheit dank anatomischem Formgestrick, silikonisiertem Hafrand und druckreduziertem Randbereich
- reguliert den Muskeltonus und beugt Rezidivverletzungen vor

DAS BAUERFEIND-PLUS

+ einfache Handhabung

BESTELLOPTIONEN


Farben: titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang oben (cm)	44 – 48	48 – 52	52 – 56	56 – 60	60 – 64	64 – 68	68 – 72	110 3250 0080 00°
Umfang unten (cm)	32 – 35	35 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 47	47 – 50	50 – 53	

° = Größe (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/myotrain

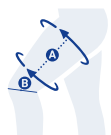

30 cm
2 cm

Bei 30° Flexion im
Stehen messen.



Spinoval[®] Mum

WIRBELSÄULE UND HALS

FÜR EINE GEZIELTE **RÜCKENTHERAPIE**

INDIKATIONSTABELLE WIRBELSÄULE UND HALS

PRODUKT	LumboTrain® straight / waisted	SacroLoc®	LordoLoc®	LumboLoc®	LumboLoc® Forte	Spinova® Mum NEU	Spinova® Stabi Classic	Spinova® Support Plus
								
PRODUKTMERKMAL	Aktivierung, Entlastung und Stabilisierung der Lenden- wirbelsäule	Stabilisierung des Beckens und gezielte Entlastung der Iliosakral- gelenke	Stabilisierung und Entlastung der Lenden- wirbelsäule mit Zuggurten	Anatomisch (körpergerecht) formgestrickte Lendenwirbel- säulen-Orthese mit muskelakti- vierender und ent- lastender Wirkung	Verstärkte Stabi- lisierung und Entlastung der Lendenwirbel- säule mit variab- lem Gurtsystem	Entlastung der LWS und Stabilisierung der ISG während und nach der Schwangerschaft (Rückbildung)	Moderate Stabilisierung der Lenden- wirbelsäule durch Korsettstäbe	Stabilisierung der Lendenwirbel- säule mit anatomi- sch geformter Rückenpelotte
FUNKTIONSELEMENT								 abrüstbar
HILFSMITTELNUMMER*	23.14.03.2011** 23.14.03.2012***	23.11.01.1002	23.14.03.1007	23.14.03.0012	23.14.02.0006	23.14.02.0023	23.14.04.0023	23.14.02.2010
SEITENZAHL	74	76	80	81	82	78	86	87
INDIKATIONEN								
Allgemeine Schmerzzustände im LWS-Bereich (akut und chronisch)	•		•	•		•		
(pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom / Lumbo- ischialgie mit muskulären Ausfällen bei Bandscheiben- protrusionen / Prolaps	mittel schwer				•	•	•	•
Degeneration / muskuläre Insuffizienz der Wirbel- säule	leicht mittel schwer		•	•	•	•		•
Zustand nach Prolaps (konservativ)	•						•	•
Zustand nach Diskektomie, Prolaps (post-OP)	•				•	•	•	•
Facettensyndrom / Arthrose	mittel schwer			•	•		•	•
lumbale Deformitäten					•	•		•
Ligamento-Tendomyopathien					•			
Spondylolyse / Spondylolisthese	Grad I Grad II Grad III				•		•	•
Zustand nach Spondylodese / Kyphoplastie (post-OP)								•
lumbale Spinalkanalstenosen mit Paresen (konservativ, postoperativ)								•
Foraminastosen								
Osteoporose								•
Erkrankung des Iliosakralgelenks, ISG-Syndrom, -Arthrose, -Instabilität, -Blockade		•				•		
Beckenringinstabilität, z.B. Symphysensprengung / -lockerung		•				•		
Myalgien, Tendopathien der Beckenregion		•						
Gefügestörung nach Spondylodese im Übergang L5-S1		•						
Konservative Behandlung nach Beckenfrakturen		•						
Wirbelkörper- frakturen	Entlastung Vorderkante Entlastung Hinterkante							•
Osteochondrose								
Tumore (Metastasen)								
Wirbelfrakturen (LWS)								
schmerzhafter Rundrücken								
Schmerzzustände im HWS-Bereich	mittel schwer							
Schleudertrauma / Blockierung								

* Angaben zur Rezeptierung gelten nur in Deutschland ** LumboTrain straight (gerader Schnitt) *** LumboTrain waisted (taillierter Schnitt)

BAUERFEIND RÜCKENTHERAPIE

EXZELLENT VERSORGEN, EXPERTISE ZEIGEN

	AKTIVIEREN	STABILISIEREN	ENTLORDOSIEREN	LORDOSIEREN / STÜTZEN	IMMOBILISIEREN
S0	SacroLoc® Seite 76				
LSO	LumboTrain® straight / waived Seite 74	LordoLoc® Seite 80	LumboLoc® Forte Seite 82		
		LumboLoc® Seite 81			
		Spinova® Mum Seite 78			
		Spinova® Stabi Classic Seite 86	Spinova® Unload Classic Seite 88		Spinova® Immo Seite 91
			Spinova® Unload Plus Seite 89	Spinova® Support Plus Seite 87	Spinova® Immo Plus Seite 90
			SecuTec® Lumbo Seite 93	SecuTec® Dorso Seite 92	SofTec® Lumbo Seite 94
TLSO	Spinova® Osteo Seite 95				SofTec® Dorso Seite 96
CO		CerviLoc® CerviLoc® S Seite 97			

LumboTrain® Rückenbandage

bis zu **52 %**


weniger Schmerzmittel¹ (Dosiseinheit pro Tag im Versuchszeitraum von drei Wochen im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Bandage)

0 %

keiner der Patienten zeigte Hinweise auf Muskelatrophie²

bis zu **13 %**

höhere Rückenmuskelaktivität nach drei Wochen Tragezeit² (im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Bandage)

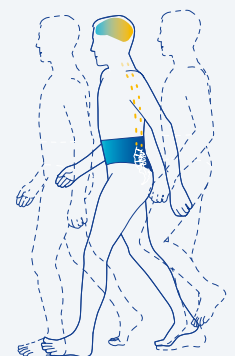

Quelle:

¹ Valle-Jones J, C, Walsh H, O'Hara J, O'Hara H, Davey N, B, Controlled trial of a back support (LumboTrain) in patients with non specific low back pain; Curr. Med. Res. Opin., (1992), 12, 604

² Anders, C., Hubner, A.: Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain, PLoS ONE 14(1): e0211042. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211042>; 2019.



Die schwangere Frau trägt die Rückenorthese Spinoва® Mum.

LumboTrain® straight

LumboTrain® waisted

Aktivierung, Entlastung und Stabilisierung
der Lendenwirbelsäule

Hilfsmittelnummer

straight **23.14.03.2011**

waisted **23.14.03.2012**






lumbale Pelotte mit flexiblen und rückfedernden Noppen




individuell positionierbare Pelotte unterstützt eine gezielte Wirkung



praktische Handschlaufen für leichtes An-/Ablegen

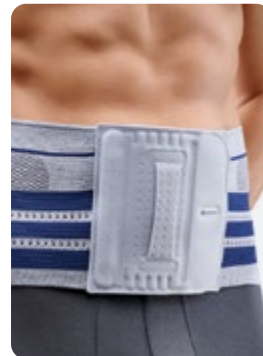

perforierter Verschluss für hohe Atmungsaktivität

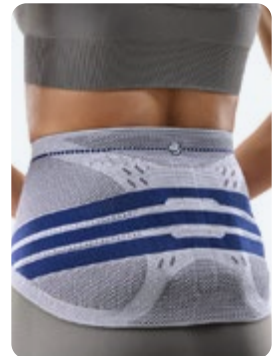

LumboTrain waisted, tailliert mit hohem Beinausschnitt

INDIKATIONEN

- allgemeine Schmerzzustände im LWS-Bereich (akut und chronisch)
- degenerative Erkrankung der Lendenwirbelsäule, z. B. Osteochondrose, Spondylarthrose, lumbale Deformitäten, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten
- Zustand nach Prolaps (konservativ / postoperativ)
- Zustand nach Diskektomie

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- gezielte Schmerzlinderung während der Bewegung wird ermöglicht durch die Wechseldruckmassage von Gestrick und viskoelastischer Pelotte
- die lumbale Pelotte wirkt mit flexiblen und rückfedernden Noppen gezielt auf Schmerzpunkte ein
- leichtes, kraftsparendes Anlegen mittels praktischer Handschlaufen
- stabilisiert und entlastet lumbal durch die aufrichtende Wirkung der zirkulären Kompression
- LumboTrain waisted mit taillierter Form und hohem Beinausschnitt

ANWENDUNGSHINWEISE

- Pelotte kann nach Bedarf individuell positioniert werden

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Versionen:
straight (gerader Schnitt)
waisted (taillierter Schnitt)

Ersatzteile / Zusätze:
siehe Seite 122 und Preisliste


IN STUDIE^A BELEGT

- **13 % höhere Rückenmuskelaktivität nach drei Wochen Tragezeit**
- **bis zu 69 % weniger Schmerzen** im Vergleich zur Kontrollgruppe

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130	130 – 145	110 841# 6080 00°

= Ausführung (0) straight, (1) waisted

° = Größe (1 – 7)

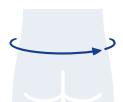

^A Anders, C., Hübner, A.

Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
PLoS ONE 14(1): e0211042. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211042>; 2019


SacroLoc®

Stabilisierung des Beckens und gezielte
Entlastung der Iliosakralgelenke

Hilfsmittelnummer

23.11.01.1002



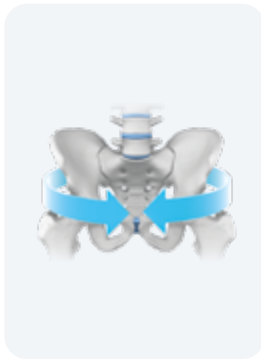

ISG-Stabilisierung



dorsale ISG-Pelotten



Zuggurtsystem

elastisches Netzmaterial mit
patentierter Gurtführungindividuell einstellbare
Zuggurte

INDIKATIONEN

- Erkrankungen der Iliosakralgelenke (ISG-Syndrom, ISG-Arthrose, ISG-Instabilität)
- Beckenringinstabilität, z. B. Symphysensprengung und -lockerung
- Iliosakralgelenk-Blockierung (akut und prophylaktisch)
- Gefügestörung nach Spondylodesen (im Übergang L5–S1)
- Myalgien und Tendopathien der Beckenregion
- konservative Behandlung nach Beckenfrakturen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- entlastet sofort das Becken und die Iliosakralgelenke durch zirkuläre Kompression mittels individuell einstellbarer Zuggurte
- gezielte Friktionsmassage und Stabilisierung des ISG-Bereichs durch präzise positionierbare dorsale Pelotten
- einzigartiger Tragekomfort, auch im Sitzen – durch atmungsaktive Netzmaterialien
- seitliche Umlenkschlaufen für hohe Kräfteinleitung bei geringem Kraftaufwand
- hohe Patientencompliance, da die Orthese unauffällig unter der Kleidung getragen werden kann
- das rigide Zuggurtsystem stabilisiert zirkulär, die Nutation (Relativbewegung) des Sakrum wird eingeschränkt, die Bänder werden entlastet und Schmerzen gelindert

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ersatzteile / Zusätze:
siehe Seite 122 und Preisliste

IN STUDIEN^a BELEGT


- **32 % Schmerzreduktion**
- **58,3 % verbesserte aufrechte Haltung** durch Patienten empfunden

ANWENDUNGSHINWEISE

- Eignung und Anwendung der Orthese während der Dauer einer Schwangerschaft ist ärztlich im Einzelfall abzustimmen
- Pelotten können nach Bedarf individuell positioniert werden

GRÖÖE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang Becken (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130	130 – 140	120 8416 2080 00°

° = Größe (1 – 7)

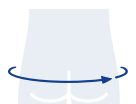

^a Sichting, F., Bütner, Ch.; Effects of a Pelvic Compression Belt on Balance Control in Patients with chronic Sacroiliac Joint Pain; OrthopädieTechnik; 01,19, 18-21; 2019
Hammer et al. Pelvic Belt Effects on Health Outcomes and Functional Parameters of Patients with Sacroiliac Joint Pain, PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0136375 August 25, 2015.

Spinova® Mum

Entlastung der Lendenwirbelsäule und
Stabilisierung der Iliosakralgelenke während und
nach der Schwangerschaft (Rückbildung)

Hilfsmittelnummer


23.14.02.0023

NEU





intuitives Verschließen

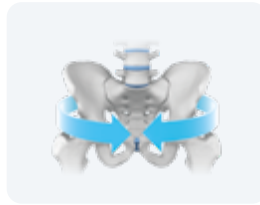Anheben des Bauches und
Entlordosierung der Wirbelsäule

Stabilisierung des Beckens

mitwachsender
BauchverschlussPelotten zur Entspannung der
Iliosakralgelenke

INDIKATIONEN

Lendenwirbelsäulen-Indikationen:

- Schmerzzustände und Instabilitäten im Becken- / Lendenwirbelsäulen-Bereich
- Lumbalgien
- radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom
- akute oder chronische Lumboischialgie
- mittelgradige lumbale Deformität (z. B. Hyperlordose)
- Prolaps

Andere Indikationen:

- Symphysenlockerung
- Symphysensprengung
- ISG-Schmerzen
- Erkrankungen der Iliosakralgelenke (ISG-Syndrom, ISG-Arthrose, ISG-Instabilität)
- ISG-Blockierung (akut und prophylaktisch)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- entlastet die Lenden-Becken-Hüftregion während und nach der Schwangerschaft
- dorsal unterstützten Korsettstäbe die Lendenwirbelsäule und Pelotten wirken entspannend auf die Iliosakralgelenke (ISG)
- einzigartiges Gurtsystem hebt den Bauch leicht an und stabilisiert das Becken
- besonders weicher Bauchverschluss passt sich an wachsenden Umfang an
- hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht und atmungsaktives Netzmaterial
- Stabilisierung der Iliosakralgelenke und Symphyse durch zirkuläre Kompression mittels individuell einstellbarer Zuggurte

ANWENDUNGSHINWEISE

- Pelotten können nach Bedarf individuell positioniert oder entfernt werden
- durch seitliches Ziehen der Zuggurte wird der obere Gurt zur Bauchanhebung und Entlordosierung angesteuert
- durch frontales Ziehen der Zuggurte wird der untere Gurt zur Beckenkompression und Stabilisierung der Iliosakralgelenke und Symphyse eingestellt

DAS BAUERFEIND PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Therapie-App
NEU mit speziellen Übungen während und nach der Schwangerschaft

BESTELLOPTIONEN


Farbe: titan



GRÖÖE	1	2	3	4	ARTIKEL-NR.
Umfang Becken (cm)	80 – 90	90 – 100	100 – 115	115 – 130	122 8579 1000 00°

° = Größe (1 – 4)

experts.bauerfeind.com/spinova-mum

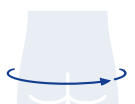


LordoLoc®

Stabilisierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule mit Zuggurten

Hilfsmittelnummer

23.14.03.1007

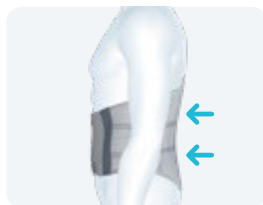

Stabilisierung und Entlastung




dorsal integrierte Korsettstäbe



elastische Zuggurte für individuell einstellbare Kompression



Verschlussverlängerung (Zubehör)



INDIKATIONEN

- allgemeine Schmerzzustände im LWS-Bereich (akut und chronisch)
- mittelstarke Degeneration / muskuläre Insuffizienz

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- richtet die Lendenwirbelsäule durch eingearbeitete Korsettstäbe auf
- verstärkte Stabilisierung durch individuell einstellbare Zuggurte
- trägt nicht auf dank leichter und flacher Konstruktion
- aktiviert die Bauch- und Rückenmuskulatur dank komprimierendem und elastischem Material

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 122 und Preisliste

GRÖÖE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	121 8500 0080 00°

° = Größe (1–6)



LumboLoc®


**Anatomisch (körpergerecht)
formgestrickte Lendenwirbelsäulen-
Orthese mit muskelaktivierender
und entlastender Wirkung**

Hilfsmittelnummer




23.14.03.0012



Stabilisierung und Entlastung

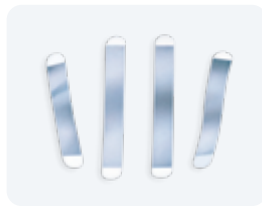

richtet Lendenwirbelsäule durch
dorsal eingearbeitete Korsettstäbe
auf

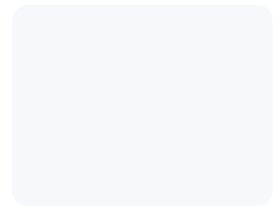

INDIKATIONEN

- allgemeine Schmerzzustände im LWS-Bereich (akut und chronisch)
- mittelstarke Degeneration / muskuläre Insuffizienz
- Facettensyndrom

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- richtet die Lendenwirbelsäule durch eingearbeitete Korsettstäbe auf
- stabilisiert und entlastet lumbal dank komprimierendem Train-Gestrick
- leichtes Anlegen mittels praktischer Handschlaufen
- passgenauer Sitz durch elastisches Material und anformbare Korsettstäbe

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + Train-Gestrick
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN


Farben: titan

IN STUDIE^A BELEGT

- im Durchschnitt **53 Schmerztage weniger** im Jahr

GRÖÖE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130	121 8400 3080 00°

° = Größe (1 – 6)

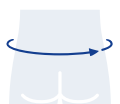

^A Roelofs et al. Lumbar Supports to Prevent Recurrent Low Back Pain among Home Care Workers, Annals of Internal Medicine 2007, 147, 685–692

LumboLoc® Forte

Verstärkte Stabilisierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule mit variablem Gurtsystem

Hilfsmittelnummer

23.14.02.0006



+ **einfache Handhabung**
über einen Gurt mit starker
Krafteinleitung



+ **Stabilisierung** durch
Korsettstäbe



ENTLORDOSIEREN



LORDOSIEREN



Verschlussverlängerung
(Zubehör)

+ **zwei Funktionen in einer Orthese:**
Indikationsgerechte Krafteinleitung durch höhenverstellbaren Funktionsgurt

INDIKATIONEN

- Facettengelenksarthrose
- mittelschwere Lumboischialgie mit leichten muskulären Ausfällen bei Bandscheibenprotrusionen / Prolaps
- mittelschweres (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- Spondylolyse / Spondylolisthese Grad 1
- mittelgradige lumbale Deformität
- Zustand nach Prolaps, z. B. postoperativ
- Ligamento-Tendomyopathie
- mittelstarke Degeneration / muskuläre Insuffizienz

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- verstärkte Stabilisierung durch individuell einstellbare Zuggurte
- richtet die Lendenwirbelsäule durch eingearbeitete Korsettstäbe auf
- höhenverstellbarer Funktionsgurt für indikationsgerechte Krafteinleitung
- zusätzliche Stabilisierung durch Pelotten für den Lendenbereich oder das Kreuzbein*

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

optional: bei der Verordnung wahlweise Lenden- oder Kreuzbein-pelotte mit angeben; diese muss separat bestellt werden

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 122 und Preisliste

* bitte die Art der Pelotte rezeptieren


IN STUDIE^A BELEGT

- **33 % weniger Schmerzen**
- **25 % erhöhte Mobilität**
- **89 % der Patienten empfinden eine gute Stabilisierung**

LumboLoc Forte

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	121 8403 0080 00°

° = Größe (1–6)

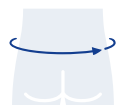

LumboLoc Forte Pelotten

GRÖßE	ARTIKEL-NR.
In einer Universalgröße erhältlich	121 840# 0050 001

= Ausführung (4) Kreuzbeinpelotte, (5) Lendenpelotte

^A Katzer, A., et al.; Wirkung einer Lumbalorthese auf das Schmerzempfinden und die Mobilität bei Patienten mit lumbalen Rückenschmerzen; Nicht interventionelle Studie; ORTHOCLINIC, Hamburg, 2021

Spinova®-System

Das modulare Spinova-System zur gezielten Therapie bei Indikationen der Lendenwirbelsäule.

Das Spinova-System mit acht unterschiedlichen Rückenorthesen ist ein innovatives Produktkonzept von Bauerfeind zur Verbesserung der Therapiemöglichkeiten bei vielen Indikationen im Bereich der Lendenwirbelsäule.

Die Spinova-Rückenorthesen folgen einem einheitlichen Konzept: Übergreifendes Funktionselement ist das komfortable Spinova-Netzmaterial. Durch zirkulär integrierte Korsettstäbe wirkt es wie ein Lindemann-Mieder. Über das variable Spinova-Zuggurtsystem mit der Rückenkassette wird die zirkuläre Kraft in therapeutisch relevanter Art eingeleitet. Das klassische Zuggurtsystem der Classic-Linie leitet eine moderate Kraft ein. Ergänzt wird das System durch indikationsspezifische

Spinova-Funktionselemente wie Rücken- und Bauchpelotte, Überbrückungsrahmen oder Schale.

Spinova-Lumbalorthesen kommen zum Einsatz, wenn eine Haltungskorrektur oder Entlastung der Lendenwirbelsäule notwendig ist. Sie können effektiv einer unphysiologischen Belastung der Wirbelsäule und ihrer Bandscheiben vorbeugen.

Sie sind vielfältig anpassbar und bieten dem Patienten einzigartigen Tragekomfort und einfaches Handling.

KLASSISCHES ZUGGURTSYSTEM

bei leichtem bis mittelschwerem Indikationsausmaß

- moderate Krafteinleitung
- individuell einstellbare Kompression
- komfortables, kraftsparendes Anlegen

Produktzuordnung:

- Spinova® Stabi Classic
- Spinova® Unload Classic



VARIABLES ZUGGURTSYSTEM

bei mittelschwerem bis schwerem Indikationsausmaß

- optimale Stabilität durch gezielte Krafteinleitung
- indikationsbezogen einstellbar
- variierbar hinsichtlich Richtung und Stärke
- für den Patient sicher reproduzierbar

Produktzuordnung:


- Spinova® Support Plus
- Spinova® Unload Plus
- Spinova® Immo Plus
- Spinova® Immo



Spinova®-System



variables Zuggurt-System,
Vorderansicht

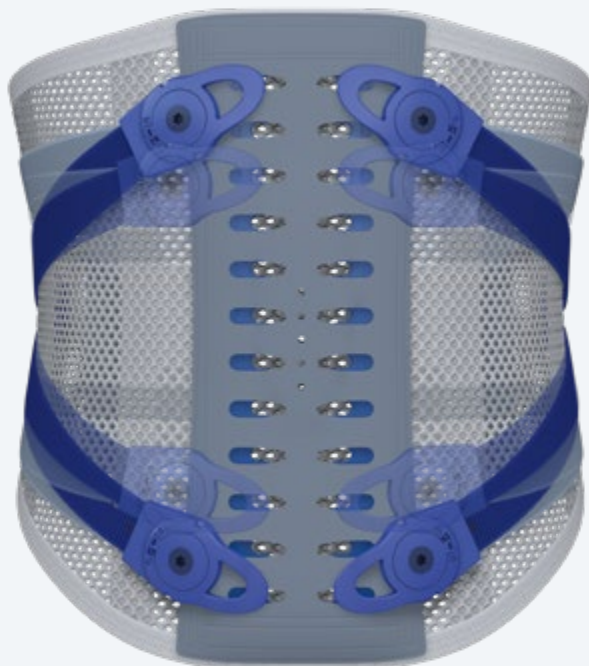

variables Zuggurt-System,
Rückansicht



Entlordosierung



Stabilisierung



Lordosierung

ÜBERGREIFENDE FUNKTIONSELEMENTE SPINOVA-SYSTEM



zirkulär integrierte
Korsettstäbe entsprechen
Lindemann- / Stabgittermieder



elastisches Spinova-
Netzmaterial, anatomisch
geformt, sehr atmungsaktiv




anatomisch geformter
Bauchverschluss mit Mikro-
klett und Fingertaschen für
leichtes An- / Ablegen

FUNKTIONSELEMENT KLASSTISCHES ZUGGURTSYSTEM



individuell festziehbare
klassische Klettgurte dienen
der moderaten Stabilisierung
der LWS

FUNKTIONSELEMENTE VARIABLES ZUGGURTSYSTEM

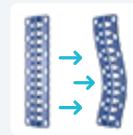


anformbare Rückenkassette
stabilisiert und korrigiert von
Kreuzbein bis untere BWS



parallel zur Wirbelsäule
angeordnete Rückenkassette
überbrückt Dornfortsätze,
kein Druck auf Wundbereich



individuell höhenverstellbare
Zuggurte sorgen für indika-
tionsgerechte Krafteinleitung

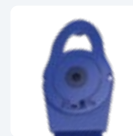

durch fest einstellbares
Drehmoment im Gurtschloss
kraftvoller, definierter Zug zur
Stabilisierung



patentiertes Spinova-
Zuggurtsystem sorgt für
dreifache Zugkraft



durch fest einstellbare
Gurtspannung und
Koppelverschluss
konstanter therapeutischer
Umfangsdruck

INDIKATIONSSPEZIFISCHES MEHRSTUFIGES THERAPIE-KONZEPT

Der modulare Aufbau der Spinoval-Lumbalorthesen ermöglicht durch die Entnahme und Zugabe von indikations-spezifischen Funktionselementen eine individuelle Therapie nach einem zweistufigen Behandlungsschema.

ERFAHREN SIE
MEHR UNTER
[player.vimeo.com/
video/158159586](https://player.vimeo.com/video/158159586)



INDIKATIONSSPEZIFISCHE FUNKTIONSELEMENTE AB- UND AUFRÜSTBAR

Überbrückungsrahmen



- anatomisch selbst anpassende, schwenkende Querstreben
- leicht anformbare, höhen-adaptierbare Aluminium-streben

Pelotten



- Rückenpelotte dient zur flächigen Überbrückung und Unterstützung der Lenden-lordose
- Bauchpelotte dient der erhöhten Kompression des Bauchraums

Schalensystem



- individuell anpassbar, durch gegenseitig verschiebbare Schalenhälften
- werkzeugfreies abrüsten der Schale durch Lösen der elastischen Bänder und Rändelschraube
- sofort einsetzbar durch voreingestellten Schalenumfang
- reduzierter Anpassungsaufwand durch zwei Schalengrößen (short 33 cm, standard 38 cm)

ZWEISTUFIGES BEHANDLUNGSKONZEPT

1. Stufe: Stabilisierungsphase

Zur effektiven postoperativen oder initial konservativen Korrektur der Segmente wird die Orthese zusammen mit den indikationsspezifischen Funktionselementen (Schale / Überbrückungsrahmen / Pelotten) verwendet.

2. Stufe: Mobilisierungsphase

Mit zunehmender Mobilisierung des Patienten werden die indikationsspezifischen Funktionselemente entfernt. Die in der Orthese verbleibenden Korsettstäbe erzielen eine externe Stützwirkung.

Ein erneutes Aufrüsten der Orthese ist bei Bedarf je nach Stabilitätsbedürfnis jederzeit möglich.



Spinova® Stabi Classic

Moderate Stabilisierung der
Lendenwirbelsäule durch Korsettstäbe

Hilfsmittelnummer

23.14.04.0023



zirkulär integrierte Korsettstäbe,
anformbar



Fingertaschen auf dem
Bauchverschluss

INDIKATIONEN

- Facettengelenksarthrose
- mittelschweres (pseudo-)radikuläres Lumbalsyndrom
- mittelschwere Lumboischialgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusion / Prolaps
- Zustand nach Prolaps (konservativ / postoperativ)
- Zustand nach Diskektomie
- Spondylolisthese Grad I

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- stabilisiert moderat die Lendenwirbelsäule und richtet durch integrierte zirkulär angeordnete Korsettstäbe auf
- der stützende Effekt entfaltet seine Wirkung bis in die untere Brustwirbelsäule
- leichtes Anlegen mittels großer Fingertaschen auf dem Bauchverschluss
- passgenauer Sitz durch verformbare Aluminiumstäbe
- die Länge der Zuggurte ist individuell einstellbar

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 124/125 und Preisliste

IN STUDIE^A BELEGT

- **Schmerzreduktion um 28,1 %**
- **Steigerung der Mobilität um 22,2 %**
- **stabilisierende Wirkung gut bis sehr gut urteilen 73 % der Patienten**

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 105	105 – 115	115 – 125	125 – 140	122 8561 1000 00°

° = Größe (1 – 6)

^A Katzer, A., et al.; Einfluss einer Lumbalorthese bei der konservativen Behandlung von Rückenbeschwerden, Nicht interventionelle Studie; ORTHOCLINIC, Hamburg

experts.bauerfeind.com/spinova-stabi-classic



Spinova® Support Plus

Stabilisierung der Lendenwirbelsäule
mit anatomisch geformter Rückenpelotte

Hilfsmittelnummer

23.14.02.2010



zirkulär integrierte Korsettstäbe,
anformbar




individuell adaptierbares
Zuggurtsystem zur regulierten
Krafteinleitung



abrüstbare Rückenpelotte



Bauchpelotte

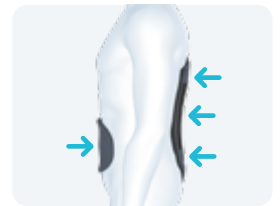

Lordosierung

INDIKATIONEN

- Wirbelfrakturen (LWS) mit Wirbelkörperschaden – Entlastung Wirbelvorderkante
- Spondylolyse / Spondylolisthese Grad II
- mittelschwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen / Prolaps
- lumbale Spinalkanalstenosen auch mit Paresen (konservativ, postoperativ)
- mittelschweres (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- schwere Degeneration / muskuläre Insuffizienz
- Zustand nach Prolaps (postoperativ / konservativ)
- Zustand nach Diskektomie
- Zustand nach Spondylodese / Kyphoplastie (einetagig / mehretagig)
- Osteoporose
- mittelschwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/ Arthrose

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- zirkulär eingearbeitete Korsettstäbe wirken stabilisierend und aufrichtend
- individuell adaptierbares Zuggurtsystem zur regulierten Krafteinleitung
- verstärkte Aufrichtung durch erhöhten Abdominaldruck mittels Bauchpelotte
- stützt die natürliche Lendenlordose durch großflächige, anatomisch geformte Rückenpelotte

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: short, standard

- short < 170 cm Körpergröße
- standard > 170 cm Körpergröße

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 124/125 und Preisliste

IN STUDIE^A BELEGT


- **gute Patientencompliance und hohes Stabilitätsempfinden**

GRÖÖSE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130	130 – 140	122 8542 100+ 00°

+ = Ausführung (0) standard, (1) short
° = Größe (1 – 7)

^A Rommelspacher, Y., et al.; Treatment with and without stabilizing lumbar spinal orthosis after one- or two-level spondylodese: A randomized controlled trial. Technol Health Care. 2020;28(5):541–549. doi: 10.3233/THC-191820.

experts.bauerfeind.com/spinova-support-plus

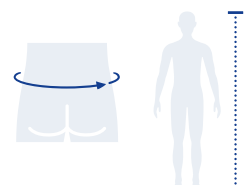

Spinova® Unload Classic

Moderate Entlordosierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule mit abrüstbarem Überbrückungsrahmen

Hilfsmittelnummer


23.14.02.1011





zirkulär integrierte Korsettstäbe, anformbar



abrüstbarer Überbrückungsrahmen

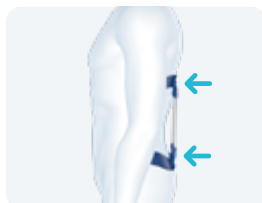

Entlordosierung



INDIKATIONEN

- stabile Wirbelfrakturen (LWS) mit Wirbelkörperschaden, Entlastung der Wirbelhinterkante
- Spondylolyse / Spondylolisthese Grad I–II
- mittelschwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen / Prolaps
- lumbale Spinalkanalstenosen auch mit Paresen (konservativ, postoperativ)
- mittelschweres (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- Facettensyndrom
- Zustand nach Diskektomie

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- zirkulär eingearbeitete Korsettstäbe wirken stabilisierend und aufrichtend
- korrigiert die Lendenlordose durch sich selbst anpassenden Überbrückungsrahmen
- Entlastung der Wirbelhinterkante der Lendenwirbelsäule

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: short, long

- short < 170 cm Körpergröße
- long > 170 cm Körpergröße


Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 124/125 und Preisliste

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 105	105 – 115	115 – 125	125 – 140	122 8562 100+ 00°

+ = Ausführung (1) short, (2) long

° = Größe (1 – 6)

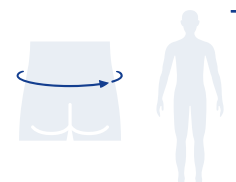

Spinova® Unload Plus

Entlordosierung und verstärkte
Entlastung der Lendenwirbelsäule mit
abrüstbarem Überbrückungsrahmen

Hilfsmittelnummer

23.14.04.2009



zirkulär integrierte Korsettstäbe,
anformbar




individuell adaptierbares
Zuggurtsystem zur regulierten
Krafteinleitung



abrüstbarer
Überbrückungsrahmen



Bauchpelotte

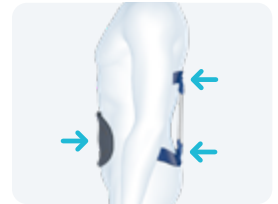

Entlordosierung

INDIKATIONEN

- Wirbelfrakturen (LWS) mit Wirbelkörperschaden – Entlastung Wirbelhinterkante
- Spondylolyse / Spondylolisthese Grad I–II
- schwerste lumbale Deformität bei Facettensyndrom / Arthrose
- schwerste Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen / Prolaps
- lumbale Spinalkanalstenosen auch mit Paresen (konservativ, postoperativ)
- schwerstes (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- Foraminastosen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- zirkulär eingearbeitete Korsettstäbe wirken stabilisierend und aufrichtend
- korrigiert die Lendenlordose durch selbst anpassenden Überbrückungsrahmen
- Entlastung der Wirbelhinterkante der Lendenwirbelsäule
- verstärkte Aufrichtung durch erhöhten Abdominaldruck mittels Bauchpelotte
- individuell adaptierbares Zuggurtsystem zur regulierten Krafteinleitung

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: short, long


- short < 170 cm Körpergröße
- long > 170 cm Körpergröße

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 124/125 und Preisliste

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130	130 – 140	122 8543 100+ 00°

+ = Ausführung (1) short, (2) long
° = Größe (1–7)

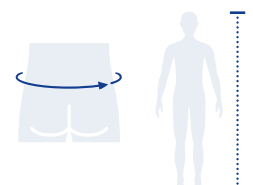

Spinova® Immo Plus

**Immobilisierung der Lendenwirbelsäule
mit Mobilisierungsfunktion durch
abrüstbare Schale**

Hilfsmittelnummer

23.14.02.2002



zirkulär integrierte Korsettstäbe,
anformbar



individuell adaptierbares
Zuggurtsystem zur regulierten
Krafteinleitung



individuell anpassbares
Schalensystem in zwei Größen



optionale Bauchpelotte für erhöhte
Kompression des Bauchraums



Immobilisierung

INDIKATIONEN

- Wirbelfrakturen (LWS) mit erheblichem Wirbelkörper-schaden – Entlastung Wirbel-vorder- und / oder -hinterkante
- Tumore (Metastasen)
- Zustand nach Spondylodese (einetagig / mehretagig)
- schwerstes (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- schwerste Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheiben-protrusionen / Prolaps
- lumbale Spinalkanalstenosen mit Paresen (konservativ, postoperativ)
- Foraminastosen
- Osteochondrose
- schwere Degeneration / muskuläre Insuffizienz
- schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom / Arthrose
- Zustand nach Prolaps (konservativ / postoperativ)
- Zustand nach Diskektomie
- Spondylolyse / Spondylolisthese Grad I–III

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- die Stabilisierung, Entlastung und Bewegungslimitierung der LWS erfolgt mittels einer rumpfumfassenden Schale mit zirkulärer Beckenfassung
- individuelle Einstellung und passgenauer Sitz dank zweiteiligem Schalensystem
- das Spinova-Zuggurtsystem bildet mit der Schale eine funktionelle Einheit; Umfangskräfte können individuell und indikationsgerecht eingeleitet werden
- verstärkte Entlastung der Wirbelsäule durch erhöhten Abdominaldruck mittels Bauchpelotte
- eingearbeitete Korsettstäbe stabilisieren zusätzlich und richten auf

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: short, standard

- short < 170 cm Körpergröße
- standard > 170 cm Körpergröße

Ersatzteile / Zusätze:


siehe Seite 124/125 und Preisliste

GRÖÖE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130	130 – 140	122 8541 100 + 00°

+ = Ausführung (0) standard, (1) short

° = Größe (1–7)

experts.bauerfeind.com/spinova-immo-plus

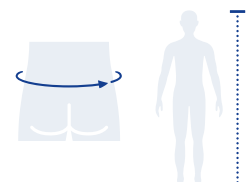

Spinova® Immo

Immobilisierung der Lendenwirbelsäule

Hilfsmittelnummer

23.14.01.0003





individuell anpassbares
Schalensystem



individuell adaptierbares
Zuggurtsystem zur regulierten
Krafteinleitung



Immobilisierung

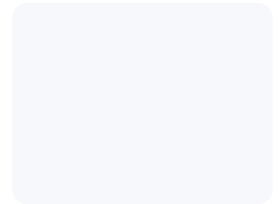

INDIKATIONEN

- Ruhigstellung der LWS (präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, entzündliche Erkrankungen)
- konservative Frakturbehandlung von einfachen und stabilen Frakturen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- die Stabilisierung, Entlastung und Bewegungslimitierung der LWS erfolgt mittels einer rumpfumfassenden Schale mit zirkulärer Beckenfassung
- individuelle Einstellung und passgenauer Sitz dank zweiteiligem Schalensystem
- das Spinova-Zuggurtsystem bildet mit der Schale eine funktionelle Einheit; Umfangskräfte können individuell und indikationsgerecht eingeleitet werden

DAS BAUERFEIND-PLUS

+ digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN


Farben: titan

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 124/125 und Preisliste

GRÖÖE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70 – 80	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 130	130 – 140	122 8540 1000 00°

° = Größe (1 – 7)

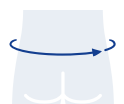

SecuTec® Dorso

**Entlordosierung und Entlastung
der Lendenwirbelsäule durch
Überbrückungsrahmen und
Korsettstäbe**

Hilfsmittelnummer

23.14.04.1009



abrüstbarer
Überbrückungsrahmen




anatomisch geformte
Korsettstäbe



integratives
Stabgittersystem



Verschlussverlängerung
(Zubehör)



INDIKATIONEN

- Spondylolisthese (mit rezidivierenden Lumboischialgien) Grad I–III
- Zustand nach Prolaps (z. B. postoperativ)
- Zustand nach Diskektomie
- Wirbelfrakturen (LWS) mit Wirbelkörperschaden
- Osteoporose
- mittlere bis schwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen / Prolaps
- schweres (pseudo-)radikuläres Lumbalsyndrom
- mittlere bis schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom / Arthrose
- lumbale Spinalkanalstenosen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- entlastet und richtet die LWS auf durch die Kombination aus Korsettstäben, anatomischem Formgestrick und Zuggurten
- wirkt entlordosierend durch einen Überbrückungsrahmen

DAS BAUERFEIND-PLUS

+ einfache Handhabung


BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ersatzteile / Zusätze:
siehe Seite 123 und Preisliste

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	75–85	85–95	95–105	105–115	115–125	125–135	121 8474 0080 00°

° = Größe (1–6)

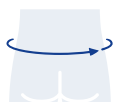

SecuTec® Lumbo

Entlordosierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule durch Überbrückungsrahmen

Hilfsmittelnummer

23.14.04.2012





abrüstbarer
Überbrückungsrahmen



Bauchpelotte



Verschlussverlängerung
(Zubehör)



INDIKATIONEN

- schwerste Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen / Prolaps
- schwerstes (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- Spondylolyse / Spondylolisthese Grad I–III
- mittlere bis schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom / Arthrose
- lumbale Spinalkanalstenosen
- mittlere bis schwere Degeneration / muskuläre Insuffizienz
- Wirbelfrakturen (LWS) mit Wirbelkörperschaden
- Zustand nach Prolaps, z. B. postoperativ
- Zustand nach Diskektomie

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- wirkt entlordosierend durch die Kombination aus abrüstbarem Überbrückungsrahmen, anatomischem Formgestrick und Zuggurten
- verstärkte Aufrichtung durch erhöhten Abdominaldruck mittels Bauchpelotte

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: short, long

- short < 170 cm Körpergröße
- long > 170 cm Körpergröße


Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 123 und Preisliste

GRÖÖE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	121 8460 108+ 00°

+ = Ausführung (1) short, (2) long
° = Größe (1–6)

experts.bauerfeind.com/secutec-lumbo

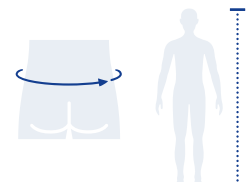

SofTec® Lumbo

Immobilisierung der Lendenwirbelsäule mit Mobilisierungsfunktion durch abrüstbare Schale

Hilfsmittelnummer

23.14.02.2013



Kurzversion der Halbschale
(29 cm)



Langversion der Halbschale
(35 cm)



kraftsparendes LPT-Gurtsystem



Bauchpelotte



Verschlussverlängerungen
(Zubehör)

INDIKATIONEN

- Spondylolyse / Spondylolisthese Grad II–III
- schwerste Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen / Prolaps
- schwerstes (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- degeneratives Facettensyndrom
- Zustand nach Prolaps (konservativ / postoperativ)
- Zustand nach Diskektomie
- Zustand nach Spondylodese / Kyphoplastie (einetagig / mehretagig)
- lumbale Spinalkanalstenosen
- Wirbelfrakturen (LWS) mit Wirbelkörperschaden
- Tumore (Metastasen)
- schwere Degeneration / muskuläre Insuffizienz

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Stabilisierung der Lendenwirbelsäule: durch die gezielte Kombination der verschiedenen Orthesenmodule (Formgestrick, CFK-Stäbe in zwei Stärken, Halbschale) lassen sich verschiedene Stabilisierungsgrade erzeugen
- komfortables, kraftsparendes Anlegen für den Patienten
- hoher Tragekomfort
- verstärkte Entlastung der Wirbelsäule durch erhöhten Abdominaldruck mittels Bauchpelotte

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: short, long, zwei Höhen

- dorsale Höhe der Kunststoffhalbschale: short 29 cm, long 35 cm
- Stabilisierung: short L5–S1, long L3–S1
- short < 170 cm Körpergröße
- long > 170 cm Körpergröße


Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 123 und Preisliste

GRÖÖE	1	2	3	4	HALBSCHALE	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	75–90	90–105	105–120		short	122 8480 0081 00°
	75–90	90–105	105–120	120–135	long	122 8480 0082 00°

° = Größe (1–4)

experts.bauerfeind.com/softec-lumbo

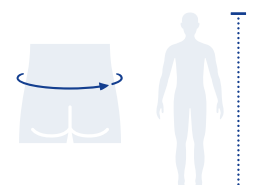

Spinova® Osteo

Stabilisierung und aktive Aufrichtung der
Wirbelsäule mit freiem Brust- und Bauchbereich

Hilfsmittelnummer


23.15.04.4027



freier Brust- und Bauchbereich



Beckenbandage

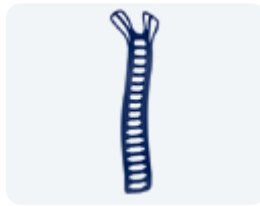

Reklinator



Gurtsystem



Wirkprinzip

INDIKATIONEN

- stabile, osteoporotische Wirbelkörperfrakturen
- Osteoporose
- schmerzhafter Rundrücken
- muskuläre Insuffizienz

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- aktive Aufrichtung zur Entlastung und Korrektur der Lendenwirbelsäule und Brustwirbelsäule sowie eine Bewegungseinschränkung in Sagittalebene
- dosierbare Aufrichtung durch spezielle Gurtführung, die individuelle Krafteinleitung ermöglicht
- richtet auf durch Aluminium-Reklinator in Verbindung mit Zuggurtung und Beckenbandage
- freier Bauch- und Brustbereich und hohe Positionsstabilität der Orthese dank tiefsitzender Beckenbandage
- adaptierbare Gurtführung durch höhenverstellbare dorsale Gurtfixierung
- kraftsparendes Anlegen mittels Hand- und Fingerschlaufen
- erhöhtes Stabilitätsgefühl durch gepolsterte seitliche Gurtkreuze

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + werkzeugfreie Anpassung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

optional:

bei Zwischenmaß kleineren Reklinator / größere Bandage wählen

fünf Standard-Größen:

S2, S3, M3, M4, L4

18 Größenkombinationen aus Reklinator (S–L) und Bandage (1–6)

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 124/125 und Preisliste

Spinova Osteo Reklinator teilmontiert

GRÖßE	S	M	L	ARTIKEL-NR.
Länge Rücken (cm)	50–58	59–67	68–76	122 8570 0000 00°

° = Größe (1) S, (2) M, (3) L

Hinweis: Bei Zwischengröße kleineren Reklinator wählen.

Spinova Osteo Beckenbandage teilmontiert

GRÖßE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Becken (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	122 8569 0000 00°



° = Größe (1–6)

Hinweis: Bei Zwischengröße größere Beckenbandage wählen.

Spinova Osteo

GRÖßE	S2	S3	M3	M4	L4	ARTIKEL-NR.
Länge Rücken (cm)	50–58	50–58	59–67	59–67	68–76	
Umfang Becken (cm)	80–90	90–100	90–100	100–110	100–110	122 8568 0000 0°°
°°-Nummer	12	13	23	24	34	

experts.bauerfeind.com/spinova-osteo

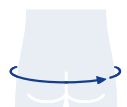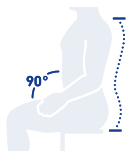

SofTec® Dorso

Erhöhte Stabilisierung der Brust- und Lendenwirbelsäule

Hilfsmittelnummer

23.15.04.3004



Schultergurte



Aluminium-Reklinator



integriertes Kreuz



Verschlussverlängerung
(Zubehör)

INDIKATIONEN

- konservative Frakturbehandlung (bis TH8) von einfachen und stabilen Frakturen
- Zustand nach Diskektomie
- Zustand nach Spondylodese
- Osteoporose
- Tumore (Metastasen) oder entzündliche Prozesse (Spondylitis)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- richtet die Wirbelsäule auf und stabilisiert den Oberkörper durch anpassbaren Aluminiumreclinator
- schränkt schädigende Rotationsbewegungen ein
- dosierbare Krafteinleitung und Aufrichtung durch Zuggurte
- am Reclinator montierbares Stabilisationskreuz aus Aluminium verstärkt die aufrichtende Wirkung der Orthese und schränkt endgradige Bewegungen zusätzlich ein (Extension / Flexion; Seitneigung)

DAS BAUERFEIND-PLUS

+ digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: short, long


- short < 170 cm Körpergröße
- long > 170 cm Körpergröße

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 123 und Preisliste

GRÖÖE	1	2	3	4	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	75–90	90–105	105–120	120–135	122 8490 008+ 00°

+ = Ausführung (1) short, (2) long
° = Größe (1–4)

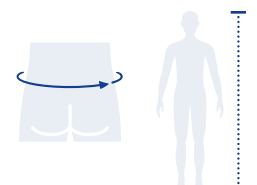

CerviLoc® | CerviLoc® S

Stabilisierung und Entlastung der Halswirbelsäule

Hilfsmittelnummer

23.12.03.0028

23.12.03.1018 (S)



seitliche Ansicht

INDIKATIONEN

- Schmerzzustände im HWS-Bereich (Cervikalsyndrom)
- Schleudertrauma

CerviLoc S

- schwere Schmerzzustände im HWS-Bereich (schweres Cervikalsyndrom)
- mittelschweres Schleudertrauma
- Blockierung

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- gezielte Entlastung der HWS
- höhere Unterstützung bietet die integrierte flexible Kunststoffverstärkung der CerviLoc S
- angenehm zu tragen durch weichen, anatomisch vorgeformten Schaumstoff mit einer Aussparung für das Kinn

ANWENDUNGSHINWEISE

- drei unterschiedliche Höhen mit jeweils zwei Umfangsgrößen berücksichtigen unterschiedlich ausgeprägte Halspartien

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige

WIRBELSÄULE
UND HALS

GRÖÖE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Höhe (cm)	6,5	8,5	10	6,5	8,5	10	120 959+ 0010 00°
Umfang Hals (cm)	32–38	34–40	34–40	36–44	36–44	38–48	

+ = Ausführung (0) CerviLoc, (1) CerviLoc S

° = Größe (1–6)

experts.bauerfeind.com/cerviloc | experts.bauerfeind.com/cerviloc-s





HAND, ELLENBOGEN UND SCHULTER

FÜR EINE GEZIELTE **HAND-, ELLENBOGEN- UND SCHULTER- THERAPIE**



RhizoLoc® OA

INDIKATIONSTABELLE

HAND-, ELLENBOGEN- UND SCHULTERTHERAPIE

PRODUKT	ManuTrain*	EpiTrain*	OmoTrain*	OmoTrain*S	ManuLoc*	ManuLoc* long	ManuLoc* long Plus
							
PRODUKTMERKMAL	Entlastung und Stabilisierung des Handgelenks	Entlastung und Stabilisierung des Ellenbogengelenks	Entlastung und Stabilisierung des Schultergelenks	Entlastung und Stabilisierung des Schultergelenks	Immobilisierung des Handgelenks	Immobilisierung des Handgelenks und Teile des Unterarms	Ruhigstellung der Hand mit abnehmbarer Fingerauflage
HILFSMITTELNUMMER*	05.07.02.0035	05.08.01.1000	05.09.01.0001	05.09.01.0004	23.07.02.4010	23.07.02.4048	23.07.02.1014
SEITENZAHL	102	111	113	114	103	104	105
INDIKATIONEN							
Reizzustände (posttraumatisch / postoperativ)	•	•	•	•	•	•	•
präoperativ					•	•	•
Prävention / Rezidivprophylaxe	•	•	•	•			
Distorsion	•				•	•	•
Kontusion					•	•	•
Bandinstabilitäten							
Instabilität, z.B. bei federnder Elle	•						
Arthrose / Arthritis							
leicht	•	•	•	•			
mittel					•	•	
schwer							
Seitenbandverletzung am Daumen (z.B. Skidaumen)							
Bandverletzung im Finger- / Handbereich							•
Lähmung							
Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung)							
leicht	•						
mittel					•	•	
schwer							•
Karpaltunnelsyndrom					•		
leicht							
mittel						•	
schwer							•
Tendomyopathie		•					
Epicondylitis lateralis / medialis humeri		•					

*Angaben zur Rezeptierung gelten nur in Deutschland

RhizoLoc® OA	RhizoLoc®	ManuLoc® Rhizo	ManuLoc® Rhizo long	ManuLoc® Rhizo long Plus	OmoLoc®	EpiPoint®
						
Ruhigstellung und Entlastung des Daumensattel- bzw. Daumengrundgelenks	Stabilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks	Immobilisierung des Handgelenks mit Daumenfassung	Immobilisierung des Handgelenks und Teile des Unterarms mit Daumenfassung	Ruhigstellung der Hand mit abnehmbarer Fingerauflage und Daumenfassung	Immobilisierung der Schulter	Gezielte Entlastung der Sehnenansätze am Ellenbogen
23.07.01.1065	23.07.01.1007	23.07.02.2022	23.07.02.2029	23.07.02.3015	23.09.01.0062	23.08.04.0010
106	107	108	109	110	115	112
•	•	• akut	•	•	•	
		•	•	•	•	
						•
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•		
•						
•	•					
	•	•	•	•		
		•		•		
				•		
		•	•			
		•		•		
			•			
						•

ManuTrain®

Entlastung und Stabilisierung des Handgelenks

Hilfsmittelnummer

05.07.02.0035



Bandage mit Fasziengurt
Aktivitätsstufe II




Bandage
Aktivitätsstufe III



anatomisch geformte Pelotte mit
Knochenaussparung



weiche, anatomisch geformte
Daumenöffnung

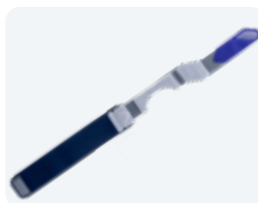

komplettes Gurtsystem

INDIKATIONEN

- chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- Distorsionen (Handgelenksverletzungen, z.B. Verstauchungen)
- Arthrose (Gelenkverschleiß)
- Instabilität, z.B. bei federnder Elle
- Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung)
- Prävention / Rezidivprophylaxe

IN STUDIE^{AA} BELEGT

- **Schmerzreduktion** um 43 %
- **Stabilisierung des Handgelenks** sehr gut urteilen 82,6 % der Patienten
- fast volle **Funktionalität bei Alltagsaktivitäten** nach 4–6 Wochen

IN PRÜFVERFAHREN^A BESTÄTIGT

- Gurtsystem stabilisiert das Handgelenk gleichwertig wie ein herkömmlicher Innenhandstab

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- therapiegerechte Stabilisierung und Aktivierung des Handgelenks durch das Gurtsystem und optimale Kompression des Train-Gestricks
- Druckentlastung des ulnaren Knochenvorsprungs durch viskoelastische Pelotte
- besondere Dehnfähigkeit und kompressionsreduzierte Ränder für ein kraftsparendes An- und Ablegen
- anatomisch geformte Daumenöffnung und nahtfreie, weiche Komfortzone zwischen Daumen und Zeigefinger für einen anhaltenden Tragekomfort
- Kompression des durchblutungsfördernden Hoch-Tief-Gestricks für eine verbesserte Gelenkfunktion

ANWENDUNGSHINWEISE

- drei Aktivitätsstufen gewährleisten eine individuelle Versorgung – von der Akuttherapie bis zur Präventivanwendung

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan

Ausführungen: rechts, links

Ersatzteile / Zusätze:
siehe Seite 126 und Preisliste

LIEFERUMFANG

inklusive Anziehhilfe



Link zum Video:
**Das Gurtsystem
richtig anlegen**

GRÖÖE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Handgelenk (cm)	14 – 15	15 – 16	16 – 17	17 – 18	18 – 19	19 – 20	110 5150 40*0 +0°

* = Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

° = Größe (1 – 6)

^A Kirillov, M., Testing ManuTrain – The new generation with strap system in the test laboratory; Bauerfeind Life Magazine 07 – 2022, full version can be found at bauerfeind-life.de

^{AA} Neusser, M., Konservative Therapie von Handgelenksbeschwerden, Nicht interventionelle Studie, Bodensee Sportklinik, Zentrum für Orthopädie und Sportmedizin

experts.bauerfeind.com/manutrain



ManuLoc®

Immobilisierung des Handgelenks

Hilfsmittelnummer

23.07.02.4010





Mittelhandstab und
seitliche Stäbe



Ränder mit Ultraschall-
schweißtechnik



Klettverschluss mit
Rückzugstopp



INDIKATIONEN

- posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- präoperativ
- Karpaltunnelsyndrom (leichten Grades)
- Tendovaginitis (mittleren Grades)
- Distorsionen / Kontusionen
- Arthrose (mittleren Grades)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Sicherung des Handgelenks sowohl in Extension / Flexion als auch radial und ulnar durch Aluminiumstäbe
- Orthese verhindert Fehlbewegungen des distalen und proximalen Handgelenks
- anatomisch vorgeformter Mittelhandstab stabilisiert das Handgelenk in Funktionsstellung und kann individuell angepasst werden.
- die Konstruktion der Orthese ermöglicht funktionelle Greifbewegungen und erhält somit die Mobilität
- einfaches Anlegen der Orthese mit nur einer Hand möglich durch praktische Klettverschlüsse sowie Rückzugstopps an den Gurten
- hohe Bewegungsfreiheit des Daumens durch beidseitig große Daumenöffnungen – somit auch rechts und links tragbar
- Ränder mit Ultraschallschweißtechnik für mehr Haltbarkeit und bessere Optik

ANWENDUNGSHINWEISE

- Mittelhandstab mit Luftschlitzen und seitliche Stäben aus Aluminium sind individuell anformbar

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links (Daumenöffnungen beidseitig)

GRÖÖE	0	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Umfang Handgelenk (cm)	12 – 15	14 – 18	17 – 21	20 – 26	120 5340 2080 00°

° = Größe (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc



ManuLoc® long

Immobilisierung des Handgelenks und Teile des Unterarms

Hilfsmittelnummer

23.07.02.4048



Mittelhandstab und
seitliche Stäbe



Ränder mit Ultraschall-
schweißtechnik



Klettverschluss mit
Rückzugstopp

INDIKATIONEN

- posttraumatische oder postoperative Reizzustände, z. B. nach Gipsversorgungen bei Radiusfrakturen
- präoperativ
- Karpaltunnelsyndrom (mittleren Grades)
- Tendovaginitis (mittleren Grades mit Ruhe- und Nachtschmerz)
- Distorsionen / Kontusionen
- Arthrose (mittleren Grades)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Sicherung des Handgelenks sowohl in Extension / Flexion als auch radial und ulnar durch verlängerte Aluminiumstäbe
- Limitierung der Rotationsbewegungen im Handgelenk durch längeren Hebel der Orthese
- Orthese verhindert Fehlbewegungen des distalen und proximalen Handgelenks
- hohe Bewegungsfreiheit des Daumens durch beidseitig große Daumenöffnungen – somit auch rechts und links tragbar
- Ruhigstellung in funktionaler Stellung bei funktionierender Greifbewegung durch anformbaren Mittelhandstab
- einfaches Anlegen der Orthese mit nur einer Hand möglich durch praktische Klettverschlüsse sowie Rückzugstopps an den Gurten
- Ränder mit Ultraschallschweißtechnik für mehr Haltbarkeit und bessere Optik, Richtung Ellenbogen wird die empfindlichere Haut weich abgepolstert / eingebettet

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links (Daumenöffnungen beidseitig)

Ersatzteile / Zusätze:
siehe Seite 126 und Preisliste

IN STUDIE^A BELEGT

- **22 % verbesserte Funktionalität im Alltag** sechs Wochen nach der Operation


ANWENDUNGSHINWEISE

- verlängerte seitliche Stäbe und Mittelhandstab mit Luftschlitzen aus Aluminium sind individuell anformbar

GRÖßE	0	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Umfang Handgelenk (cm)	12 – 15	14 – 18	17 – 21	20 – 26	120 5340 2082 00°

° = Größe (0–3)

^A Katzmaier, P., et al., POSTOPERATIVE THERAPIE DER DISTALEN RADIUSFRAKTUR MIT DER ORTHESE ManuLoc long, nicht interventionelle Studie, MVZ Oberstdorf, 2016.

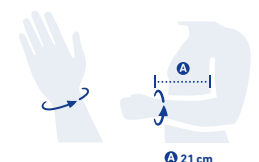


21 cm

ManuLoc® long Plus

Ruhigstellung der Hand mit
abnehmbarer Fingerauflage

Hilfsmittelnummer

23.07.02.1014

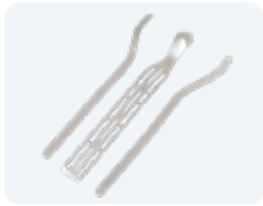

Mittelhandstab und
seitliche Stäbe



anformbare Handauflage



Seitenansicht mit Funktionsstellung



Ränder mit Ultraschall-
schweißtechnik



Klettverschluss mit
Rückzugstopp

INDIKATIONEN

- posttraumatisch (multiple, komplexe Verletzungen im Hand-/Fingerbereich)
- präoperativ und postoperativ, z. B. Morbus Dupuytren, Mittelhandfrakturen
- Verletzungen / Frakturen im Handgelenksbereich
- Karpaltunnelsyndrom (schweren Grades – Nachtlagerung)
- Tendovaginitis (schweren Grades)
- Distorsionen / Kontusionen
- Bandverletzungen im Finger- / Handbereich

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- stabilisiert das Handgelenk, den Unterarm und die Finger; der Daumen bleibt frei beweglich
- einstellbare Lagerungspositionen in Intrinsic-Plus-Stellung oder Normalstellung zur Schmerzreduzierung und Vermeidung von Immobilisationsschäden
- Sicherung des Handgelenks sowohl in Extension / Flexion als auch radial und ulnar durch verlängerte Aluminiumstäbe
- breiter Fingergurt entlastet Bänder und Sehnen, während Finger in Position gehalten werden
- hohe Bewegungsfreiheit des Daumens durch beidseitig große Daumenöffnungen – somit auch rechts und links tragbar
- einfaches Anlegen der Orthese mit nur einer Hand möglich durch praktische Klettverschlüsse sowie Rückzugstopps an den Gurten
- Ruhigstellung in funktionaler Stellung durch anformbaren Mittelhandstab
- Ränder mit Ultraschallschweißtechnik für mehr Haltbarkeit und bessere Optik; Richtung Ellenbogen wird die empfindlichere Haut weich abgepolstert / eingebettet

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links (Daumenöffnungen beidseitig)

Ersatzteile / Zusätze:


siehe Seite 126 und Preisliste

ANWENDUNGSHINWEISE

- verlängerte seitliche Stäbe und Mittelhandstab mit Luftschlitzen aus Aluminium sind individuell anformbar

GRÖßE	0	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Umfang Handgelenk (cm)	12 – 15	14 – 18	17 – 21	20 – 26	128 5341 0080 00°

° = Größe (0–3)

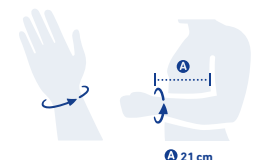

21 cm

RhizoLoc® OA

Ruhigstellung und Entlastung des Daumensattel- bzw. Daumengrundgelenks

Hilfsmittelnummer

23.07.01.1065



stabilisierende
Kunststoffspange



Handsymbol zur Orientierung
beim Anlegen



weicher selbsthaftender
Daumen-Wickelgurt



praktischer Verschluss
mit Öse



Alltagstauglich

INDIKATIONEN

- Arthrose (z. B. Rhizarthrose)
- Arthritis
- Reizzustände (chronisch, akut, posttraumatisch, postoperativ)
- chronisch (z. B. Bandinstabilitäten, rezidivierende Gelenkfehlstellungen)
- akut / posttraumatisch (z. B. Überlastungen, Distorsionen, Kontusionen)
- funktionelle Beschwerden (Überlastungen, bei rezidivierenden Gelenkfehlstellungen u. ä.)
- postoperativ (z. B. nach Arthroplastik)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Ruhigstellung und Entlastung des Daumensattel- bzw. Daumengrundgelenks
- hohe Stabilisierung des Daumens durch Zwei-Komponenten-Kunststoffspange
- sichere Position dank des selbsthaftenden, weichen Daumengurtes
- kann auch im Wasser getragen werden (danach abtrocknen und wieder anlegen), Tipp: Daumen-Wickelgurt dafür abnehmen
- hoher Tragekomfort durch abgerundete Ränder und Perforierung
- individuelle Anpassung durch einstellbare Gurte
- einfaches Anlegen mit nur einer Hand durch praktischen Verschluss mit Öse möglich

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

Ersatzteile / Zusätze:
siehe Seite 127 und Preisliste

GRÖßE

Umfang Handgelenk (cm)

1

14 – 17

2

16 – 20

ARTIKEL-NR.

120 5333 1080 +0°

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links
° = Größe (1 – 2)

Hinweis:

Bei Zwischengrößen und zierlichen Händen Größe 1 wählen.

experts.bauerfeind.com/rhizoloc-oa



RhizoLoc®

Stabilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks

Hilfsmittelnummer

23.07.01.1007





Klettverschluss mit Rückzugstopp



Klettlasche zur Mobilisierung



Aluminiumbügel

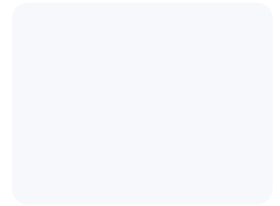

INDIKATIONEN

- postoperative und posttraumatische Reizzustände
- Seitenbandverletzungen, z. B. Skidaumen
- Rhizarthrose (leichten Grades)
- Distorsionen / Kontusionen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Stabilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- hohe Stabilisierung des Daumengrundgelenks durch Aluminiumbügel
- limitierbare Freigabe der Bewegung im Daumengrundgelenk (Dynamisierung) dank Klettlasche
- einfaches Anlegen der Orthese mit nur einer Hand möglich durch praktische Klettverschlüsse sowie Rückzugstopps an den Gurten
- hoher Tragekomfort dank atmungsaktiven Materialien mit Luftporen
- Erhalt der Bewegungsfreiheit im Handgelenk durch schmalen Gurt und kleinen Umlenkring

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

IN STUDIE^A BELEGT

- **Schmerzreduzierung durch Ruhigstellung des Daumensattelgelenks** (bis zum MCP-I-Gelenk) bei Fingerpolyarthrosen

ANWENDUNGSHINWEISE

- individuell anformbarer Aluminiumbügel

GRÖßE	1	2	ARTIKEL-NR.
Umfang Handgelenk (cm)	12,5–16	16–20	
Umfang Daumen (cm)	5–7	6,5–9	120 5330 1080 +0°

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links
° = Größe (1–2)

^A Wanivenhaus A., Die Behandlung der Fingerpolyarthrosen; Rheumatologie und Orthopädie, 1, 10–12, 2013



ManuLoc® Rhizo

Immobilisierung des Handgelenks mit Daumenfassung

Hilfsmittelnummer

23.07.02.2022



Mittelhandstab und
seitliche Stäbe



individuell einstellbare
Daumenfixierung



Ränder mit Ultraschall-
schweißtechnik



Klettverschluss mit
Rückzugstopp

INDIKATIONEN

- akute, posttraumatische und postoperative Reizzustände des Handgelenks und Daumenstrahls
- präoperativ
- radialeseitige Tendovaginitis (mittleren Grades)
- Rhizarthrose (schweren Grades)
- Karpaltunnelsyndrom (leichten Grades)
- Distorsionen / Kontusionen
- Bandverletzung im Finger- / Handbereich

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Orthese verhindert Fehlbewegungen des proximalen und distalen Handgelenks sowie des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Ruhigstellung des Handgelenks dank anformbarer Aluminiumstäbe
- Stabilisierung des Handgelenks in Funktionsstellung dank anatomisch vorgeformtem Mittelhandstab
- einfaches Anlegen der Orthese mit nur einer Hand möglich durch praktische Klettverschlüsse sowie Rückzugstopps an den Gurten
- Ränder mit Ultraschallschweißtechnik für mehr Haltbarkeit und bessere Optik

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

Ersatzteile / Zusätze:
siehe Seite 126 und Preisliste

ANWENDUNGSHINWEISE

- Mittelhandstab mit Luftschlitzen, seitliche Stäbe und Bügel aus Aluminium sind individuell anformbar
- im Therapieverlauf kann der Daumen zunehmend dynamisiert und die Daumenfassung komplett entfernt werden

GRÖßE	0	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Umfang Handgelenk (cm)	12 – 15	14 – 18	17 – 21	20 – 26	120 5345 0080 +0°

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

° = Größe (0–3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo




ManuLoc® Rhizo long


Immobilisierung des Handgelenks und Teile des Unterarms mit Daumenfassung

Hilfsmittelnummer

23.07.02.2029

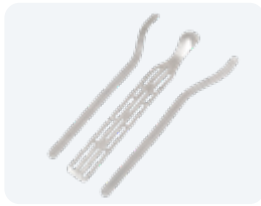

Mittelhandstab und seitliche Stäbe

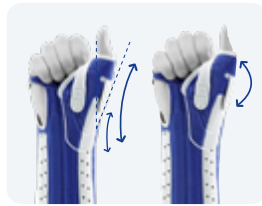

individuell einstellbare Daumenfixierung



Aluminiumbügel



Ränder mit Ultraschallschweißtechnik



Klettverschluss mit Rückzugstopp

INDIKATIONEN

- posttraumatische oder postoperative Reizzustände, z. B. nach Gipsversorgungen bei Skaphoidfrakturen
- präoperativ
- radialeseitige Tendovaginitis (mittleren Grades)
- Rhizarthrose (schweren Grades)
- Distorsionen / Kontusionen
- Karpaltunnelsyndrom (mittleren Grades)
- Seitenbandverletzungen, z. B. Skidaumen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Orthese verhindert Fehlbewegungen des proximalen und distalen Handgelenks sowie des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Limitierung der Rotationsbewegungen im Handgelenk durch längeren Hebel der Orthese
- Ruhigstellung des Handgelenks dank anformbarer Aluminiumstäbe
- Stabilisierung des Handgelenks in Funktionsstellung dank anatomisch vorgeformtem Mittelhandstab
- einfaches Anlegen der Orthese mit nur einer Hand möglich durch praktische Klettverschlüsse sowie Rückzugstopps an den Gurten
- Ränder mit Ultraschallschweißtechnik für mehr Haltbarkeit und bessere Optik; Richtung Ellenbogen wird die empfindlichere Haut weich abgepolstert / eingebettet

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 126 und Preisliste

ANWENDUNGSHINWEISE


- Mittelhandstab mit Luftschlitzen, seitliche Stäbe und Bügel aus Aluminium sind individuell anformbar
- im Therapieverlauf kann der Daumen zunehmend dynamisiert und die Daumenfassung komplett entfernt werden

GRÖßE	0	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Umfang Handgelenk (cm)	12 – 15	14 – 18	17 – 21	20 – 26	120 5345 0082 +0°

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

° = Größe (0–3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo-long

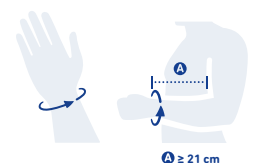

ManuLoc® Rhizo long Plus

Ruhigstellung der Hand mit abnehmbarer
Fingerauflage und Daumenfassung

Hilfsmittelnummer

23.07.02.3015



Mittelhandstab und
seitliche Stäbe



anformbare Fingerauflage



individuell einstellbare
Daumenfixierung



Ränder mit Ultraschall-
schweißtechnik



Klettverschluss mit
Rückzugstopp

INDIKATIONEN

- posttraumatisch (multiple, komplexe Verletzungen im Hand- / Fingerbereich)
- präoperativ und postoperativ, z. B. Morbus Dupuytren, Mittelhandfrakturen
- Frakturen / Verletzungen im Handwurzelbereich, z. B. nach operativer Versorgung
- Verletzungen des Daumensattel- und Grundgelenks
- komplexe Bandverletzungen im Finger- / Handbereich aufgrund Traumata
- Lähmungen
- Tendovaginitis (schweren Grades)
- Distorsionen / Kontusionen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- stabilisiert das Handgelenk, den Unterarm, die Finger inklusive Daumen
- einstellbare Lagerungspositionen zur Schmerzreduzierung und Vermeidung von Immobilisationsschäden
- Ruhigstellung des Handgelenks dank anformbarer Aluminiumstäbe
- einfaches Anlegen der Orthese mit nur einer Hand möglich durch praktische Klettverschlüsse sowie Rückzugstopps an den Gurten
- Ränder mit Ultraschallschweißtechnik für mehr Haltbarkeit und bessere Optik; Richtung Ellenbogen wird die empfindlichere Haut weich abgepolstert / eingebettet

ANWENDUNGSHINWEISE

- Fingerauflage wird in Neutralstellung geliefert und ist schnell und ohne Werkzeug in Intrinsic-Plus-Stellung anformbar
- Mittelhandstab mit Luftschlitzen, seitliche Stäbe und Bügel aus Aluminium sind individuell anformbar
- Unterstützung bei Physiotherapie und Mobilisierung im Heilungsprozess dank abnehmbarer Fingerauflage und Daumenfassung

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links


Ersatzteile / Zusätze:
siehe Seite 126 und Preisliste

GRÖßE	0	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Umfang Handgelenk (cm)	12 – 15	14 – 18	17 – 21	20 – 26	128 5347 0080 +0°

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

° = Größe (0–3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo-long-plus

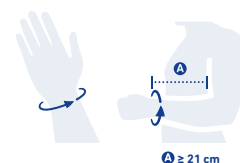

EpiTrain®

Entlastung und Stabilisierung des Ellenbogengelenks

Hilfsmittelnummer

05.08.01.1000



Epicon+ Pads



Epicon+ Pads im Produkt



komfortable Ellenbeugezone



langes Oberarmgestrick



Train-Gestrick

INDIKATIONEN

- posttraumatische oder postoperative Reizzustände, z. B. Epicondylitis
- Arthrose / Arthritis (Gelenkverschleiß / Gelenkentzündung)
- Tendopathie (degenerative Sehnenkrankung)
- Tendomyopathie (Muskelsehnenkrankung)
- Prävention / Rezidivprophylaxe

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- die therapeutische Kompression der besonders strukturierten Oberfläche des Hoch-Tief-Gestricks bewirkt zusammen mit den Epicon+ Pads eine spürbare Entlastung und eine gezielte Schmerzlinderung
- die viskoelastischen Epicon+ Pads mit Epikondylenaussparungen sorgen für Umverteilung der Bandagenkompression von den Epikondylen auf das umgebende Weichteilgewebe und ermöglichen eine sichere Positionierung der Bandage
- die weiche und besonders atmungsaktive Komfortzone in der Ellenbeuge des anatomisch geformten Train-Gestricks ermöglicht einen hohen Tragekomfort
- Epicon+ Pads entlasten die Epikondylen und die Massagenoppen einer festeren Materialkomponente üben eine wohltuende Wecheldruckmassage in der Bewegung auf die Muskel- und Sehnenansätze aus

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

optional: Maßanfertigung in beige und titan, Haftband, Klettverschluss

Hinweis:

bei Maßanfertigung zusätzliche Hilfsmittelnummer: 05.99.99.0001

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 126 und Preisliste

GRÖÖE	0	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
größter Unterarmumfang (cm)	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29	29 – 31	31 – 33	33 – 35	110 6160 40*0 00°

* = Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan
° = Größe (0 – 6)

Maßanfertigung: Die genauen Messpunkte entnehmen Sie bitte dem Maßbestellblock oder dem Maßbestellblatt auf Seite 138.

experts.bauerfeind.com/epitrain



EpiPoint®

Gezielte Entlastung der Sehnenansätze am Ellenbogen

Hilfsmittelnummer

23.08.04.0010



roter Signalbereich zeigt zu starken Druck an



Fünfpunkt-Pelotte

INDIKATIONEN

- Epicondylitis lateralis humeri (Entzündung des Muskelursprungs, Tennisarm)
- Epicondylitis medialis humeri (Entzündung des Muskelursprungs, Golfer- und Werferellenbogen)
- Prävention / Rezidivprophylaxe

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- gezielte Entlastung überbeanspruchter Strukturen dank dosierter Kompression am Unterarm
- viskoelastische Fünfpunkt-Pelotte stimuliert die Triggerpunkte und ermöglicht eine punktgenaue Kompression
- individuelle, stufenlose Druckanpassung durch elastisches Regulierband
- roter Signalbereich am Regulierband als Indikator für zu starken Druck

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: schwarz, titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

LIEFERUMFANG

auch im Display (12 Stück)

IN STUDIE^A BELEGT

- **bis zu 23 % weniger Schmerzen** (bei Patienten mit positivem Extensor Grip Test)

GRÖßE

Umfang Unterarm (cm)

UNIVERSAL

22,5–33


ARTIKEL-NR.

120 6350 10*0 000

* = Farbe (7) schwarz, (8) titan

^A Promotionsschrift: Struijs et al.; Frederik Hendrikplantsoen 74-2; NL-1052 XW Amsterdam

experts.bauerfeind.com/epipoint

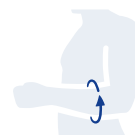


OmoTrain®

Entlastung und Stabilisierung des Schultergelenks

Hilfsmittelnummer

05.09.01.0001

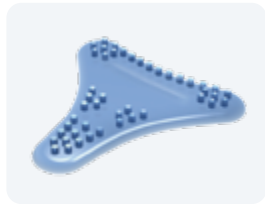

herausnehmbare Delta-Pelotte

INDIKATIONEN

- chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- Prävention / Rezidivprophylaxe
- Arthrose (Gelenkverschleiß)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- komprimierendes Gestrick und Zug des Gurtsystems wirken zentrierend auf das Glenohumeralgelenk
- viskoelastische Delta-Pelotte mit Friktionsnoppen massiert bei Bewegung die Schulterweichteile; die Gelenkwahrnehmung wird verbessert, die Resorption von Ödemen und Ergüssen wird beschleunigt, Schmerzen werden gelindert
- Gurtführung spart den Brustbereich aus
- Delta-Pelotte kann wahlweise eingeklettet und nach Bedarf positioniert werden

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 127 und Preisliste

GRÖÖE	0	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang (cm)	20–22	22–24	24–26	26–29	29–32	32–36	36–40	110 7170 2080 00°

° = Größe (0–6)




OmoTrain® S

Entlastung und Stabilisierung des Schultergelenks

Hilfsmittelnummer

05.09.01.0004

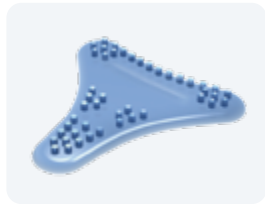

herausnehmbare Delta-Pelotte

INDIKATIONEN

- chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- Prävention / Rezidivprophylaxe
- Arthrose (Gelenkverschleiß)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- komprimierendes Gestrick und Zug des Gurtsystems verbessern die Koadaption des Humeruskopfes zum Glenoid
- viskoelastische Delta-Pelotte mit Friktionsnoppen massiert bei Bewegung die Schulterweichteile; dadurch werden Schmerzen gelindert, die Gelenkwahrnehmung wird verbessert und die gelenkstabilisierende Muskulatur aktiviert
- Delta-Pelotte kann wahlweise eingeklettet und positioniert werden
- schnelles und einfaches Anlegen der Bandage durch direkte Gurtführung

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

GRÖÖSE	0	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang (cm)	20–22	22–24	24–26	26–29	29–32	32–36	36–40	110 7171 0080 +0°

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

° = Größe (0–6)

experts.bauerfeind.com/omotrain-s



OmoLoc®

Immobilisierung der Schulter

Hilfsmittelnummer

23.09.01.0062



weiche Unterleglaschen



Verschluss mit Fingertasche



breite Hand- / Armschlaufen stützen den Arm großflächig



optional: Schultergurt

INDIKATIONEN

- Immobilisierung, z. B. nach einer Schulteroperation
- postoperativ, posttraumatisch, präoperativ
- Luxation

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Ruhigstellung des Schultergelenks in der 0°-Abduktionsstellung (innenrotiert), z. B. zur Sicherung des OP-Ergebnisses
- Unterarm wird in der geforderten Beugung von 90–100° fixiert und dadurch können Schmerzen gelindert werden
- sichere Fixierung und perfekter Sitz durch drei individuelle positionierbare Armschlaufen
- sichere und situative Anpassung durch Bauchverschluss mit Zuggurtsystem
- hygienischer Vorteil durch die Konstruktion der Orthese
- kein Schultergurt erforderlich; Fehlhaltungen und damit verbundene Verspannungen der gesunden Schulter werden so vermieden; jedoch ist der Schultergurt als Ersatzteil erhältlich

ANWENDUNGSHINWEISE

- Fixierung des Unterarms in der medizinisch therapeutischen korrekten Position, 90–100°

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

optional: Schultergurt


Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 127 und Preisliste

HAND, ELLENBOGEN
UND SCHULTER

GRÖßE	1	2	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	bis 100	100–130	120 7360 1120 +0°

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links
° = Größe (1–2)

experts.bauerfeind.com/omoloc

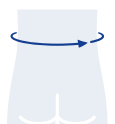





RUND UM DAS PRODUKT

ERSATZTEILE, ZUBEHÖR UND ZUSÄTZE

Ersatzteile werden innerhalb von drei bis vier Werktagen bereitgestellt.

VERSORGUNGSBEREICH FUß UND SPRUNGGELENK

AchilloTrain®

BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NR.
01 Fersenkeil (für Bandagengröße 1–2)	11911080000001
02 Fersenkeil (für Bandagengröße 3–6)	11911080000002



01|02

MalleoLoc® L

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 Gurt-Set	Universal	12913281000+00
02 Polster	Universal	12913291000+00
03 Pelotte		12913321000000

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links



01



02



03

MalleoLoc® L3

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 Gurt-Set	Universal	12913281000+00

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links



01

MalleoLoc®

BEZEICHNUNG	GRÖßE°	ARTIKEL-NR.
01 Gurt, proximal	Universal	12913183123+00
02 Gurt, distal	Universal	12913183124000
03 Umlenkschnalle		12913093120000
04 Gurt-Set ohne Spangenpolster	Universal	12913023080+00
05 Gurt-Set mit Spangenpolster	1–2	12913023080+0°
06 Orthometer / Goniometer		12146740030000

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links



01



02



03



04



05



06

ValguLoc®

BEZEICHNUNG	GRÖßE°	ARTIKEL-NR.
01 Gurt-Set	1–3	12913220000+0°

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links



01

ValguLoc® II

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 Gurt-Set	Universal	12913220000000



01

Anziehhilfe

BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NR.
01 Anziehhilfe Bandagen	14002220050000



01

Xtern® Summit / Frontier

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 Schuhbefestigungsclip (5er Pack)		1291359100000^
02 Polster und Verschluss Xtern Frontier		12913531000000
03 Polster und Gurte Xtern Summit		1291352100000^
04 Fersenstopper		12913571000000
05 Extensionsstopper (für Xtern Frontier Gr. S)	30 mm	12913541000001
06 Extensionsstopper (für Xtern Frontier Gr. S-L und Xtern Summit Gr. S)	40 mm	12913541000002
07 Extensionsstopper (für Xtern Frontier Gr. M-L und Xtern Summit Gr. M-L)	45 mm	12913541000003
08 Knöchel-Stabilisationsband		12913581000000

^ = (1) für Gr. S, (2) für Gr. M-L



01



02



03



04



05|06|07



08

VERSORGUNGSBEREICH KNIE, OBERSCHENKEL UND HÜFTE

GenuTrain®

BEZEICHNUNG	FARBE	ARTIKEL-NR.
01 Noppenhaftband (5 cm breit, 1 m lang)	titan	11941230000000



01

GenuTrain® S

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 Gurt-Set (für Bandagengröße 1-2)	1	129413230*0001
02 Gurt-Set (für Bandagengröße 3-4)	2	129413230*0002
03 Gurt-Set (für Bandagengröße 5-7)	3	129413230*0003
04 Gelenkstäbe	Universal	129413130*0+00

* = Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan
+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

01|02|03



04

SofTec® Genu

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 Gelenkschienen, lateral	Universal	12946021060+00
02 Gelenkschienen, medial	Universal	12946031060+00
03 Gelenkschutz (Sportschutz)		12946011070000
04 Limitierungs-Set (5 Abdeckkappen, 10 Arretierungsstifte)		12946070000000

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links



01|02



03



04

SecuTec® Genu

FÜR FRONTAL UND DORSAL

BEZEICHNUNG	GRÖßE°	ARTIKEL-NR.
01 Limitierungskeile (2× Rahmen + 2× E0)		12946161060000
02 Gelenkbeutel		12946511070000
03 Gelenkdeckel mit Vierteldrehverschluss (1 Stück)		12946451000000
04 Schnellverschluss-Set (4 Stück)		12946541000000
05 Gurtpolster-Set silikonisiert (2 Stück)		12946980000000^
06 Rahmen proximal	1–7	12946501**3+0°

** = Farbe (05) blau, (23) grün

^ = (1) für Gr. 1–2, (3) für Gr. 3–4, (5) für Gr. 5–6, (7) für Gr. 7



FÜR FRONTAL ODER DORSAL

BEZEICHNUNG	GRÖßE°	ARTIKEL-NR.
01 Gurt-Set, Version frontal	1–7	1294611207000°
02 Gurt-Set, Version dorsal	1–7	1294675107000°
03 Rahmenpolster-Set, Version frontal	1–7	12946131070+0°
04 Rahmenpolster-Set, Version dorsal	1–7	12946491070+0°
05 Gurtpolster-Set, Version frontal		1294617107000"
06 Gurtpolster-Set, Version dorsal	1–7	1294676107000°
07 Tibiakantenpolster (nur für Version frontal)		12946520070000
08 Rahmen distal, Version frontal	1–7	12946501**4+0°
09 Rahmen distal, Version dorsal	1–7	12946481054+0°

** = Farbe (05) blau, (23) grün

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

" = (1) für Gr. 1–2, (2) für Gr. 3–4, (3) für Gr. 5–6, (4) für Gr. 7



SecuTec® Genu Flex


BEZEICHNUNG	GRÖßE°	ARTIKEL-NR.
01 Kettenglieder-Set (10 Stück)		12946851050000
02 Mittelpolster-Set	0–6	1294686107000°
03 Gurt-Set	1–5	1294687107000°
04 Gurtpolster-Set	1–5	1294688107000°
05 Seitenpolster-Set		12946891070000
06 Limitierungskeile (2× Rahmen + 2× E0)		12946161060000
07 Gelenkdeckel mit Vierteldrehverschluss (1 Stück)		12946451000000
08 Kondylenpolster-Set (2 Stück)		12946790000000

° = Größe (1–5), (0) wenn Größe 1 zu groß ist, (6) wenn Größe 5 zu klein ist



GenuTrain® OA

BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NR.
01 Limitierungs-Set für Größe 1 und 2	12941660070001
02 Limitierungs-Set für Größe 3 und 4	12941660070003
03 Limitierungs-Set für Größe 5	12941660070005
04 Gelenkdeckel links-medial / rechts-lateral (1 Stück)	12941670070700
05 Gelenkdeckel rechts-medial / links-lateral (1 Stück)	12941670070600

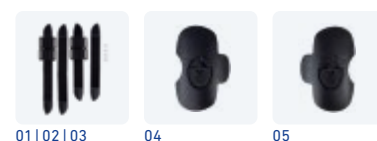

SecuTec® OA

BEZEICHNUNG	GRÖßE°	ARTIKEL-NR.
01 Gurt-Set	1–7	1294693000000°
02 Rahmenpolster-Set (inkl. Gelpolster)	1–7	12946940000+0°
03 Gurtpolster-Set	1–7	1294695000000°
04 Gurtpolster silikonisiert (2 Stück)		1294698000000^
05 Rahmen, distal (blau)	1–7	12946960050+0°
06 OA-Gelenkbeutel		129469700000000
07 Schnellverschluss-Set (4 Stück)		12946541000000
08 Limitierungskeile (2× Rahmen + 2× E0)		12946161060000
09 Inbusschlüssel 3 mm		19000070010102
10 Gelenkdeckel mit Vierteldrehverschluss (1 Stück)		12946451000000

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

^ = (1) für Gr. 1–2, (3) für Gr. 3–4, (5) für Gr. 5–6, (7) für Gr. 7



MOS-Genu

BEZEICHNUNG	GRÖßE°	ARTIKEL-NR.
ZUSATZTEILE		
01 Popliteal-Kreuzgurt (für Größe 1–2)		12146624050001
02 Popliteal-Kreuzgurt (für Größe 3)		12146624050003
03 Popliteal-Kreuzgurt (für Größe 4–5)		12146624050004
04 Popliteal-Pelotten	1–5	1214661409000°
05 Gelenkring	1–5	12146644050+0°
06 Ersatzteile-Set (Schrauben)		12146713000000
07 Abdeckscheiben (10er)		12146730000000
08 Orthometer / Goniometer		12146740030000
KURZE VERSION		
09 Rahmen	1–5	1214664405#+0°
10 Polster-Set	1–5	12146654090+0°
11 Gurt-Set	1–5	1214667405000°
LANGE VERSION		
12 Verlängerungsrahmen	Universal	1214669405#+00
13 Gurt für Verlängerungsrahmen proximal, für Gr. 1–3	1–3	1214668405300°
14 Gurt für Verlängerungsrahmen proximal, für Gr. 4–5		12146684053004
15 Gurt für Verlängerungsrahmen distal, für Gr. 1–3		12146684054001
16 Gurt für Verlängerungsrahmen distal, für Gr. 4–5		12146684054004
17 Polster für Verlängerungsrahmen	Universal	1214666409#000

KURZE VERSION

09 Rahmen	1–5	1214664405#+0°
10 Polster-Set	1–5	12146654090+0°
11 Gurt-Set	1–5	1214667405000°

LANGE VERSION

12 Verlängerungsrahmen	Universal	1214669405#+00
13 Gurt für Verlängerungsrahmen proximal, für Gr. 1–3	1–3	1214668405300°
14 Gurt für Verlängerungsrahmen proximal, für Gr. 4–5		12146684053004
15 Gurt für Verlängerungsrahmen distal, für Gr. 1–3		12146684054001
16 Gurt für Verlängerungsrahmen distal, für Gr. 4–5		12146684054004
17 Polster für Verlängerungsrahmen	Universal	1214666409#000

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

= Ausführung (3) proximal, (4) distal



CoxaTrain®

BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NR.
01 Abdeckkappe	12925831000000
02 Glutealpelotte	12925851000000
03 Trochanter Pelotten / Polster	12925861000000
04 Limitierungsstifte (2×)	12925871000000
05 Gelenk mit Kappe, short	12925881001000
06 Gelenk mit Kappe, long	12925881002000
07 ISG-Pelotten (2-tlg.)	11984160000000



Hinweis:

bei einer beidseitigen Versorgung werden ein weiteres Gelenk (1222584100#000), eine Oberschenkelbandage und eine Glutealpelotte benötigt.

SofTec® Coxa

BEZEICHNUNG	GRÖßE°	ARTIKEL-NR.
01 Kleinteilebeutel		12925210000000
02 Oberschenkelbandage, Ersatzteil	Universal	12925210080000
03 Beckengestrick	1 – 3	1292521008000°
04 Gelenk ungekröpft	Universal	12225231080000
05 Gelenk gekröpft	Universal	12225221080001
06 Limitierungs-Set (5 Abdeckkappen, 10 Arretierungsstifte)		12925340000000
07 Hüftschale mit Montage-Set	1 – 3	12925350000+0°
08 Inbusschlüssel 3 mm		19000070010102
09 Erweiterungsset beidseitige Versorgung gekröpft		12225260080000
10 Erweiterungsset beidseitige Versorgung ungekröpft		12225270080000

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

HINWEIS: Aus diesen Ersatzteilen lässt sich keine komplette SofTec Coxa zusammenstellen.



VERSORGUNGSBEREICH WIRBELSÄULE UND HALS

Verschlussverlängerung

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 Verschlussverlängerung Rückenprodukt, short Kann bei dem folgenden Produkt eingesetzt werden: SofTec Lumbo short	Universal	12984880082000
02 Verschlussverlängerung Rückenprodukt, long Kann bei folgenden Produkten eingesetzt werden: SofTec Lumbo long, SofTec Dorso long + short, SecuTec Dorso, SecuTec Lumbo, LumboLoc Forte, LordoLoc	Universal	12984881081 000



LumboTrain® straight LumboTrain® waisted

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 lumbale Pelotte, inkl. Bezug	Universal	11984126000000



LumboLoc® Forte

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 Kreuzbeinpelotte	Universal	12184040050001
02 Lendenpelotte	Universal	12184050050001



SacroLoc®

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 ISG-Pelotten (2-tlg.)	Universal	11984160000000



SecuTec® Dorso

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 CFK-Rahmen, long	Universal	12984630082000
02 Velourtasche, long		12984610082000
03 Klettunkte Rahmen		12984650000000



SecuTec® Lumbo

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 CFK-Rahmen	Universal	1298463008#000
02 Velourtasche		1298461008#000
03 Klettunkte Rahmen		12984650000000
04 Abdominalpelotte (klein)	Universal	12985310000000

= Ausführung (1) short, (2) long



SofTec® Lumbo

BEZEICHNUNG	GRÖßE°	ARTIKEL-NR.
01 Schale, short	1–3	1298482003100°
02 Schale, long	1–4	1298482003200°
03 CFK-Stab	Universal	1298483007#000
04 Korsettstab	Universal	1298484008#000
05 Abdominalpelotte (groß)	Universal	12984810080000
06 Gummiband		1298485008#000
07 Innengestrick, short	1–3	1298486008100°
08 Innengestrick, long	1–4	1298486008200°
09 Außengestrick, short	1–3	1298487 008100°
10 Außengestrick, long	1–4	1298487008200°

= Ausführung (1) short, (2) long



SofTec® Dorso

BEZEICHNUNG	GRÖßE°	ARTIKEL-NR.
01 Reklinator (mit Polstern)	Universal	12984981170000
02 Reklinatorpolster	Universal	12985011000000
03 Set A (Kreuz + Montageset)		12984931000000
04 Kreuz		12984991170000
05 Montage-Set		12985021000000
06 Set B (2 Schultergute + 2 Polster)	Universal	12984940080000
07 Schultergurt (Inhalt: 2 Gurte)	Universal	12984960080000
08 Schulterpolster (Inhalt: 2 Polster)	Universal	12984970080000
09 Innengestrick	1–4	1298492008000°
10 Außengestrick	1–4	1298491008#00°

= Ausführung (1) short, (2) long



Spinova®

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	GRÖßE°
01 Bauchverschluss, Set		
02 Grundbandage mit Korsettstäben**		1 – 7
03 Verschlussverlängerung		
04 Zuggurte, Set**		1 – 5
05 Seitenclip, Set (10 Stück)		
06 Rückenkassette, Set		
07 Schalensystem, Set**	small	
	large	
08 Schalenbezug, Set**	short	1 – 2
	long	1 – 2
09 Überbrückungsrahmen	short	
	long	
10 Überbrückungspelotte	standard	
	short	
11 Klettstreifen Befestigung Rahmen, Set (10 Stück)		
12 Schulterpolster, Set		
13 Reclinators (ohne Bezug)	S – L	1 – 3
14 Schraubenset Immo		
15 Inbusschlüssel Immo		
16 Torxschlüssel Zugsystem		
17 Abdominalpelotte	groß	
18 Drehmomentschlüssel		




01



02




03

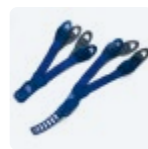

04




05

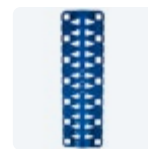

06



07

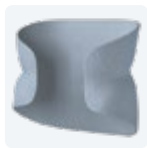

08



09



10



11



12



13



14




15



16



17

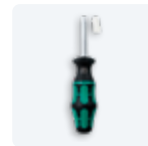

18

Stabi Classic	Support Plus	Unload Classic	Unload Plus	Immo Plus	Immo	Osteo	ARTIKEL- NUMMERN
●	●	●	●	●	●		12985450000000
	●		●	●			1298544000000°
●	●	●	●	●	●		12985650000000
	●		●	●	●		1298546000000°
	●		●	●	●		12985470000000
	●		●	●	●		12985480000000
				●	●		12985540000001
				●	●		12985540000002
				●			1298566000100°
				●			1298566000200°
		●	●				12985520001000
		●	●				12985520002000
	●						12985490000000
	●						12985490001000
		●	●				12985500000000
						●	12985710000000
						●	1298570000000°
				●	●		12985560000000
				●	●		12985570000000
	●		●	●	●		12985580000000
	●		●	●			12984810080000
	●		●	●	●		12985600000000

** GRÖßENZUORDNUNG (in cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	130–140
Produkt	1	2	3	4	5	6	7
Grundbandage	1	2	3	4	5	6	7
Zuggurte	1	2	3	4		5	
Schalensystem (Standardhöhe°)		1 (small)			2 (large)		
Schalenbezug		1 (short / long)			2 (short / long)		

° für Patient:innen mit einer Körpergröße größer als 170 cm

VERSORGUNGSBEREICH HAND, ELLENBOGEN UND SCHULTER

ManuTrain®

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 Gurt (für die Größen 1–2)	1	119515230*0+01
02 Gurt (für die Größen 3–6)	2	119515230*0+02

* = Farbe (1) beige, (5) titan, (7) schwarz
+ = Ausführung (6) rechts, (7) links



01|02

ManuLoc® long

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 Ersatzgurte (4 Stück), Farbe titan	Universal	12953430080000



01

ManuLoc® long Plus

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 Fingerauflage mit Gurt, Farbe titan	1	1295342008000#
02 Ersatzgurte (4 Stück), Farbe titan	Universal	12953430080000

= Ausführung (1) Größe S, (3) Größe L



01



02

ManuLoc® Rhizo

BEZEICHNUNG	GRÖßE°	ARTIKEL-NR.
01 Daumenaufsatz	0–3	12953460080+0°
02 Ersatzgurte (4 Stück), Farbe titan	Universal	12953430080000

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links



01



02

ManuLoc® Rhizo long

BEZEICHNUNG	GRÖßE°	ARTIKEL-NR.
01 Daumenaufsatz	0–3	12953460080+0°
02 Ersatzgurte (4 Stück), Farbe titan	Universal	12953430080000

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links



01



02

ManuLoc® Rhizo long Plus

BEZEICHNUNG	GRÖßE	ARTIKEL-NR.
01 Daumenaufsatz	0–3	12953460080+0°
02 Fingerauflage mit Gurt, Farbe titan	1	1295342008000#
03 Ersatzgurte (4 Stück), Farbe titan	Universal	12953430080000

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links
= Ausführung (1) Größe S, (3) Größe L



01



02




03

EpiTrain®

BEZEICHNUNG	GRÖßE°	ARTIKEL-NR.
01 Gurt, Farbe blau	0–6	1196163408000°



01

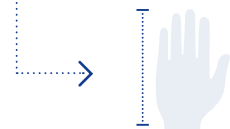

Maßabnahme für die Fingerauflagen

Größe S: bis 18 cm
Größe L: bis 19,5 cm

RhizoLoc® OA

BEZEICHNUNG

01 Daumenwickelgurte (2er)

ARTIKEL-NR.

12953341000000



01

Bei Verwendung von nicht original Bauerfeind-Ersatzteilen entfällt die Gewährleistung auf das gesamte Produkt, in dem das Ersatzteil zur Anwendung kommt.

OmoTrain®

BEZEICHNUNG

01 Umlenkschnalle, Farbe grau

ARTIKEL-NR.

11971720000000



01

OmoLoc®

BEZEICHNUNG

01 Schultergurt

GRÖÖE

Universal

ARTIKEL-NR.

12975060000000



01

WERKZEUGBEDARF ORTHESEN VON BAUERFEIND

LEGENDE

- notwendig
- optional
- enthalten im Lieferumfang

	Innensechskant (Inbus)			Torx			Schere	Maulschlüssel 16 (Schlüssel der MOS)
	1,5	2,5	3	15	20	40		
CaligaLoc ³							○	
Spinova Stabi Classic / Unload							○	
Spinova Support Plus / Unload Plus						●	○	
Spinova Immo / Immo Plus		●				●	○	○
Spinova Osteo							●	
SofTec Lumbo ³							○	
SofTec Dorso ^{1,2}		●					●	
GenuTrain S Pro ³	●							
SecuTec Genu teilmontiert ¹					●			
SecuTec OA ¹			●					
SecuTec OA teilmontiert ¹			●		●			
MOS Genu ¹				●				●
SofTec Coxa			●				●	
CoxaTrain							○	
OmoLoc							○	
RhizoLoc OA							●	

¹ (optional)
Schränkhaaken



² weitere Werkzeuge, wie Puksäge o. ä. zum Kürzen des Rahmens, Werkzeug (Hammer o. ä.) zum Einschlagen / Eindrücken der Einschlagmuttern nötig



³ (optional)
Heißluftpistole



ZUSATZPRODUKTE

DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR DEN ALLTAG



01



01



02



03

01 Anziehhilfe für Bandagen

140 0222 0050 000

Die serienmäßige Anziehhilfe aus silikonbeschichtetem Polyamid spart Zeit und Kraft beim Anlegen von Train-Bandagen für das Sprunggelenk und der Handgelenkbandage ManuTrain.

02 Wäschenetz

10 Stück im Display: 262 6230 0000 000

Stück: 262 6200 0000 000

Sicherer Schutz bei der Maschinenwäsche: Der Reißverschluss-Beutel aus dauerhaftem und besonders feinmaschigem Gewebe hilft beim Sortieren der Wäsche und schützt zuverlässig Ihre Bandagen und Kompressionsstrümpfe.



04



04



04



04



04

03 Waschmittel 180 ml

6 Stück im Display: 262 4230 0000 000

Stück: 262 4200 0000 000

Das Waschmittel reinigt die Kompression-Produkte besonders schonend. Spezielle Wirkstoffe pflegen das empfindliche Gestrick bei der täglichen Wäsche. Es behält Form und Farbe und fühlt sich angenehm an.

04 Hygieneset Bandagen / Orthesen


191 0006 0001 020

Ihre Kunden können die Wirkung der Produkte am besten bei einem Test direkt erspüren. Um bei der Produkttestung Ihre Kunden und das Produkt zu schützen, bitten wir Sie, bei der Anprobe den Unterziehstrumpf zu benutzen. Es gibt eine Uni-Version, mit der Sie alle Umfänge abdecken können.

Tipp: Ziehen Sie vorab den Unterstrumpf in das Produkt und schlagen Sie den oberen und unteren Rand um. Dann ziehen Sie beides gleichzeitig hoch.



Kommiss
(z. B. Patienten
Patientenkürzel)

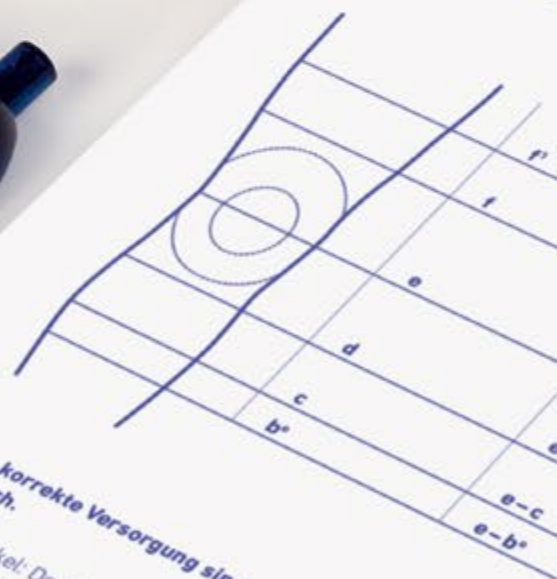

Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.

- f' Oberschenkel: Den Umfang mindestens 14 cm oberhalb der Kniemitte (e) messen. Wenn der Umfang bei f' größer als 47 cm ist, dann unbedingt höher messen, mindestens bei e-f' = 17 cm. (zur Info: Länge e-f' Serie = 19 cm)
- f Oberschenkelansatz (ca. Mitte zwischen e und f')
- e Kniemitte
- d dünnste Stelle unterhalb des Knies (ca. 5–6 cm unterhalb e)
- c (größter) Wadenumfang
- b* unterer Bandagenabschluss (zur Info: Länge e-b* Serie = 13 cm, Länge e-b* mind. 12 cm)

Hinweise:

- Bei leichter Flexion (30°) im Stehen messen.
- Die Längenmaße werden an der Außenseite des Noppenbands.

Der Abstand e-f' sollte nicht kürzer sein als 17 cm.

INDIVIDUELLE VERMESSUNG

MAß- VERSORGUNG



MASSBESTELLUNG
GenuTrain®

141

BAUERFEIND®
BAUERFEIND.COM

E info@bauerfeind.com +49 (0) 800 0 01 05 25
F Deutschland +43 (0) 800 44 30 131
F Österreich +41 (0) 56 485 82 59
F Schweiz

☐ **Kostenvoranschlag**

☐ **Bestellung**

Knie
☐ rechts ☐ links

Farbe
☐ titan ☐ beige

Extras
☐ Haftband* (+5cm zur Länge)
☐ Klettverschluss*
☐ oben**

Angaben zum Patienten***
☐ männlich ☐ weiblich
☐ adipös ☐ muskulös

Körpergröße _____

Alter _____

* aufpreispflichtig
** nicht in Kombination mit Haftband möglich; nicht zirkulär
*** optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben

Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

GenuTrain P3
GenuTrain S
GenuTrain S Pro

RICHTIG MAß NEHMEN FÜR EINEN OPTIMALEN THERAPIEERFOLG

Medizinische Hilfsmittel können nur dann optimal wirken, wenn sie genau passen. Dies setzt unter anderem voraus, dass die relevanten Körpermaße exakt ermittelt werden. Deshalb haben wir für die Maßversorgung verschiedene Bestellblätter entwickelt. Damit können Sie schnell und unkompliziert das gewünschte Bauerfeind-Produkt in der benötigten Ausführung anfordern.

Die einzelnen Bestellblätter können Sie jederzeit unter nachfolgendem Link downloaden:

bauerfeind-group.com/en/service/downloads



TIPPS ZUR MAßABNAHME

Vermessen Sie alle auf den Maßblättern angegebenen Werte – nur bei Vollständigkeit der Daten ist die passgenaue Maßanfertigung möglich.

Personen mit ausgeprägter Schwellneigung vermessen Sie nach Möglichkeit morgens.

Setzen Sie Längenmarkierungen mit einem Kajal oder einem anderen hautverträglichen Stift auf die Haut, um Umfangsmessungen sicher und reproduzierbar zu gestalten.

Bei einer beidseitigen Versorgung sollten Sie jede Seite einzeln vermessen.

Messen Sie nicht auf Zug.

Kontrollieren Sie nach der Vermessung, ob alle erforderlichen Längen- und Umfangsmaße angegeben wurden.

Knie

Maßabnahme erfolgt im Stehen bei 30° Beinstellung, wenn es die körperliche Konstitution zulässt.

Alle Maße sollten am unbedeckten Bein genommen werden.

Zeigt der Kunde ein schwaches Bindegewebe, Hautlappen etc. kann das Anlegen einer Feinstrumpfhose den Messvorgang vereinfachen.

Messung erfolgt seitlich am Bein, ausgehend von der Mitte der Kniescheibe.

Je nach Produkt sollte die erforderliche Mindestlänge der Umfangsmaße beachtet werden.

Ab einem Oberschenkelumfang von mehr als 60 cm wird die Anbringung eines Haftbandes an der Bandage empfohlen.

Fuß

Längenabnahme erfolgt im Stehen, wenn es die körperliche Konstitution zulässt.

Fußlänge wird außen ausgehend von der Ferse bis zum kleinen Zehengrundgelenk gemessen.

MAßBESTELLBLATT

GenuTrain®



141

141

Kommission _____

(z.B. Patientenname,
Patientenkürzel) _____

	Umfang	Länge
	f ¹	e – f ¹
	f	e – f
	e	
	d	e – d
	c	e – c
	b*	e – b*

Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.

- f¹ Oberschenkel: Den Umfang mindestens 14 cm oberhalb der Kniemitte (e) messen. Wenn der Umfang bei f¹ größer als 47 cm ist, dann unbedingt höher messen, mindestens bei e – f¹ = 17 cm. (zur Info: Länge e – f¹ Serie = 19 cm)
- f Oberschenkelansatz (ca. Mitte zwischen e und f¹)
- e Kniemitte
- d dünnste Stelle unterhalb des Knies (ca. 5–6 cm unterhalb e)
- c (größter) Wadenumfang
- b* unterer Bandagenabschluss
Länge e – b* mind. 12 cm (zur Info: Länge e – b* Serie = 13 cm)

Hinweise:

- Bei leichter Flexion (30°) im Stehen messen.
- Die Längenmaße werden an der Außenseite des Beines genommen.
Der Abstand e – f¹ sollte nicht kürzer als der Abstand e – b* sein.
- Ab einem Umfang von f¹ > 60 cm empfiehlt sich die Anbringung eines Noppenhaftbands.

Datenschutzhinweis: Bitte informieren Sie Ihren Kunden über die Weitergabe seiner personenbezogenen Daten im Rahmen der Bestellung und Anfertigung des Maßproduktes an Bauerfeind und holen Sie hierfür, sofern erforderlich, dessen Einwilligung ein. Bauerfeind verarbeitet die Daten zweckgebunden zur Erfüllung des Auftrages, Kundenbetreuung und Qualitätssicherung. Dies schließt, soweit erforderlich, die anlassbezogene Weitergabe an IT-/Versanddienstleister ein. Nähere Informationen zum Datenschutz unter bauerfeind.de/ds.

E info@bauerfeind.com

F Deutschland +49 (0) 800 0 01 05 25

F Österreich +43 (0) 800 44 30 131

F Schweiz +41 (0) 56 485 82 59

☐ **Kostenvoranschlag**☐ **Bestellung**

Knie

☐ links☐ rechts

Farbe

☐ titan☐ beige

Extras*

☐ Haftband (+5 cm zur Länge)

Klettverschluss

☐ oben**

Angaben zum Patienten***

☐ männlich☐ weiblich☐ adipös☐ muskulös

Alter: _____

Körpergröße: _____ cm

* aufpreispflichtig

** nicht in Kombination mit Haftband möglich; nicht zirkulär

*** optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben

Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

Stempel

Kunden-Nr. _____

Unterschrift _____

Datum _____

MAßBESTELLBLATT


GenuTrain® P3




142

Kommission _____

(z. B. Patientenname,
Patientenkürzel) _____
☐ **short** (bis ca. 170 cm Körpergröße)

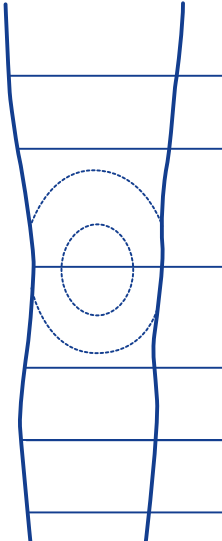	Umfänge	Längen
	f ¹	e – f ¹ = 18 cm
	f	e – f
	e	
	d	e – d
	c	e – c
	b ^e	e – b ^e = 15 cm

☐ **long** (ab ca. 170 cm Körpergröße)

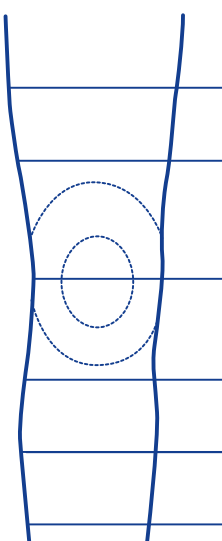	Umfänge	Längen
	f ¹	e – f ¹ = 22 cm
	f	e – f
	e	
	d	e – d
	c	e – c
	b ^e	e – b ^e = 17 cm

Hinweise:

- im Stehen, bei leichter Flexion (30°) messen
- Längenmaße an Beinaußenseite nehmen

Bitte beachten Sie:

- min. Umfang f¹ = 39 cm
- min. Umfang f = 37 cm
- min. Umfang e = 30 cm
- min. Umfang b^e = 28 cm

142

E info@bauerfeind.com**F** Deutschland +49 (0) 800 0 01 05 25**F** Österreich +43 (0) 800 44 30 131**F** Schweiz +41 (0) 56 485 82 59
☐ **Kostenvoranschlag** ☐ **Bestellung**
Knie☐ links☐ rechts**Farbe**☐ titan☐ beige**Sitz des Korrekturzuges**☐ Standard (lateral)☐ Abweichung (medial)**Extras***☐ Haftband (+5 cm zur Länge)**Angaben zum Patienten****☐ männlich☐ weiblich☐ adipös☐ muskulös

Alter: _____

Körpergröße: _____ cm

* aufpreispflichtig – bitte berücksichtigen Sie die zusätzliche Länge beim Vermessen der Patienten

** optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben

Für falsche Maßangaben haftet der Besteller.

Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.f¹ Oberschenkel / oberer Bandagenabschlussf Oberschenkelansatz (ca. Mitte zwischen e und f¹)

e Kniemitte

d dünnste Stelle unterhalb des Knies, ca. 5–6 cm

c (größter) Wadenumfang

b^e unterer Bandagenabschluss


 Stempel

Kunden-Nr. _____

Unterschrift _____

Datum _____

Datenschutzhinweis: Bitte informieren Sie Ihren Kunden über die Weitergabe seiner personenbezogenen Daten im Rahmen der Bestellung und Anfertigung des Maßproduktes an Bauerfeind und holen Sie hierfür, sofern erforderlich, dessen Einwilligung ein. Bauerfeind verarbeitet die Daten zweckgebunden zur Erfüllung des Auftrages, Kundenbetreuung und Qualitätssicherung. Dies schließt, soweit erforderlich, die anlassbezogene Weitergabe an IT-/Versanddienstleister ein. Nähere Informationen zum Datenschutz unter bauerfeind.de/ds.

MAßBESTELLBLATT

GenuTrain® S



143

143

Kommission

(z. B. Patientenname,
Patientenkürzel)

E info@bauerfeind.com

F Deutschland +49 (0) 800 0 01 05 25
F Österreich +43 (0) 800 44 30 131
F Schweiz +41 (0) 56 485 82 59

☐ Kostenvoranschlag

☐ Bestellung

Umfang	Länge
f ¹	short: e - f ¹ = 18 cm long: e - f ¹ = 21 cm
f	e - f
e	
d	e - d
c	e - c
b ^e	e - b ^e = 18 cm

Knie

☐ links ☐ rechts

☐ kurz / short
(Bandagenlänge Oberschenkel [e - f¹] = 18 cm)

☐ lang / long
(Bandagenlänge Oberschenkel [e - f¹] = 21 cm)

Extras*

☐ Haftband (+ 5 cm zur Länge)

Angaben zum Patienten**

☐ männlich ☐ weiblich

☐ adipös ☐ muskulös

Alter: _____ Körpergröße: _____ cm

Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.

f¹ Oberschenkel
kurz / short-Version: Den Umfang bei 18 cm oberhalb der Kniemitte (e) messen.
lang / long-Version: Den Umfang bei 21 cm oberhalb der Kniemitte (e) messen.

f Oberschenkelansatz

e Kniemitte

d dünnste Stelle unterhalb des Knies

c Wadenumfang: Den Umfang mindestens 12 cm unterhalb der Kniemitte (e) messen.

b^e Wadenumfang 18 cm unterhalb der Kniemitte (e)

Hinweise:

- Maßanfertigung nur in der Farbe titan.
- Bei leichter Flexion (30°) messen.
- Die Längenmaße werden an der Außenseite des Beines genommen.
- Die Auswahl der Variante short / long richtet sich nach den individuellen Patientenmaßen. Die Long-Version wird für Personen ab einer Körpergröße von 1,80 m empfohlen.
- Für eine Versorgung sind die folgenden Umfangsmaße mindestens erforderlich:
f (14 cm oberhalb des Knies): mindestens 38 cm
e (Kniemitte): mindestens 32,5 cm
c (12 cm unterhalb des Knies): mindestens 28 cm

Datenschutzhinweis: Bitte informieren Sie Ihren Kunden über die Weitergabe seiner personenbezogenen Daten im Rahmen der Bestellung und Anfertigung des Maßproduktes an Bauerfeind und holen Sie hierfür, sofern erforderlich, dessen Einwilligung ein. Bauerfeind verarbeitet die Daten zweckgebunden zur Erfüllung des Auftrages, Kundenbetreuung und Qualitätssicherung. Dies schließt, soweit erforderlich, die anlassbezogene Weitergabe an IT-/Versanddienstleister ein. Nähere Informationen zum Datenschutz unter bauerfeind.de/ds.



Stempel

Kunden-Nr. _____

Unterschrift _____

Datum _____

MAßBESTELLBLATT

GenuTrain® S Pro



144

144

Kommission

(z. B. Patientenname,
Patientenkürzel)

E info@bauerfeind.com

F Deutschland +49 (0) 800 0 01 05 25

F Österreich +43 (0) 800 44 30 131

F Schweiz +41 (0) 56 485 82 59

☐ Kostenvoranschlag

☐ Bestellung

Umfang	Länge
f ¹	short: e - f ¹ = 18 cm long: e - f ¹ = 21 cm
f	e - f
e	
d	e - d
c	e - c
b ^e	e - b ^e = 18 cm

Knie

☐ links ☐ rechts

☐ kurz / short
(Bandagenlänge Oberschenkel [e - f¹] = 18 cm)

☐ lang / long
(Bandagenlänge Oberschenkel [e - f¹] = 21 cm)

Extras*

☐ Haftband (+ 5 cm zur Länge)

Angaben zum Patienten**

☐ männlich ☐ weiblich

☐ adipös ☐ muskulös

Alter: _____ Körpergröße: _____ cm

Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.

f¹ Oberschenkel
kurz / short-Version: Den Umfang bei 18 cm oberhalb der Kniemitte (e) messen.
lang / long-Version: Den Umfang bei 21 cm oberhalb der Kniemitte (e) messen.

f Oberschenkelansatz

e Kniemitte

d dünnste Stelle unterhalb des Knies

c Wadenumfang: Den Umfang mindestens 12 cm unterhalb der Kniemitte (e) messen.

b^e Wadenumfang 18 cm unterhalb der Kniemitte (e)

Hinweise:

- Maßanfertigung nur in der Farbe titan.
- Bei leichter Flexion (30°) messen.
- Die Längenmaße werden an der Außenseite des Beines genommen.
- Die Auswahl der Variante short / long richtet sich nach den individuellen Patientenmaßen. Die Long-Version wird für Personen ab einer Körpergröße von 1,80 m empfohlen.
- Für eine Versorgung sind die folgenden Umfangsmaße mindestens erforderlich:
f (14 cm oberhalb des Knies): mindestens 38 cm
e (Kniemitte): mindestens 32,5 cm
c (12 cm unterhalb des Knies): mindestens 28 cm

Datenschutzhinweis: Bitte informieren Sie Ihren Kunden über die Weitergabe seiner personenbezogenen Daten im Rahmen der Bestellung und Anfertigung des Maßproduktes an Bauerfeind und holen Sie hierfür, sofern erforderlich, dessen Einwilligung ein. Bauerfeind verarbeitet die Daten zweckgebunden zur Erfüllung des Auftrages, Kundenbetreuung und Qualitätssicherung. Dies schließt, soweit erforderlich, die anlassbezogene Weitergabe an IT-/Versanddienstleister ein. Nähere Informationen zum Datenschutz unter bauerfeind.de/ds.



Stempel

Kunden-Nr. _____

Unterschrift _____

Datum _____

MAßBESTELLBLATT

MalleoTrain®



111

111

Kommission _____
(z. B. Patientenname,
Patientenkürzel) _____

E info@bauerfeind.com

F Deutschland +49 (0) 800 0 01 05 25

F Österreich +43 (0) 800 44 30 131

F Schweiz +41 (0) 56 485 82 59

☐ **Kostenvoranschlag**

☐ **Bestellung**

Fuß

☐ links

☐ rechts

Farbe

☐ titan

☐ beige

Extras*

☐ Klettverschluss

Angaben zum Patienten**

☐ männlich

☐ weiblich

☐ adipös

☐ muskulös


Alter: _____

Körpergröße: _____ cm

* aufpreispflichtig

** optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine
passgenaue Anfertigung angeben

**Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen
werden nicht zurückgenommen.**

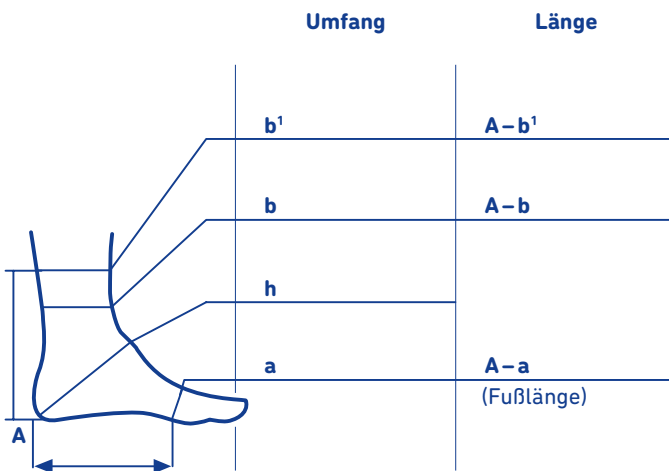

**Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben
erforderlich.**

b' Wadenansatz: Den Umfang mindestens 16 cm oberhalb der
Ferse (A) messen.

b kleinster Umfang oberhalb des Knöchels

h Spann (zirkuläres Maß vom Spann über die Ferse gemessen)

a Umfang hinter dem Kleinzehengrundgelenk

A Ferse

A - a Fußlänge ohne Spitze (außen am Fuß gemessen mind. 14 cm)

Datenschutzhinweis: Bitte informieren Sie Ihren Kunden über die Weitergabe seiner
personenbezogenen Daten im Rahmen der Bestellung und Anfertigung des Maßproduktes an
Bauerfeind und holen Sie hierfür, sofern erforderlich, dessen Einwilligung ein. Bauerfeind
verarbeitet die Daten zweckgebunden zur Erfüllung des Auftrages, Kundenbetreuung und
Qualitätssicherung. Dies schließt, soweit erforderlich, die anlassbezogene Weitergabe an
IT-/Versanddienstleister ein. Nähere Informationen zum Datenschutz unter bauerfeind.de/ds.



Stempel

Kunden-Nr. _____

Unterschrift _____

Datum _____

MAßBESTELLBLATT


EpiTrain®



161

161

Kommission _____

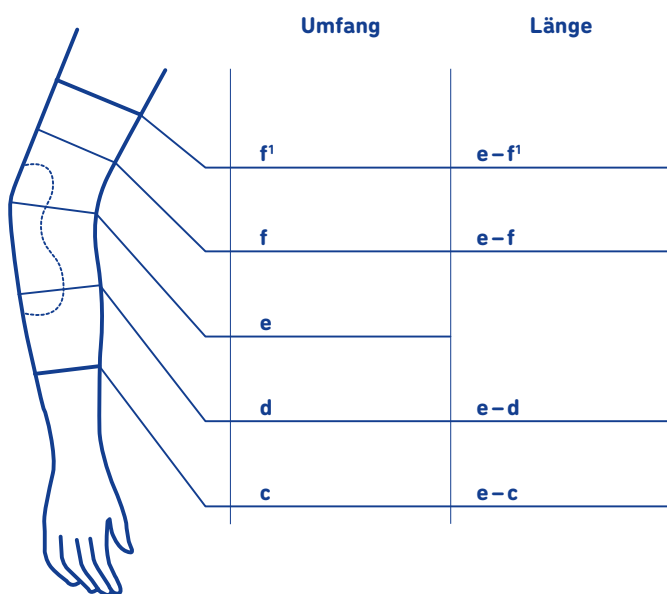(z. B. Patientenname,
Patientenkürzel) _____

Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.

- f¹ Oberarm: Den Umfang mindestens 10 cm oberhalb der Ellenbogenbeuge (e) messen.
- f Oberarmansatz
- e Ellenbogenbeuge
- d Mitte Unterarmmuskel
- c Muskelansatz: Den Umfang mindestens 12 cm unterhalb der Ellenbogenbeuge (e) messen.

Hinweise:

- Bei leichter Flexion (30°) messen.
- Die Längenmaße werden an der Innenseite des Armes genommen. Ausgangspunkt für die Ermittlung ist die Ellenbogenbeuge (e).

Datenschutzhinweis: Bitte informieren Sie Ihren Kunden über die Weitergabe seiner personenbezogenen Daten im Rahmen der Bestellung und Anfertigung des Maßproduktes an Bauerfeind und holen Sie hierfür, sofern erforderlich, dessen Einwilligung ein. Bauerfeind verarbeitet die Daten zweckgebunden zur Erfüllung des Auftrages, Kundenbetreuung und Qualitätssicherung. Dies schließt, soweit erforderlich, die anlassbezogene Weitergabe an IT-/Versanddienstleister ein. Nähere Informationen zum Datenschutz unter bauerfeind.de/ds.

E info@bauerfeind.com

F Deutschland +49 (0) 800 0 01 05 25

F Österreich +43 (0) 800 44 30 131

F Schweiz +41 (0) 56 485 82 59

☐ **Kostenvoranschlag**☐ **Bestellung**

Arm

☐ links☐ rechts

Farbe

☐ titan☐ beige

Extras*

☐ Haftband (+3 cm zur Länge)

Klettverschluss

☐ oben**☐ unten

Angaben zum Patienten***

☐ männlich☐ weiblich☐ adipös☐ muskulös

Alter: _____

Körpergröße: _____ cm

* aufpreispflichtig

** nicht in Kombination mit Haftband möglich; nicht zirkulär

*** optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben

Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.



Stempel

Kunden-Nr. _____

Unterschrift _____

Datum _____

Firma (Stempel)	
Lieferadresse (falls abweichend)	
Kunden-Nr.	[] [] [] [] [] []
Ansprechpartner	T +49 (0) 36628 66-1660 F +49 (0) 36628 66-1699
Datum	Bauerfeind AG
Mitarbeiter	Triebeser Straße 16 07937 Zeulenroda-Triebes
Unterschrift	info@bauerfeind.com

Artikelnummer												Artikel	Farbe			Version		Ausführung		Größe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													titan	beige	schwarz	short	long	R	L	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Ihre Notizen

Wir verweisen auf unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN (AGB) FÜR UNTERNEHMER

STAND: OKTOBER 2025

1. Geltungsbereich

Diese AGB gelten in Deutschland und richten sich ausschließlich an Unternehmer (nachfolgend als Kunde bezeichnet) im Sinne des § 14 BGB, juristische Personen des öffentlichen Rechts / öffentlich-rechtliches Sondervermögen.

Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Kunden-AGB werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Diese Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Kunden die Lieferung vorbehaltlos ausführen.

2. Angebot und Vertragsschluss

Verträge kommen zustande, wenn wir das Vertragsangebot des Kunden schriftlich annehmen oder die bestellte Ware – ganz oder teilweise – ausliefern. Teillieferungen gelten als Annahme des Vertragsangebotes hinsichtlich der gelieferten Ware.

Für die Richtigkeit der vom Kunden übermittelten oder die beauftragten Daten, insbesondere Maße, Spezifikationen und sonstige Bestellangaben, ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Bestellfehler, insbesondere aufgrund fehlerhaften Maßnehmens, gehen allein zu Lasten des Kunden. Erfolgen mehrere personenbezogene Bestellungen (Erst- und Wechselversorgung) gleichzeitig, trägt der Kunde hinsichtlich der Wechselversorgung das Risiko, wenn die Maßanfertigung nicht passt. Eine kostenfreie Nachfertigung für die Wechselversorgung ist in diesem Fall ausgeschlossen.

Maßgeblich für die Beschaffenheit der Produkte sind die jeweils gültigen Produktbeschreibungen in unseren offiziellen Produktinformationen und -katalogen. Produktabbildungen auf anderen Medien (z.B. Webseite, Onlineshop) dienen lediglich der Veranschaulichung und können aufgrund technischer Gegebenheiten von der tatsächlichen Produktgestaltung geringfügig abweichen, ohne dass dies einen Mangel darstellt.

3. Preise

Alle Preise verstehen sich netto in Euro ab Werk zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen Listenpreise.

4. Zahlungsbedingungen

Zahlungen sind nach Lieferung sofort fällig. Bei Teilnahme am Bankeinzugsverfahren gewähren wir 4 Prozent Skonto, bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum 3 Prozent Skonto. Ansonsten gilt als Zahlungsziel 30 Tage netto. Nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechnungsdatum befindet sich der Käufer im Zahlungsrückstand. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt die Lieferung nur noch gegen Vorauskasse. Wir berechnen ab dem Zeitpunkt eines eingetretenen Zahlungsrückstandes Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozent über dem jeweiligen Basiszinssatz. Maßgebend ist die Gutschrift auf das Konto.

Die Bauerfeind AG bietet Vertragspartnern als sicheres Zahlungsverfahren das Bankeinzugsverfahren an. Bei Zahlungen auf Rechnungsbasis sind Vertragspartner stets aufgefordert, die angegebenen Vertragsangaben und Kontodaten zu prüfen, um Manipulationen durch Dritte (z.B. durch Cybersecurity) zu erkennen und Vermögensschäden zu vermeiden.

5. Aufrechnung und Zurückbehaltung

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, soweit seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.

6. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt gilt anteilmäßig auch dann, wenn die Ware be- oder verarbeitet worden ist. Bei einer Weiterveräußerung tritt der Käufer bereits jetzt alle daraus entstehenden Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages an uns ab. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen berechtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Übersteigen die uns zustehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 %, geben wir Sicherheiten auf Verlangen des Käufers frei. Der Käufer darf die Ware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Pfändungen oder sonstige Eingriffe Dritter hat er uns unverzüglich mitzuteilen.

7. Lieferung und Gefahrübergang

Die Gefahr geht mit Übergabe an den Spediteur / Frachtführer auf den Kunden über, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Betriebsstörungen bei uns oder einem unserer Lieferanten, Personalmangel, Streik, Aussperrung sowie höhere Gewalt berechtigen uns, die Lieferzeiten zu verlängern und entbinden uns für die Dauer der Behinderung von jeder Lieferverpflichtung.

Ein Versand der Ware unmittelbar an eine vom Firmensitz abweichende Adresse erfolgt nur aufgrund einer gesonderten Vereinbarung. In diesem Fall gilt unsere Lieferpflicht gegenüber dem Kunden mit der ordnungsgemäßen Übergabe der Ware an den Spediteur / Frachtführer als erfüllt. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auch beim Versand an

Dritte mit der Übergabe an den Spediteur / Frachtführer auf den Kunden über. Eine unmittelbare vertragliche Beziehung zwischen uns und dem Empfänger der Ware wird hierdurch nicht begründet.

8. Versandkosten

Die Versandkosten berechnen wir pauschal. Der Auftragswert bezieht sich stets auf eine Lieferanschrift. Maßanfertigungen sind versandkostenfrei. Besondere Versandwünsche (z.B. Palettensendung, Auswahl Spediteur) werden nach Aufwand berechnet. Es gilt die Staffelung unter Punkt 14 am Ende des Dokuments.

9. Gewährleistung

Soweit nicht anders vereinbart, ergibt sich die vertraglich geschuldete Beschaffenheit der Ware ausschließlich aus den vereinbarten Produktspezifikationen, insbesondere den Produktbeschreibungen. Dies gilt insbesondere für die Haltbarkeit der Ware. Unsere Ware ist gemäß der vereinbarten Beschaffenheit nur für die ein- bzw. erstmalige Verwendung beim Kunden geschaffen. Der Kunde ist uneingeschränkt verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt, spätestens nach 14 Tagen, zu prüfen und etwaige Mängel, Abweichungen oder Transportschäden ohne schuldhaftes Zögern schriftlich anzuzeigen sowie den Mangel genau zu beschreiben. Dies gilt auch – insbesondere bei Maßversorgungen – im Falle von abweichenden Lieferanschriften. Rücksendungen ohne ausreichende Fehlerbeschreibung können von uns nicht bearbeitet werden.

Erfolgt innerhalb einer angemessenen Frist nach Aufforderung keine Konkretisierung des behaupteten Mangels, gilt die Ware als mangelfrei und wird auf Kosten sowie Risiko des Kunden zurückgesandt. Erfolgt keine rechtzeitige Anzeige, gilt die Ware als genehmigt. Bei berechtigten Mängelrügen leisten wir nach unserer Wahl Ersatz oder bessern nach.

Reparaturen können aus hygienischen Gründen nur an gewaschenen bzw. hygienisch einwandfreien Artikeln ausgeführt werden. Bei der Einsendung von ungewaschener Ware behalten wir uns die Berechnung einer angemessenen Aufwandspauschale (10 Euro) vor. Solange wir unseren Verpflichtungen zur Nacherfüllung nachkommen, insbesondere zur Behebung von Mängeln oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache, hat der Kunde kein Recht, eine Herabsetzung der Vergütung zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären, sofern nicht ein Fehlschlagen der Nacherfüllung vorliegt. Im Übrigen verjähren Gewährleistungsansprüche ein Jahr nach Übergabe der Ware.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die auf normalen Verschleiß, übermäßige Beanspruchung, missbräuchliche Verwendung, unsachgemäße Behandlung, Vernachlässigung der Pflege, unsachgemäße Lagerung oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind. Für medizinische Kompressionstrümpfe im Sinne des RAL Standards gelten insbesondere die Bestimmungen der jeweils gültigen Normen hinsichtlich Haltbarkeit, Wirksamkeit, Vermessung oder z.B. des Druckverlaufs.

10. Warenrückgabe und Reparaturen

Außerhalb der Gewährleistung werden Warenrückgaben erst nach vorheriger Ankündigung und Abstimmung der Rücksendung (Avisierung) unter Beifügung der Lieferpapiere entgegengenommen, wobei wir den einwandfreien Zustand der Ware nebst Verpackung voraussetzen. Bei unvollständigen Rücksendungen berechnen wir 10 Euro Bearbeitungsgebühr pro Rücksendung. Die Avisierung kann über unseren Onlineshop, per E-Mail oder telefonisch (Kundenservice) vorstattengehen. Ein generelles Verweigerungsrecht für solche Warenrückgaben behalten wir uns vor.

Erfolgen unangekündigte oder nicht genehmigte Warenrückgaben und holt der Kunde die Ware nach Aufforderung nicht innerhalb von sechs (6) Wochen ab, sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten des Kunden zu entsorgen.

Eine Warengutschrift erfolgt ausschließlich bei einwandfreier Ware. Bei Rücksendungen ab einem Monat nach Lieferdatum werden 20 Prozent des Nettoauftragswertes, maximal aber 25 Euro pro Artikel und Stück als Bearbeitungsgebühr berechnet, bei Rücksendung ab sechs Monaten bis 12 Monaten nach Lieferdatum werden 40 Prozent des Nettoauftragswertes, maximal jedoch 50 Euro pro Artikel und Stück berechnet. Für Maß- und Sonderprodukte sowie sämtliche Rücksendungen über 12 Monate nach Lieferdatum ist eine Rückgabe außerhalb der Gewährleistung in jedem Fall ausgeschlossen.

11. Haftungsausschluss

Wir haften unbeschränkt im Falle der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Außerdem haften wir unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Übrigen ist unsere Haftung beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Wir haften ferner in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung, beispielsweise nach dem Produkthaftungsgesetz. Im Übrigen ist unsere Haftung – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen, soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist.

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Diese AGB unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG). Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist Gera, sofern der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch in allen Fällen ebenfalls berechtigt, Klage am Erfüllungsort oder am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere bezüglich ausschließlicher Zuständigkeiten, bleiben unberührt. Erfüllungsort für die Lieferung ist der Sitz unseres Unternehmens. Die AGB-Anlage zur Erfüllung der Anforderungen der Europäischen Medizinprodukteverordnung (EU 2017/745) ist Inhalt des Vertrages.

13. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Regelung tritt die gesetzliche Vorschrift.

14. Staffelung Versandkosten

Verkaufsorganisation Bauerfeind Medical (BFME)

	Nettoauftragswert <= 50 €	Nettoauftragswert <= 200 €	Nettoauftragswert >= 200 €	Maßanfertigung
Bestellkanal				
E-Mail / Fax	7,00 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €
Telefon	7,00 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €
Onlineshop	4,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €
Schnittstelle	4,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €

Verkaufsorganisation Bauerfeind Sports (SPDE)

	Nettoauftragswert <= 100 €	Nettoauftragswert >= 100 €
Bestellkanal		
E-Mail / Fax	6,95 €	0,00 €
Telefon	6,95 €	0,00 €
Onlineshop	6,95 €	0,00 €
Schnittstelle	6,95 €	0,00 €

DATENSCHUTZ-HINWEIS:

Die von Ihnen im Rahmen der Bestellung erhobenen und gegebenenfalls an uns übermittelten Patientendaten werden von uns zur Auftragsbearbeitung erfasst und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gespeichert. Bitte informieren Sie die betreffenden Patienten hierüber und holen Sie, sofern erforderlich, die entsprechende Einwilligung hierfür ein, bevor Sie den Auftrag an uns übermitteln. Bei Nichtbeachtung können Bußgelder und andere Zwangsmaßnahmen verhängt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter bauerfeind.de/ds.

HAFTUNGSHINWEISE:

Alle Angaben in diesem Material haben den Stand des Zeitpunkts der Drucklegung. Das Material ermöglicht – je nach Darstellung – einen ersten Überblick über das Fachgebiet und schlägt ausgewählte medizinische Diagnose- / Behandlungsmöglichkeiten vor. Obgleich wissenschaftlich fundiert, erheben die Darstellungen keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit / Vorstellung aller Lehrmeinungen. Sämtliche Inhalte des Materials / oder deren – auch auszugsweise – Online-Darstellung, insbesondere solche zu Diagnostik und Behandlungsformen (Texte, Bilder, Grafiken etc.), verstehen sich als unverbindliche Unterstützung der durch Arzt und Fachpersonal auszuwählenden Therapie. Das Material ersetzt nicht die notwendige persönliche Anamnese und deren fachliche Gesamtbewertung eines Arztes / sachgerecht und qualifiziert ausgebildeten Fachpersonals unter Einbeziehung ggf. bereits laufender Therapien.

Das Material ist nur für das medizinische Fachpersonal bestimmt, nicht für Fachfremde, insbesondere nicht für Patienten.

In Zweifelsfällen suchen Sie bitte ergänzenden fachlichen Rat, auch wir unterstützen hierbei gern.

Für ergänzende Hinweise zu Indikationen, Kontraindikationen und der Handhabung des von Ihnen gewünschten Produkts bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung konsultieren!

MEHR LEBENSQUALITÄT FÜR IHRE KUNDEN!

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche?
Kontaktieren Sie uns:

BAUERFEIND AG

Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany

T +49 (0) 800 0 01 05 20

F +49 (0) 800 0 01 05 25

E info@bauerfeind.com